

FT-1269-24 ⑦ 7/4

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope $b=$ 0.10690 intercept $a=$ -0.49652 $r=$ 0.99912 檢量線分析日期: 115.03.10

BT115W676541-002.003

0445-001
0498-001
0499-001
0509-001
0525-001
0527-001

中環科技事業股份有限公司

硫酸鹽SO4= 檢量線

FT-1869-14 ④ 1/4

審核人：

甘
15

分析日期：115.04.10

分析人員：FT

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.08993

intercept a= 0.00066

r = 0.99949

檢量線1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	0.3	0.027	0.2929	-2.4
#2	0.5	0.045	0.4931	-1.4
#3	0.8	0.075	0.8266	3.3
#4	1.0	0.090	0.9934	-0.7
#5	1.5	0.135	1.4938	-0.4
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.09072

intercept a= -0.01327

r = 0.99985

檢量線2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	1.5	0.135	1.6344	9.0
#2	3.0	0.260	3.0122	0.4
#3	5.0	0.440	4.9964	-0.1
#4	8.0	0.691	7.7631	-3.0
#5	15.0	1.351	15.0382	0.3
#6	20.0	1.806	20.0537	0.3
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.10690

intercept a= -0.49652

r = 0.99912

檢量線3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	20.0	1.806	21.5390	7.7
#2	30.0	2.747	30.3416	1.1
#3	40.0	3.672	38.9946	-2.5
#4	50.0	4.706	48.6672	-2.7
#5	80.0	7.950	79.0133	-1.2
#6	100.0	10.349	101.4548	1.5
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.12899

intercept a= -2.86583

r = 0.99846

檢量線4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	80.0	7.950	83.8501	4.8
#2	100.0	10.349	102.4485	2.4
#3	150.0	15.775	144.5138	-3.7
#4	200.0	22.266	194.8355	-2.6
#5	300.0	36.389	304.3246	1.4
#6				
#7				
#8				
#9				

87115wb16541-002.003

中環科技事業股份有限公司

硫酸鹽SO4= 檢量線

FT-1269-14 ④ 14

審核人：

15

④
4/40445-001
0498-001
0499-001
0509-001
0525-001
0527-001

分析日期：115.04.10

分析人員：FT

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.08993

intercept a= 0.00066

r = 0.99949

檢量線1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	0.3	0.027	0.2929	-2.4
#2	0.5	0.045	0.4931	-1.4
#3	0.8	0.075	0.8266	3.3
#4	1.0	0.090	0.9934	-0.7
#5	1.5	0.135	1.4938	-0.4
#6				✓
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.09072

intercept a= -0.01327

r = 0.99985

檢量線2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	1.5	0.135	1.6344	9.0
#2	3.0	0.260	3.0122	0.4
#3	5.0	0.440	4.9964	-0.1
#4	8.0	0.691	7.7631	-3.0
#5	15.0	1.351	15.0382	0.3
#6	20.0	1.806	20.0537	0.3
#7				✓
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.10690

intercept a= -0.49652

r = 0.99912

檢量線3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	20.0	1.806	21.5390	7.7
#2	30.0	2.747	30.3416	1.1
#3	40.0	3.672	38.9946	-2.5
#4	50.0	4.706	48.6672	-2.7
#5	80.0	7.950	79.0133	-1.2
#6	100.0	10.349	101.4548	1.5
#7				✓
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.12899

intercept a= -2.86583

r = 0.99846

檢量線4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	80.0	7.950	83.8501	4.8
#2	100.0	10.349	102.4485	2.4
#3	150.0	15.775	144.5138	-3.7
#4	200.0	22.266	194.8355	-2.6
#5	300.0	36.389	304.3246	1.4
#6				✓
#7				
#8				
#9				

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期：115.03.25

吸光分析報告表

830W
DW-226-80-83

分析方法：NIEA W418

分析項目：NO2-N

儀器名稱：UV-F

分析人員：DW

分析日期：115.04.10

使用波長：543 nm

定量極限：0.002

偵測極限：0.00017

審核人：AS/K

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 2.9150

intercept a= 0.000367

截距濃度= 0.000126

✓r=1.0000

RF	標準樣品#	X 濃度	Y 吸光度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%	水質水量 重複% 4.6	QC樣品回收率% 94.4~104.5	添加分析回收率% 78.2~113.3
	#1	0	-0.0001	-0.00016				
3.100	#2	0.002	0.0062	0.00200	0.0	地下水 重複% 5.6	QC樣品回收率% 93.6~106.1	添加分析回收率% 75.0~113.7
3.025	#3	0.004	0.0121	0.00403	0.7	飲用水 重複% 5.5	QC樣品回收率% 93.8~105.6	添加分析回收率% 75.0~114.7
2.930	#4	0.01	0.0293	0.00993	-0.7			
2.965	#5	0.02	0.0593	0.02022	1.1			
2.928	#6	0.04	0.1171	0.04005	0.1			
2.917	#7	0.1	0.2917	0.09994	-0.1			
	#8					公告 重複% 0~20	QC樣品回收率% 80~120	添加分析回收率% 75~125
檢量線	確認 (ICV)	0.01	0.0300	0.01017	1.7	f 值		
	查核1 (CCV)	0.01	0.0302	0.01023	2.3	1.0000 R		
	查核2 (CCV)	0.01	0.0308	0.01044	4.4	1.0000 QC		
RF平均值 2.978	方法空白1	0	0.0003	-0.00002		空白平均值	-0.00002	
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
RF範圍2.085 ~ 3.871	查核分析1	0.01	0.0293	0.00993		99.3		
	查核分析2							

樣品分析						A×DF×f	
樣品編號	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	樣品中待測物濃度	分析員確認值
ET115WG0445-001	0.0025			1.0	0.00073	0.00073	<0.01
ET115WG0498-001	0.1538			1.0	0.05264	0.05264	0.05
ET115WG0499-001	0.0090			1.0	0.00296	0.00296	<0.01
ET115WG0509-001	0.0335			1.0	0.01137	0.01137	0.01
ET115WG0525-001	0.0182			1.0	0.00612	0.00612	0.01
ET115WG0527-001	0.0373			1.0	0.01267	0.01267	0.01
ET115WG0528-001	0.0058			1.0	0.00186	0.00186	<0.01
ET115WG0541-001	0.0040			1.0	0.00125	0.00125	<0.01
ET115WG0541-002	0.0054			1.0	0.00173	0.00173	<0.01
ET115WG0541-003	0.0056			1.0	0.00180	0.00180	<0.01

重複分析						A×DF×f		
樣品編號	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	樣品濃度	平均值	差異百分比
ET115WG0445-001MS	0.0306			1.0	0.01037	0.01037	0.01036	0.3
ET115WG0445-001MSD	0.0305			1.0	0.01034	0.01034		

添加分析									
樣品編號	吸光度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0445-001	0.0306	0.00073	49	0.5	1	50	1.0	0.01037	96.5

註1：重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100% 註4：除另行註明外，濃度及體積單位分別為 mg/L及mL。

註2：添加回收率=(ExF-AxB)÷(Cx×D)×100%

註3："#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.10

DW

樣品編號 樣品數量 稀釋倍數 分析數值

NO2-N(W418)【LIMS】0410(DW)-瑤P(3)

分析方法: NIEA W433

吸光分析報告表

DD-316-054-258

分析項目: Sulfide硫化物 儀器名稱: UV-D 分析人員: DD 分析日期: 115.04.11
使用波長: 664 nm 定量極限: 0.020 偵測極限: 0.0056 審核人: 李
線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope b= 0.7769 intercept a= 0.008987 r= 0.9991

QC低濃度	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 13.0	84.2~113.9	75.0~125.0
#1	0	0.0115	0.0032		地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#2	0.02	0.0228	0.0178	-11.0	重複% 10.0	84.2~113.0	75.0~125.0
#3	0.05	0.0466	0.0484	-3.2	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#4	0.1	0.0849	0.0977	-2.3	重複% 15.0	80.0~120.0	75.0~125.0
#5	0.2	0.1700	0.2073	3.7	公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#6	0.25	0.1998	0.2456	-1.8	重複% 20	80~120	75~125
#7					溫泉水(公告)	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#8					重複% 20	80~120	75~125
檢量線 (±10%)	確認 (ICV)	0.048165	0.0446	0.0458	0.0460	-4.5	f 值
	查核1 (CCV)	0.1	0.0822	0.0942		-5.8	R
	查核2 (CCV)	0.1	0.0869	0.1003		0.3	QC
方法空白1	0	0.0130	0.0052	0.0052	空白平均值	0.0042	
方法空白2	0	0.0114	0.0031	0.0031	查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
查核分析1	0.048165	0.0468	0.0487	0.0489	101.5	0.0506	6.7
查核分析2	0.048165	0.0495	0.0521	0.0523	108.6	-	-

樣品分析						已扣色度空白	(AxDfxf)	
樣品編號	吸光度	色度空白	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	濃度 A	樣品中待測物濃度A	分析員確認值
ET115WG0507-001	0.0113	0.0044			1.0	-0.0027	-0.0027	ND<0.0056
ET115WG0508-001	0.0095	0.0047			1.0	-0.0054	-0.0054	ND<0.0056
ET115WG0522-001	0.0107	0.0031			1.0	-0.0018	-0.0018	ND<0.0056
ET115WG0523-001	0.0114	0.0041			1.0	-0.0022	-0.0022	ND<0.0056
ET115WG0524-001	0.0111	0.0056			1.0	-0.0045	-0.0045	ND<0.0056
ET115WG0526-001	0.0134	0.0038			1.0	0.0008	0.0008	ND<0.0056
ET115WG0495-001	0.0095	0.0039			1.0	-0.0044	-0.0044	ND<0.0056
ET115WG0505-001	0.0105	0.0031			1.0	-0.0020	-0.0020	ND<0.0056
ET115WG0506-001	0.0090	0.0026			1.0	-0.0033	-0.0033	ND<0.0056
ET115WG0510-001	0.0093	0.0035			1.0	-0.0041	-0.0041	ND<0.0056
ET115WG0518-001	0.0105	0.0039			1.0	-0.0031	-0.0031	ND<0.0056
ET115WG0516-001	0.0091	0.0031			1.0	-0.0038	-0.0038	ND<0.0056
ET115WG0521-001	0.0171	0.0041			1.0	0.0052	0.0052	ND<0.0056
ET115WG0445-001	0.0193	0.0052			1.0	0.0066	0.0066	<0.02
ET115WG0498-001	0.0146	0.0037			1.0	0.0025	0.0025	ND<0.0056
ET115WG0499-001	0.0163	0.0041			1.0	0.0041	0.0041	ND<0.0056
ET115WG0509-001	0.0153	0.0074			1.0	-0.0014	-0.0014	ND<0.0056
ET115WG0525-001	0.0140	0.0023			1.0	0.0035	0.0035	ND<0.0056
ET115WG0527-001	0.0157	0.0039			1.0	0.0036	0.0036	ND<0.0056
ET115WG0528-001	0.0167	0.0063			1.0	0.0018	0.0018	ND<0.0056

重複分析	吸光度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	已扣色度空白	AxDfxf	色度	平均值	差異百分比
樣品編號	吸光度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	濃度 A	樣品濃度	空白	平均值	差異百分比
ET115WG0507-001MS	0.0504			1.0	0.0476	0.0478	0.0044	0.0498	8.0
ET115WG0507-001MSD	0.0535			1.0	0.0516	0.0518	0.0044		
ET115WG0518-001MS	0.0515			1.0	0.0497	0.0499	0.0039	0.0490	3.7
ET115WG0518-001MSD	0.0501			1.0	0.0479	0.0481	0.0039		

添加分析	吸光度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	DF	色度	已扣色度空白	回收率%
樣品編號	吸光度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	DF	空白	濃度 F	回收率%
ET115WG0507-001	0.0504	0.0000	99	4.8165	1	100	1.0	0.0044	0.0478	99.2
ET115WG0518-001	0.0515	0.0000	99	4.8165	1	100	1.0	0.0039	0.0499	103.6

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

註2: 添加回收率=(ExF-AxB)÷(CxD)×100%

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☐稀釋倍數 ☒分析數值

註3: "H" 表連續稀釋

數據繳交日期: 115.04.11

附錄 214

中環科技事業股份有限公司

吸光分析報告表

最新確認日期: 115.02.01

EZ-101-074~075
4/4 EZ

分析方法: NIEA W434

分析項目: As(水質) 儀器名稱: AA-900 分析人員: EZ
使用波長: 193.7 nm 零點校正液: 10% HCl 偵測極限: 0.00013

分析日期: 115.04.13

審核人:

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope $b=0.0162$ intercept $a=0.000242$ 截距濃度= 0.000015 $r=0.9999$ 定量極限: 0.0010

RF	標準樣品#	X 濃度(μg/L)	Y 吸光度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%	水質水量	QC樣品回收%	添加分析回收%
	#1	0	0.0000	-0.01494		重複% 12.7	82.3~120.0	75.0~124.3
0.0161	#2	1	0.0161	0.97889	-2.1	地下水	QC樣品回收%	添加分析回收%
0.0156	#3	2	0.0312	1.91099	-4.5	重複% 11.4	89.8~118.3	76.4~121.3
0.0170	#4	4	0.0680	4.18259	4.6	飲用水	QC樣品回收%	添加分析回收%
0.0165	#5	6	0.0988	6.08383	1.4	重複% 5.9	81.5~120.0	84.3~116.5
0.0162	#6	8	0.1298	7.99741	0.0			
0.0161	#7	10	0.1608	9.91099	-0.9			
0.0163	#8	16	0.2605	16.06531	0.4	公告	QC樣品回收%	添加分析回收%
檢量線	確認 (ICV)	3	0.0552	3.39247	13.1	重複% 0~20	80~120	75~125
	查核1 (CCV)	4	0.0698	4.29370	7.3			
	查核2 (CCV)	4	0.0725	4.46037	11.5			
檢量線	ICB	0	0.0004	0.00975		ND		
	CCB 1	0	0.0006	0.02210		ND		
	CCB 2	0	0.0004	0.00975		ND		
RF平均值 0.0163	方法空白1	0	-0.0004	-0.03963		空白平均值	-0.00004	
	方法空白2					查核樣品回收率%	差異%	平均值
RF範圍 0.0114 ~ 0.0212	查核分析1	3	0.0514	3.15790		105.3		3.157900
	查核分析2					-	-	-

樣品分析	F'	吸光度	取樣體積	稀釋體積	DF	A	A=1000×DF×F'	分析員確認值
樣品編號	前處理稀釋倍數	吸光度	取樣體積	稀釋體積	消化後稀釋倍數	濃度(μg/L)	樣品中濃度	分析員確認值
ET115WG0526-001	1.0	0.2418			1.0	14.910988	0.014911	0.0149
ET115WG0495-001	1.0	0.1715	5.0	50.0	10.0	10.571481	0.105715	0.106
ET115WG0505-001	1.0	0.1348	5.0	25.0	5.0	8.306049	0.041530	0.0415
ET115WG0506-001	1.0	0.0993	5.0	25.0	5.0	6.114691	0.030573	0.0306
ET115WG0510-001	1.0	0.1412			1.0	8.701111	0.008701	0.0087
ET115WG0516-001	1.0	0.0198			1.0	1.207284	0.001207	0.0012
ET115WG0518-001	1.0	0.0925			1.0	5.694938	0.005695	0.0057
ET115WG0521-001	1.0	0.0852	5.0	25.0	5.0	5.244321	0.026222	0.0262
ET115WG0445-001	1.0	0.0070			1.0	0.417160	0.000417	<0.0010
ET115WG0498-001	1.0	0.0862	5.0	25.0	5.0	5.306049	0.026530	0.0265

重複分析	F'	吸光度	取樣體積	稀釋體積	DF	A	A=1000×DF×F'	平均值
樣品編號	前處理稀釋倍數	吸光度	取樣體積	稀釋體積	消化後稀釋倍數	濃度(μg/L)	樣品濃度	差異百分比
ET115WG0526-001	1.0	0.2418			1.0	14.910988	0.014911	0.014936
ET115WG0526-001D	1.0	0.2426			1.0	14.960370	0.014960	0.3

添加分析	吸光度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
樣品編號	吸光度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0526-001	0.1192	0.014911	24.5	0.2	0.5	25	2.5	0.007343	93.6

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註5: 檢量線與樣品消化時, 已稀釋2倍

註2: 添加回收率=(ExF-AxB)÷(Cx×D)×100%

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為mg/L及mL

註4: "H" 主油罐稀釋 數據總入口期: 115.04.13

附錄二-215

☐樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W436

分析項目：NO₃⁻N

儀器名稱： FIA-D

分析人員： DW

分析日期： 115.04.10

使用波長： 540 nm

定量極限： 0.01

偵測極限： 0.0019

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 0.6561$

```
intercept a= -0.001103
```

截距濃度 = -0.001681

$$r=0.9999$$

低濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
RF	標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 8.5	91.0~109.6	75.8~125.0
	#1	0	-0.0014	-0.0005		地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.610	#2	0.01	0.0061	0.0110	10.0	重複% 5.7	86.7~114.5	77.2~118.6
0.620	#3	0.02	0.0124	0.0206	3.0	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.622	#4	0.05	0.0311	0.0491	-1.8	重複% 8.7	85.4~114.2	83.3~119.1
0.641	#5	0.1	0.0641	0.0994	-0.6	<div>公告</div> <div>QC樣品回收率%</div> <div>添加分析回收率%</div> <div>重複% 0~15</div> <div>80~120</div> <div>75~125</div>		
0.652	#6	0.2	0.1304	0.2004	0.2			
	#7							
	#8							
檢量線	確認 (ICV)	0.05	0.0319	0.0503	0.6	分析日期	錫管轉化效率(%)	錫管轉化效率查核(%)
	查核1 (CCV)	0.1	0.0688	0.1065	6.5	115.04.09	99.3	100.8
	查核2 (CCV)	0.1	0.0690	0.1068	6.8	★NO ₃ ⁻ -N濃度=TON測值-(NO ₂ ⁻ -N濃度÷錫管轉化效率×100)		
	查核3 (CCV)							
RF平均值	方法空白1	0	-0.0007	0.0006		空白平均值		0.0006
0.629	方法空白2					查核樣品回收率%		平均值
RF範圍0.440	查核分析1	0.05	0.0345	0.0543		108.6		
~ 0.818	查核分析2					—		—

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: $\text{NO}_3^- \text{N}$ 濃度 = NO_3^- 濃度 $\times 0.226$

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註5: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

註3: " #" 表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.10

附錄二-2

☒樣品編號 ☐樣品數量 ☐稀釋倍數 ☒分析數值
NO3-N & TON(FIA) 【D】 (NIEA W436) 【LIMS】 0410(DW)-瑤<低>P(3)

4/2 00 最新確認日期：115.02.01

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W437

分析項目： $\text{NH}_3\text{-N}$

儀器名稱：

FIA-C

分析人員：

DD

分析日期：

115.04.10

使用波長： 660 nm

定量極限：

0.02

偵測極限：

0.0055

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 0.1648$

```
intercept a= 0.000140
```

截距濃度= 0.000850

 $r=0.9998$

低濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
RF	標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	#1	0	0.0000	-0.0008		重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
0.180	#2	0.02	0.0036	0.0210	5.0	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.168	#3	0.04	0.0067	0.0398	-0.5	重複% 7.9	85.0~115.0	85.0~115.0
0.172	#4	0.06	0.0103	0.0617	2.8	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.161	#5	0.08	0.0129	0.0774	-3.3	重複% 9.0	85.0~115.0	85.0~115.0
0.168	#6	0.1	0.0168	0.1011	1.1			
0.166	#7	0.2	0.0331	0.2000	0.0			
	#8					公 告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
檢量線	確認 (ICV)	0.06	0.0101	0.0604	0.7	重複% 0~15	85~115	85~115
	查核1 (CCV)	0.06	0.0095	0.0568	-5.3			
	查核2 (CCV)	0.06	0.0095	0.0568	-5.3			
	查核3 (CCV)							
RF平均值 0.169	方法空白1	0	0.0001	-0.0002		空白平均值	-0.0002	
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
RF範圍0.118 ~ 0.220	查核分析1	0.06	0.0093	0.0556		92.7		
	查核分析2					—	—	—

[illegible]

重複分析					AxDF		
樣品編號	吸光度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	濃度 A	樣品濃度	平均值 差異百分比
ET115WG0445-001MS	0.0131			1.0	0.0786	0.0786	0.0796 2.4
ET115WG0445-001MSD	0.0134			1.0	0.0805	0.0805	

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

註3: "＃"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.10

附錄 - 510

NH₃-N氨氮(FIA)【B·C】(NIEA W437)【LIMS】0410(DD)-塔L-低P(4)

分析方法：NIEA W439

FIA 分析報告表

分析項目：TN(總氮) 儀器名稱：FIA-D

分析日期：115.04.13

使用波長：540 nm 偵測極限：0.024

分析人員：DW

審核人：

線性公式： $X=(Y-a)/b$ slope b= 0.2266 intercept a= 0.069501 截距濃度= 0.306712 r=0.9998

標準樣品#		X 濃度	Y 高度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%	定量極限： 0.5		
#1		0	0.0621	-0.0327				
#2		0.5	0.1820	0.4965	-0.7			
#3		1	0.3014	1.0234	2.3	水質水量 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
#4		2	0.5269	2.0185	0.9	重複% 10.0 85.0~115.0 85.0~115.0		
#5		4	0.9863	4.0459	1.1			
#6		8	1.8499	7.8570	-1.8			
#7		10	2.3552	10.0869	0.9			
#8								
#9						公告 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
檢量線	確認 (ICV)	2	0.5427	2.0883	4.4	重複% 0~10 85~115 85~115		
	查核1 (CCV)	2	0.5251	2.0106	0.5	NO ₃ ⁻ N : 2.1393		
	查核2 (CCV)	2	0.5218	1.9960	-0.2	NO ₂ ⁻ N : 2.1900		
	查核3 (CCV)					鎘還原效率確認： 97.7 % (需>90%)		
UV消化效率確認(尿素)		20	2.1224	分析日期	回收率%	92.2	消化效率回收率範圍(%) >85.0	
UV消化效率確認(NO ₃ ⁻ N)		20	2.3012	115.04.13				
方法空白1		0	0.0633	-0.0274		空白平均值		-0.0283
方法空白2		0	0.0629	-0.0291		查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
查核分析1		2	0.5317	2.0397		102.0	2.0514	1.1
查核分析2		2	0.5370	2.0631		103.2	—	—

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期: 115.02.01

分析方法: NIEA W468

FIA 分析報告表

分析項目: CN⁻

儀器名稱: FIA-E

分析人員: AT

分析日期: 115.04.13

使用波長: 600 nm

定量極限: 0.01

偵測極限: 0.0019

審核人: 3/15

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope b= 193142.5000 intercept a= 151.125000 截距濃度= 0.000782 r=0.9999

標準樣品#	X 濃度	Y 吸光度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%	公告 重複% 0~10	QC樣品回收率 85~115	添加分析回收率 85~115
#1	0	6.0	-0.00075		飲用水	QC樣品回收率	添加分析回收率
#2	0.01	2304.1	0.01115	11.5	重複% 8.9	85.0~115.0	85.0~110.3
#3	0.02	3913.2	0.01948	-2.6	地下水	QC樣品回收率	添加分析回收率
#4	0.05	9968.9	0.05083	1.7	重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
#5	0.1	19266.1	0.09897	-1.0	水質水量	QC樣品回收率	添加分析回收率
#6	0.15	29140.5	0.15009	0.1	重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
#7	0.2	38824.6	0.20023	0.1			
#8							
分解效率 確認	測試溶液A	0.20	38010.3	0.19602	1.0 (DF)	0.1960	98.0%【≥90%】
	測試溶液B	2.00	506.9	0.00184	≤0.02mg/L		
檢量線	確認 (ICV)	0.05	9231.4	0.04701	-6.0		
	查核1 (CCV)	0.05	9368.9	0.04773	-4.5		
	查核2 (CCV)	0.05	9653.5	0.04920	-1.6		
	查核3 (CCV)						
	方法空白1	0	91.5	-0.00031	空白平均值	ND	
	方法空白2	0	26.3	-0.00065	查核樣品回收率	平均值	差異百分比
	查核分析1	0.05	9465.0	0.04822	96.4	0.0488	2.5
	查核分析2	0.05	9703.3	0.04946	98.9	—	—

樣品分析	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	A×DF	樣品中待測物濃度	分析員確認值
ET115WG0507-001	44.6			1.0	-0.00055	-0.00055	ND<0.0019	
ET115WG0508-001	771.4			1.0	0.00321	0.00321	<0.010	
ET115WG0522-001	474.4			1.0	0.00167	0.00167	ND<0.0019	
ET115WG0523-001	14.0			1.0	-0.00071	-0.00071	ND<0.0019	
ET115WG0524-001	87.5			1.0	-0.00033	-0.00033	ND<0.0019	
ET115WG0526-001	754.1			1.0	0.00312	0.00312	<0.010	
ET115WG0495-001	78.7			1.0	-0.00037	-0.00037	ND<0.0019	
ET115WG0505-001	4.6			1.0	-0.00076	-0.00076	ND<0.0019	
ET115WG0506-001	10.3			1.0	-0.00073	-0.00073	ND<0.0019	
ET115WG0510-001	15.3			1.0	-0.00070	-0.00070	ND<0.0019	
ET115WG0516-001	806.6			1.0	0.00339	0.00339	<0.010	
ET115WG0518-001	577.8			1.0	0.00221	0.00221	<0.010	
ET115WG0521-001	527.9			1.0	0.00195	0.00195	<0.010	
ET115WG0445-001	8.7			1.0	-0.00074	-0.00074	ND<0.0019	
ET115WG0498-001	1443.5			1.0	0.00669	0.00669	<0.010	
ET115WG0499-001	653.4			1.0	0.00260	0.00260	<0.010	

重複分析	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	A×DF	樣品濃度	平均值	差異百分比
ET115WG0507-001MS	8716.5			1.0	0.04435	0.04435	0.04435	0.04419	0.7
ET115WG0507-001MSD	8655.0			1.0	0.04403	0.04403			
ET115WG0495-001MS	9068.9			1.0	0.04617	0.04617	0.04617	0.04628	0.5
ET115WG0495-001MSD	9108.5			1.0	0.04638	0.04638			

添加分析	吸光度	添加前濃度A*	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0507-001	8716.5	0.00000	49	2.5	1	50	1.0	0.04435	88.7
ET115WG0495-001	9068.9	0.00000	49	2.5	1	50	1.0	0.04617	92.3

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL

註2: 添加回收率=(ExF-AxB)÷(Cx×D)×100%

註3: "H" 表連續稀釋

數據繳交日期: 115.04.14

附錄 樣品編號 樣品數量 稀釋倍數 分析數值

CN-氰化物 (FIA) 【E】 (NIEA W468) 【LIMS】 0413(AT)-碇L-P(2)

[illegible]

註：1. 本法對103°C以下揮發之物質無法測定。

2. 萃取前須用浸過正己烷之小片濾紙徹底擦拭水樣容器、漏斗、鋸玻璃或以少量正己烷沖洗後一併置入圓筒濾紙中，以收集所有油脂。

3. 正己烷於揮發溶劑時回收。

4. 動植物性油脂(mg/L)=T.G.-M.G.。

數據繳交日期：115.04.14

□總油脂ND，故礦物類油脂及動植物性油脂亦ND

☒ 樣品編號

☒ 樣品數量 ☒ 分析數值

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期：115.03.27

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W524

分析項目：Phenol 儀器名稱：FIA-B 分析人員：AT 分析日期：115.04.10
 使用波長：505 nm 定量極限：0.02 偵測極限：0.0033 審核人：[Signature]
 線性公式： $X=(Y-a)/b$ slope b= 0.0688 intercept a= 0.000250 截距濃度= 0.003634 r=1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#1	0	0.00018	-0.001017		重複% 9.6	85.0~112.2	85.0~115.0
#2	0.02	0.00165	0.020349	1.7	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#3	0.05	0.00376	0.051017	2.0	重複% 8.8	85.0~115.0	85.0~113.1
#4	0.1	0.00723	0.101453	1.5			
#5	0.2	0.01384	0.197529	-1.2			
#6	0.5	0.03468	0.500436	0.1			
#7							
#8					公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
檢量線	確認 (ICV)	0.1	0.00681	0.095349	-4.7	重複% 0~15	85~115
	查核1 (CCV)	0.1	0.00691	0.096802	-3.2		
	查核2 (CCV)	0.1	0.00677	0.094767	-5.2		
	查核3 (CCV)	0.1	0.00666	0.093169	-6.8		
	方法空白1	0	-0.00009	-0.004942		空白平均值	-0.0055
	方法空白2	0	-0.00016	-0.005959		查核樣品回收率%	平均值
	查核分析1	0.1	0.00681	0.095349		95.3	0.0932
	查核分析2	0.1	0.00651	0.090988		91.0	—

樣品分析						AxDF	
樣品編號	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	樣品中待測物濃度	分析員確認值
ET115WG0521-001	-0.00021			1.0	-0.006686	-0.006686	ND<0.0033
ET115WG0541-001	-0.00034			1.0	-0.008576	-0.008576	ND<0.0033
ET115WG0541-002	-0.00025			1.0	-0.007267	-0.007267	ND<0.0033
ET115WG0541-003	-0.00024			1.0	-0.007122	-0.007122	ND<0.0033
ET115WG0445-001	-0.00023			1.0	-0.006977	-0.006977	ND<0.0033
ET115WG0498-001	-0.00013			1.0	-0.005523	-0.005523	ND<0.0033
ET115WG0499-001	-0.00004			1.0	-0.004215	-0.004215	ND<0.0033
ET115WG0500-001	0.00003			1.0	-0.003198	-0.003198	ND<0.0033
ET115WG0501-001	-0.00011			1.0	-0.005233	-0.005233	ND<0.0033
ET115WG0509-001	-0.00018			1.0	-0.006250	-0.006250	ND<0.0033
ET115WG0525-001	-0.00040			1.0	-0.009448	-0.009448	ND<0.0033
ET115WG0527-001	-0.00046			1.0	-0.010320	-0.010320	ND<0.0033
ET115WG0528-001	-0.00051			1.0	-0.011047	-0.011047	ND<0.0033

重複分析						AxDF		
樣品編號	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	樣品濃度	平均值	差異百分比
ET115WG0521-001MS	0.00655			1.0	0.091570	0.091570	0.091788	0.5
ET115WG0521-001MSD	0.00658			1.0	0.092006	0.092006		
ET115WG0525-001MS	0.00658			1.0	0.092006	0.092006	0.093024	2.2
ET115WG0525-001MSD	0.00672			1.0	0.094041	0.094041		

添加分析									
樣品編號	吸光度	添加前濃度A*	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0521-001	0.00655	0.000000	49.5	10	0.5	50	1.0	0.091570	91.6
ET115WG0525-001	0.00658	0.000000	49.5	10	0.5	50	1.0	0.092006	92.0

註1：重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100% 註4：除另行註明外，濃度及體積單位分別為 mg/L及mL。
 註2：添加回收率=(ExF-AxB)÷(CxD)×100% 附錄二-220 樣品編號 ☒ 樣品數量 ☐ 稀釋倍數 ☒ 分析數值

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期: 115.02.01
GC-9-035~039
GC 9/15

分析方法: NIEA W532

TOC 分析報告表

分析項目: TOC 偵測極限: 0.090 分析人員: GC 分析日期: 115.04.13
儀器型號: 1030 0-I-Analytical-E 定量極限: 0.50 試藥面積: 536 審核人: 李 花
線性公式: $Y=bX+a$ slope b= 3665.356 intercept a= 2339.266 截距濃度= 0.1276 $r=0.9999$
RF(ugC/cnt)= 0.0002728 Offset mass= 0.6381518 $r^2= 0.9999$

標準樣品#	濃度	X 質量(ug C)	Y 面積值	Xc 迴歸後質量	(Xc-X)/X*100 誤差%	RF	飲用水 重複% 5.6
#1	0	0	1065	-0.347620			QC樣品回收率% 89.0~109.1 添加分析回收率% 87.0~114.2
#2	0.5	2.50	12433	2.753571	10.1	24866.000	地下水 重複% 8.2
#3	1	5.00	21470	5.218864	4.4	21470.000	QC樣品回收率% 85.9~113.1 添加分析回收率% 75.0~117.9
#4	2	10.00	38505	9.866012	-1.3	19252.500	水質水量 重複% 7.4
#5	4	20.00	75910	20.070096	0.4	18977.500	QC樣品回收率% 88.6~113.1 添加分析回收率% 82.4~118.5
#6	7	35.00	130290	34.904960	-0.3	18612.857	
#7	10	50.00	185708	50.022991	0.0	18570.800	
#8							
#9							
總有機碳量(A)	-	20	74193	19.601699			添加無機碳 25 ug C
添加無機碳量(B)	-	20	76985	20.363356			無機碳去除效率檢查
檢量線確認(ICV)	2	10	37779	9.667959	-3.3		✓ 97.0 (%)
檢量線查核1(CCV)	2	10	42728	11.018047	10.2		<< 需大於90% >>
檢量線查核2(CCV)	2	10	39006	10.002685	0.0		★濃度A 公式: $m+V$
檢量線查核3(CCV)	2	10	39566	10.155453	1.6		公告 重複% 0~15
體積校正 (V)	5.0	試藥	536	0.146221		RF平均值	QC樣品回收% 80~120 添加分析回收% 75~125
		試藥+試劑水	-	0.638152	濃度	20291.610	查核樣品回收率% 平均值/差異%
試劑水	空白1	-	2476	0.529232	0.1058	FR範圍	103.0 2.0523
	空白2	-	2654	0.577790	0.1156	14204.127	102.2 0.8
查核分析1	2	10	40096	10.300037	2.0600	~ 26379.093	
查核分析2	2	10	39811	10.222289	2.0445		

樣品分析	樣品編號	面積值	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	質量* (m)	濃度A	A×DF	待測物濃度	分析員確認值
ET115WG0445-001	5593				1.0	1.379549	0.2759	0.2759	0.2759	<0.5
ET115WG0498-001	17133				1.0	4.527661	0.9055	0.9055	0.9055	0.9
ET115WG0509-001	30852				1.0	8.270205	1.6540	1.6540	1.6540	1.7
ET115WG0525-001	18029				1.0	4.772090	0.9544	0.9544	0.9544	1.0
ET115WG0527-001	15783				1.0	4.159381	0.8319	0.8319	0.8319	0.8
ET115WG0528-001	12047				1.0	3.140201	0.6280	0.6280	0.6280	0.6
ET115WG0503-001	10191				1.0	2.633884	0.5268	0.5268	0.5268	0.5
ET115WG0504-001	18316				1.0	4.850384	0.9701	0.9701	0.9701	1.0
ET115WG0511-001	23918				1.0	6.378609	1.2757	1.2757	1.2757	1.3
ET115WG0517-001	8417				1.0	2.149937	0.4300	0.4300	0.4300	<0.5

重複分析	樣品編號	面積值	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	質量* (m)	濃度A	A×DF	待測物濃度	平均值 \ 差異百分比
ET115WG0445-001MS	80270				1.0	21.751435	4.3503	4.3503	4.3503	4.3349
ET115WG0445-001MSD	79704				1.0	21.597030	4.3194	4.3194	4.3194	0.7
ET115WG0511-001	23918				1.0	6.378609	1.2757	1.2757	1.2757	1.2749
ET115WG0511-001D	23889				1.0	6.370698	1.2741	1.2741	1.2741	0.1

添加分析	樣品編號	面積值	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0445-001	80270		0.2759	49	200	1	50	1.0	4.3503	102.0
ET115WG0511-001	99349		1.2757	49	200	1	50	1.0	5.3912	103.5

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2: "*"代表扣除試劑之質量, "#"表連續稀釋

註3: 添加回收率=(ExF-AxB)÷(Cx×D)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

✓樣品編號 ✓樣品數量 ✓稀釋倍數 ✓分析數值

數據繳交日期: 115.04.14 附錄二-223
GC-1030(總有機碳)(W532)【LIMS】0413(GC)-塔L-P(2)

樣品名稱	ET115WG0445-001	ET115WG0498-001	ET115WG0499-001	ET115WG0509-001	ET115WG0525-001	ET115WG0527-001	ET115WG0528-001			
分析日期	115.04.10	115.04.10	115.04.10	115.04.10	115.04.10	115.04.10	115.04.10			
取樣體積	100	100	100	100	100	100	100			
定量體積	10	10	10	10	10	10	10			
萃取稀釋倍數	1	1	1	1	1	1	1			
分析稀釋倍數	1	1	1	1	1	1	1			
醛類										
甲醛	<0.0286 (0.0112) ✓	<0.0286 (0.00522)	<0.0286 (0.00545)	<0.0286 (0.00544)	<0.0286 (0.00689) ✓	<0.0286 (0.00493)	<0.0286 (0.00802) ✓		0.0286	0.00371
前處理編號	DS-223-066(DS-0410)									
記錄本頁碼	EQ18-33-39									

濃度單位: mg/L **mg/Kg** (圈選一)

*CF: 從衍生物濃度換算為醛化合物濃度之校正因子, 甲醛為0.143, 乙醛為0.196。

分析人員

DS 4/4

查驗/審核人

2 4/5/26

分析濃度 (mg/L) =

*樣品濃度 (μg/mL) × 萃取最終定量體積 (mL) × $\frac{1\text{mg}}{1000\text{ }\mu\text{g}}$

萃取樣體積 (mL) × $\frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}}$ × CF × 稀釋倍數

水中醛類品管樣品分析報告

HPLC-A 分析儀器

检测方法:NIEA W782

[illegible]

濃度單位: mg/L

$$\text{樣品濃度 (mg/L)} = \frac{\text{分析濃度 (}\mu\text{g/mL)} \times \text{萃取最終定體積 (mL)} \times \frac{\text{I mg}}{1000 \mu\text{g}}}{\frac{\text{萃取液體積 (mL)} \times \frac{\text{IL}}{1000 \text{ mL}} \times \text{CF} \times \text{稀釋倍數}}$$

CF: 從衍生物濃度換算為醛化合物濃度之校正因子, 甲醛為 0.143, 乙醛為 0.196。

分析人員 173 4/14

查驗/審核人

4/5/26

公告: 查核回收% 添加回收% 差異百分比%
70.0~130.0 60.0~140.0 25.0

地下水揮發性有機物報告

最新確認日期：115.02.01

案件編號:ET115WG0445,540

分析儀器：GC-MSI

記錄本頁碼：EQ97-12-10

檢測方法:NIEA W785/NIEA M711

樣品編號	ET115WG0445-001	ET115WG0540-002(DF10)	ET115WG0540-002(DF100)	ET115WG0540-004(DF10)	ET115WG0540-004(DF100)				
分析日期	2026.04.18	2026.04.18	2026.04.18	2026.04.18	2026.04.18				
稀釋倍數	1	10	100	10	100				
檢測項目							管制值	MDL	QL
V02-Chloromethane	ND	ND	ND	ND	ND		0.30	0.00025	0.00100
V03-Vinyl Chloride	ND	ND	ND	0.244 ✓	0.224		0.020	0.00030	0.00100
V07-1,1-Dichloroethene	ND	ND	ND	ND	ND		0.070	0.00029	0.00100
V08-Methylene Chloride	ND	ND	ND	ND	ND		0.050	0.00045	0.00100
V09-trans-1,2-Dichloroethene	ND	ND	ND	<0.0100	ND		1.0	0.00028	0.00100
V10-1,1-Dichloroethane	ND	ND	ND	0.0330	<0.100		8.50	0.00028	0.00100
V11-cis-1,2-Dichloroethene	ND	0.0279 ✓	ND	2.17	2.09		0.70	0.00027	0.00100
V14-Chloroform	ND	ND	ND	ND	ND		1.0	0.00028	0.00100
V15-1,1,1-Trichloroethane	ND	ND	ND	ND	ND		2.0	0.00029	0.00100
V17-1,2-Dichloroethane	ND	ND	ND	ND	ND		0.050	0.00029	0.00100
V18-Benzene	ND	ND	ND	ND	ND		0.050	0.00027	0.00100
V19-Carbon tetrachloride	ND	ND	ND	ND	ND		0.050	0.00030	0.00100
V20-Trichloroethene	ND	0.0317	ND	0.503	0.424		0.050	0.00028	0.00100
V26-Toluene	ND	ND	ND	ND	ND		10	0.00026	0.00100
V27-1,1,2-Trichloroethane	ND	ND	ND	ND	ND		0.050	0.00028	0.00100
V30-Tetrachloroethene	ND	0.514	0.452 ✓	0.441	0.371 ✓		0.050	0.00028	0.00100
V32-Chlorobenzene	ND	ND	ND	ND	ND		1.0	0.00027	0.00100
V34-Ethylbenzene	ND	ND	ND	ND	ND		7.0	0.00026	0.00100
V35-m,p-Xylene	ND	ND	ND	ND	ND			0.00051	0.00200
V37-o-Xylene	ND	ND	ND	ND	ND			0.00022	0.00100
V51-1,4-Dichlorobenzene	ND	ND	ND	ND	ND		0.75	0.00026	0.00100
V53-1,2-Dichlorobenzene	ND	ND	ND	ND	ND		6.0	0.00026	0.00100
V57-Naphthalene	ND	ND	ND	ND	ND		0.40	0.00019	0.00100
MTBE	ND	ND	ND	ND	ND		1.0	0.00022	0.00100
Total Xylene	ND (0.00036)	ND	ND	ND	ND		100	0.00036	0.00200
		MDL*10	MDL*100	MDL*10	MDL*100				
是否須分析EB.FB.TB	否	否	否	否	否				
擬似標準品 BFB R%	86.4	85.8 ✓	82.8	84.6 ✓	81.8				品管範圍
擬似標準品 1,2-DCB-D4 R%	82.4 ✓	83.4	82.0 ✓	80.2	82.8 ✓				60~140
內標準品 Fluorobenzene %	96.9 ✓	97.8 ✓	92.1 ✓	91.4 ✓	91.8 ✓				品管範圍
									70~130

units: mg/L

註1：二甲苯為間、對、二甲苯及鄰、二甲苯之總和；若測值為ND時，則以個別化合物偵測極限值的二分之一計算其總和。

註2：以ND表示者，表該樣品測值小於方法偵測極限(MDL)；以<數字表示者，表該樣品測值大於方法偵測極限但小於定量極限(QL)。

註3：數據以粗斜體表示者，其值乃介於方法偵測極限與定量極限之間

分析人員：FL

查驗/審核人：✱✱✱✱✱✱

地下水揮發性有機物品管報告

中環科技

最新確認日期：115.02.01

案件編號:ET115WG0445,540,53
8,501~504,509

分析儀器: GC-MSI

記錄本頁碼: EQ97-12-10

檢測方法:NIEA W785/NIEA M711

品管分析類別			查核分析				空白分析		添加樣品編號		樣品添加及添加重複			
分析日期			4/18/2026				ET115WG0445-001		MS		MSD			
稀釋倍數			1											
檢測項目	分析結果	添加濃度	回收率	品管範圍%	分析結果	分析結果	添加濃度	添加分析	回收率	添加重複	品管範圍	相對差異%	品管範圍%	
V02-Chloromethane	0.00357	0.004	89.3	75.0~125.0	ND	ND	0.004	0.00386	96.5	0.00377	65.0~135.0	2.4	0~12.2	
V03-Vinyl Chloride	0.00346	0.004	86.5	75.0~125.0	ND	ND	0.004	0.00377	94.3	0.00379	65.0~135.0	0.5	0~15.2	
V07-1,1-Dichloroethene	0.00331	0.004	82.8	75.0~125.0	ND	ND	0.004	0.00339	84.8	0.00363	77.9~129.0	6.8	0~13.6	
V08-Methylene Chloride	0.00390	0.004	97.5	78.4~125.0	ND	ND	0.004	0.00398	99.5	0.00389	72.9~134.2	2.3	0~12.1	
V09-trans-1,2-Dichloroethene	0.00384	0.004	96.0	80.7~122.1	ND	ND	0.004	0.00401	100.3	0.00398	84.7~123.5	0.8	0~11.2	
V10-1,1-Dichloroethane	0.00379	0.004	94.8	79.4~125.0	ND	ND	0.004	0.00396	99.0	0.00392	72.9~133.4	1.0	0~10.1	
V11-cis-1,2-Dichloroethene	0.00374	0.004	93.5	76.4~115.8	ND	ND	0.004	0.00378	94.5	0.00382	69.9~121.0	1.1	0~10.8	
V14-Chloroform	0.00388	0.004	97.0	82.6~124.9	ND	ND	0.004	0.00407	101.8	0.00400	69.8~135.0	1.7	0~9.5	
V15-1,1,1-Trichloroethane	0.00381	0.004	95.3	75.3~120.6	ND	ND	0.004	0.00404	101.0	0.00408	75.3~129.5	1.0	0~13.1	
V17-1,2-Dichloroethane	0.00409	0.004	102.3	79.6~125.0	ND	ND	0.004	0.00435	108.8	0.00419	71.0~133.9	3.7	0~8.7	
V18-Benzene	0.00378	0.004	94.5	81.7~120.0	ND	ND	0.004	0.00399	99.8	0.00392	79.7~123.3	1.8	0~9.2	
V19-Carbon tetrachloride	0.00373	0.004	93.3	75.0~125.0	ND	ND	0.004	0.00410	102.5	0.00413	76.7~135.0	0.7	0~16.0	
V20-Trichloroethene	0.00362	0.004	90.5	76.7~113.1	ND	ND	0.004	0.00377	94.3	0.00387	73.7~118.3	2.6	0~10.0	
V26-Toluene	0.00377	0.004	94.3	77.5~119.2	ND	ND	0.004	0.00403	100.8	0.00392	74.5~123.8	2.8	0~10.1	
V27-1,1,2-Trichloroethane	0.00388	0.004	97.0	83.4~119.0	ND	ND	0.004	0.00412	103.0	0.00392	83.2~121.0	5.0	0~11.4	
V30-Tetrachloroethene	0.00363	0.004	90.8	75.0~125.0	ND	ND	0.004	0.00394	98.5	0.00396	70.9~130.9	0.5	0~13.2	
V32-Chlorobenzene	0.00391	0.004	97.8	76.9~121.3	ND	ND	0.004	0.00412	103.0	0.00393	81.6~116.8	4.7	0~10.1	
V34-Ethylbenzene	0.00385	0.004	96.3	75.5~116.0	ND	ND	0.004	0.00410	102.5	0.00396	74.9~119.9	3.5	0~11.3	
V35-m,p-Xylene	0.00783	0.008	97.9	79.7~119.9	ND	ND	0.008	0.00848	106.0	0.00812	82.2~122.5	4.3	0~11.8	
V37-o-Xylene	0.00397	0.004	99.3	75.0~117.9	ND	ND	0.004	0.00422	105.5	0.00408	73.2~119.2	3.4	0~9.0	
V51-1,4-Dichlorobenzene	0.00410	0.004	102.5	76.0~125.0	ND	ND	0.004	0.00440	110.0	0.00413	79.8~129.3	6.3	0~10.9	
V53-1,2-Dichlorobenzene	0.00414	0.004	103.5	78.7~125.0	ND	ND	0.004	0.00434	108.5	0.00416	83.1~129.1	4.2	0~13.5	
V57-Naphthalene	0.00414	0.004	103.5	75.0~125.0	ND	ND	0.004	0.00424	106.0	0.00402	65.0~129.4	5.3	0~12.8	
MTBE	0.00373	0.004	93.3	75.5~111.5	ND	ND	0.004	0.00366	91.5	0.00370	74.7~111.4	1.1	0~8.9	
					內標、擬似標準品回收率(%)		MB	QC	MS	MSD				
					Fluorobenzene(IS)		98.8	102.3	97.3	99.9				
					Bromofluorobenzene(SS)		84.8	99.8	100.6	98.0				
					1,2-Dichlorobenzene-d4(SS)		83.4	103.0	107.8	103.2				

MI115041803.D

MI115041804.D

MI115041807.D

MI115041808.D

單位: mg/L

公告: 查核回收% 添加回收% 相對差異%

75~125 65~135 25

分析人員: FL

查驗/審核人: 蔡文雄

水質半揮發性有機物分析報告

Units:mg/L

N.D. : Not Detected

$$* \text{樣品濃度 (mg/L)} = \frac{\text{分析濃度 (}\mu\text{g/mL)} \times \text{萃取最終定置體積 (mL)} \times \frac{1\text{mg}}{1000\text{ }\mu\text{g}}}{\frac{\text{萃取樣體積 (mL)} \times \frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}}}} \times \text{稀釋倍數}$$

分析人員

查驗/審核人

27/4/26

最新確認日期：115.02.01

查驗/審核人: 姚文/22/56

PT16-257-7 FL-0417ext.

註1:濃度單位: mg/L
 註2:樣品濃度(mg/L)=(面積總和A*濃縮液體積V1*稀釋倍數D)/(平均感應因子CF*試樣分析注入量V2*萃取水樣之體積V)
 註3:添加回收率%=[((添加分析濃度E-試樣濃縮液質量A))/(添加質量C)]*100
 註4:樣品所含之碳氫化合物非屬典型柴油。
 註5:檢測值為汽油後段之碳氫化合物。
 註6:樣品中除柴油外尚含碳數高於柴油之碳氫化合物。
 註7:檢測值為汽油後段及柴油中碳氫化合物之總和。

中環科技事業股份有限公司

案件編號： ET115WG0502~504,511,517 水中總石油碳氫化合物總表 最新確認日期：115.02.01

樣品編號 TPH	ET115WG0502-001	ET115WG0503-001	ET115WG0504-001	ET115WG0511-001	ET115WG0517-001	ET115WG0445-001					MDL	QL
TPH(C6~C9)	ND	ND	ND	ND	ND	ND					0.0056	0.025
TPH(C10~C50)	0.043	0.035	0.040	<0.030	<0.030	0.035					0.023	0.030
TPH(C6~C50)	0.049	0.041	0.046	<0.036	<0.036	0.041					0.0286	0.055

units:mg/L

1. 高、低碳數均有測值時：TPH 測值 (mg/L) = 高碳數測值+低碳數測值
2. 高碳數有測值、低碳數低於偵測極限時：TPH 測值 (mg/L) = 高碳數測值+低碳數MDL 值
3. 低碳數有測值、高碳數低於偵測極限時：TPH 測值 (mg/L) = 低碳數測值+高碳數MDL 值
4. 高、低碳數均無測值時（低於偵測極限時）：TPH 測值 (mg/L) = ND. 【小於（高碳數MDL 值+低碳數MDL 值）】
5. 高碳數有測值、低碳數有測值但低於定量極限時：TPH 測值 (mg/L) = 小於（高碳數測值+低碳數QL 值）
6. 低碳數有測值、高碳數有測值但低於定量極限時：TPH 測值 (mg/L) = 小於（低碳數測值+高碳數QL 值）
7. 高、低碳數均有測值、但均低於定量極限時：TPH 測值 (mg/L) = 小於（高碳數QL 值+低碳數QL 值）

彙整人： 

水中總石油碳氫化合物 TPH(C6~C9) 分析報告表

ET115WG0445, 498,
500, 501, 509, 525,
案件編號: 527, 528, 464

分析日期: 115.04.21

分析人員: FM

查驗/審核人: 林文雄/26

檢測方法: NIEA W901

儀器名稱: GC-M

偵測極限: 0.0056

記錄本編號: EQ96-10-07

定量極限: 0.025

	Y	X	CF	Yc	(Yc-Y)/Y*100	檢量線編號: GM1140109.M
標準樣品#	濃度(ug/L)	面積	校正因子	計算濃度(ug/L)	誤差%	
#1	25	207.72	8.3	25.9	3.5	STDEV= 0.31855
#2	50	411.84	8.2	51.3	2.6	
#3	100	742.73	7.4	92.5	-7.5	
#4	200	1627.60	8.1	202.6	1.3	AVG of CF= 8.03169
#5	500	4009.47	8.0	499.2	-0.2	RSD(%) of CF= 3.96622
#6	1000	7808.47	7.8	972.2	-2.8	
#7	1500	12425.10	8.3	1547.0	3.1	
檢量線確認(ICV)	200	1473.36	7.4	183.4	-8.3	地下水 QC樣品回收% 添加分析回收%
檢量線查核1(CCV)	200	1842.10 ✓	9.2	229.4	14.7	重覆%:13.4 75.0~120.8 65.0~126.1
檢量線查核2(CCV)	200	1521.47	7.6	189.4	-5.3	水質水量 QC樣品回收% 添加分析回收%
檢量線查核3(CCV)	200					重覆%:9.0 80.7~113.5 65.0~124.3

	濃度	面積	計算濃度	回收率			
方法空白1	0	34.57 ✓	0.00430	M/D			
方法空白2							
查核分析1	0.200	1633.67	0.203	101.7	相對差異百分比%		
查核分析2	0.200	1651.40 ✓	0.206	102.8	1.1		

樣品分析								
樣品編號	面積	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	濃度 A	AxDF 樣品濃度A*	分析員 確認之值	
ET115WG0445-001	31.08			1	0.0039	0.0039	ND	
ET115WG0498-001	22.19 ✓			1	0.0028	0.0028	ND	
ET115WG0500-001	27.58			1	0.0034	0.0034	ND	
ET115WG0501-001	19.25 ✓			1	0.0024	0.0024	ND	
ET115WG0509-001	23.49			1	0.0029	0.0029	ND	
ET115WG0525-001	31.38 ✓			1	0.0039	0.0039	ND	
ET115WG0527-001	35.26			1	0.0044	0.0044	ND	
ET115WG0528-001	24.64 ✓			1	0.0031	0.0031	ND	
ET115WG0464-001	26.94			1	0.0034	0.0034	ND	

重複分析								
樣品編號	面積	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	濃度 A	AxDF 樣品濃度	平均值	差異百分比 (%)
ET115WG0445-001MS	1679.78	50	50	1.0	0.2091	0.2091	0.2052	3.8 ✓
ET115WG0445-001MSD	1616.93	50	50	1.0	0.2013	0.2013		

添加分析								
樣品編號	面積	添加前濃度A*	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	添加後濃度 F*	回收率%
ET115WG0445-001MS	1679.78 ✓	0.0039	50	1000	0.010	50	0.2091	102.6

註1: " #" 表連續稀釋的總倍數。

註2: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為, mg/L及mL。

註3: 查核回收率%=(查核濃度/添加濃度)*100

註4: 樣品分析濃度(mg/L)=(面積值/AVG of CF)*(稀釋倍數/1000)

註5: 重覆分析差異%=(二次分析濃度差)/(二次分析平均值)x100%。

註6: 添加後濃度B=(添加後面積值/AVG of CF)


註7: 添加回收率=((ExF)-(A*xB))/(CxD)x100%

水中總石油碳氫化合物(C10~C50)分析報告表

最新確認日期: 115.02.01

案件編號: ET115WG0445, 0505, 0575-0581

分析日期: 115.04.18 分析人員: DI

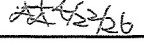查驗/審核人: 

檢測方法: NIEA W901

儀器名稱: GC-H 偵測極限: 0.023

儀器記錄本編號: EQ48-40-41

定量極限: 0.030 mg/L PT16-257-7 FL-0417ext.

C10	Y	X	CF	Yc	(Yc-Y)/Y*100	GH1150412IC-B ✓
標準樣品#	注入之質量(ng)	面積	校正因子	迴歸後重量 (ng)	誤差%	試樣分析注入量(uL): 1
#1	10	41.875	4.19	9.1	-9.1	STDEV= 0.27880
#2	20	93.475	4.67	20.3	1.5	AVG of CF= 4.60427
#3	50	234.543	4.69	50.9	1.9	RSD of CF= 6.05517%
#4	100	494.781	4.95	107.5	7.5	地下水 QC樣品回收% 添加分析回收%
#5	200	904.281	4.52	196.4	-1.8	重覆%25.0 62.0~125.0 55.0~114.1
ICV	20	86.968	4.35	18.9	-5.6	水質水量 QC樣品回收% 添加分析回收%
CCV1	20	95.491 ✓	4.77	20.7	3.7	重覆%21.0 60.0~122.9 55.0~122.3
CCV2	20	93.184	4.66	20.2	1.2	
CCV3	20					

C16	Y	X	CF	Yc	(Yc-Y)/Y*100	
標準樣品#	注入之質量(ng)	面積	校正因子	迴歸後重量 (ng)	誤差%	
#1	10	43.152	4.32	9.1	-8.9	STDEV= 0.2876
#2	20	96.574	4.83	20.4	2.0	AVG of CF= 4.735
#3	50	242.209	4.84	51.2	2.3	RSD of CF= 6.08%
#4	100	507.800	5.08	107.3	7.3	
#5	200	921.413	4.61	194.6	-2.7	
ICV	20	89.513	4.48	18.9	-5.5	
CCV1	20	97.990	4.90	20.7	3.5	
CCV2	20	96.598 ✓	4.83	20.4	2.0	
CCV3	20					

C34	Y	X	CF	Yc	(Yc-Y)/Y*100	
標準樣品#	注入之質量(ng)	面積	校正因子	迴歸後重量 (ng)	誤差%	
#1	10	39.383	3.94	8.6	-13.8	STDEV= 0.3925
#2	20	93.135	4.66	20.4	2.0	AVG of CF= 4.567
#3	50	237.273	4.75	52.0	3.9	RSD of CF= 8.59%
#4	100	498.821	4.99	109.2	9.2	
#5	200	901.369	4.51	197.4	-1.3	
ICV	20	90.517	4.53	19.8	-0.9	AVG of CF= 4.635
CCV1	20	94.568 ✓	4.73	20.7	3.5	
CCV2	20	95.937	4.80	21.0	5.0	
CCV3	20					

壺檢分析	查核添加濃度 (mg/L)	面積	萃取液質量 (ng)	空白分析濃度(mg/L)		
方法空白1	0	57.954 ✓	12.50	0.013 ND		
				查核分析濃度(mg/L)	查核樣品回收率(%)	重複差異百分比(%)
查核分析1	0.200	800.456	172.7	0.173	86.3	1.4
查核分析2	0.200	789.245 ✓	170.3	0.170	85.1	

樣品分析								
樣品編號	取樣體積 V (mL)	試樣濃縮液之體積 V1 (mL)	樣品萃取液稀釋倍數D	面積總和 A	試樣分析質量 (ng)	樣品濃度 (mg/L)	確認值(mg/L)	備註
ET115WG0445-001	1000	1.0	1	163.154	35.20	0.035	0.035 ✓	
ET115WG0505-001	1000	1.0	1	248.719 ✓	53.66	0.054	0.054	
ET115WG0575-001	1000	1.0	1	1973.253	425.70	0.426	0.426 ✓	
ET115WG0576-001	1000	1.0	1	985.342 ✓	212.57	0.213	0.213	
ET115WG0577-001	1000	1.0	1	727.446	156.93	0.157	0.157 ✓	
ET115WG0578-001	1000	1.0	1	1901.844 ✓	410.29	0.410	0.410	
ET115WG0579-001	1000	1.0	1	687.311	148.28	0.148	0.148 ✓	
ET115WG0580-001	1000	1.0	1	1159.438 ✓	250.13	0.250	0.250	
ET115WG0581-001	1000	1.0	1	596.486	128.68	0.129	0.129 ✓	

重複分析							
樣品編號	取樣體積 (mL)	萃取液體積 (mL)	稀釋倍數 DF	面積總和	萃取液質量 (ng)	添加分析濃度C (mg/L)	相對差異百分比(%)
ET115WG0445-001MS	1000	1.0	1	835.132	180.17	0.180	11.6 ✓
ET115WG0445-001MSD	1000	1.0	1	937.764	202.31	0.202	


添加分析								
樣品編號	取樣體積B(mL)	試樣分析質量A(ng)	添加體積D (uL)	添加質量C (ng)	最終體積E(mL)	面積	添加分析質量F (ng)	添加回收率%
ET115WG0445-001MS	1000	35.20	1000	200	1	835.132 ✓	180.17	72.5

註1:濃度單位: mg/L

註2:樣品濃度(mg/L)=(面積總和A*濃縮液體積V1*稀釋倍數D)/(平均感應因子CF*試樣分析注入量V2*萃取水樣之體積V)

註3:添加回收率%=[(添加分析質量F-試樣分析質量A)/(添加質量C)]*100

採樣日期：115.04.09

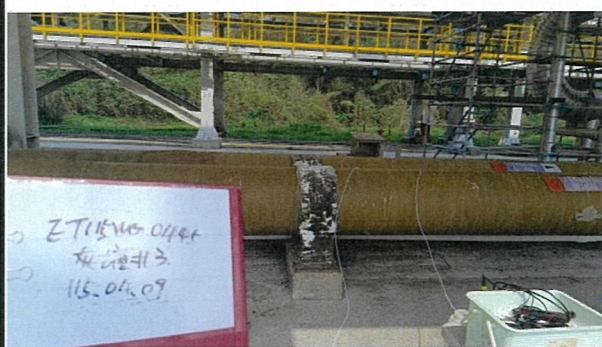

採樣前

採樣中



採樣後

採樣前(東)



採樣前(西)

採樣前(南)



採樣前(北)

標示牌

	<p>以下空白</p>
<p>水流儀</p>	

地下水樣品檢驗報告

樣品名稱：MW-1

樣品特性：無色/無味/無雜質

委 託 單 位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

採樣地點：MW-1

採樣單位：淇荃環保科技有限公司

採樣方法：NIEA W103.56B

檢 測 目 的：定檢申報

專案編號：KE115G40001

收 樣 日 期 : *

報告編號：KE115G4000104N(註3)

採樣日期：民國115年04月01日 10時15分~11時55分

報 告 日 期：民國115年04月24日

聯絡人：張意卿

[illegible]

聲明書

(一)茲保證本報告內容，自本實驗室收樣至報告出具之過程，以本公司人員最佳之專業知識，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。

備註: 1.檢測值低於方法定量極限以<定量極限表示。

2.本報告不得部份複製使用(但全份檢測報告複製除外)及作為宣傳廣告之用。

3.樣品並未進入檢驗室，測項皆為現場測項，故相關辨識之報告編號以專案編號取代。

4.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

公司名稱：淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：

杯采茗

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號



淇荃環保科技有限公司

CHI CHUAN Environmental Technology Co., Ltd

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第142號

地下水樣品檢驗報告

樣品編號(名稱)：KG4000104(MW-1)

行程代碼：KEUW26040001

樣品特性：無色/無味/無雜質

專案編號：KE115G40001

委託單位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

收樣日期：民國115年04月07日 08時30分

採樣地點：MW-1

報告編號：KG1154000104

採樣單位：淇荃環保科技有限公司
(環境部國環檢證字第142號)

採樣日期：民國115年04月01日 10時15分~11時55分

採樣方法：NIEA W103.56B

報告日期：民國115年04月24日

檢測目的：定檢申報

聯絡人：張意卿

檢測項目	單位	檢測值	檢測方法	備註	第2類地下水 監測標準	第2類地下水 管制標準
苯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.025	0.05
甲苯	mg/L	ND<0.00029	NIEA W785.58B	MDL=0.00029	5	10
二甲苯 ^{註1}	mg/L	ND<0.00073	NIEA W785.58B	MDL=0.00073	50	100
乙苯	mg/L	ND<0.00026	NIEA W785.58B	MDL=0.00026	3.5	7
氯苯	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.5	1
1,4-二氯苯	mg/L	ND<0.00026	NIEA W785.58B	MDL=0.00026	0.375	0.75
苯	mg/L	ND<0.00017	NIEA W785.58B	MDL=0.00017	0.2	0.4
氯甲烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.15	0.3
二氯甲烷	mg/L	ND<0.00025	NIEA W785.58B	MDL=0.00025	0.025	0.05
氯仿	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.5	1
1,1-二氯乙烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	4.25	8.5
1,2-二氯乙烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.025	0.05
1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND<0.00037	NIEA W785.58B	MDL=0.00037	0.025	0.05
氯乙烯	mg/L	ND<0.00032	NIEA W785.58B	MDL=0.00032	0.01	0.02
1,1-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00032	NIEA W785.58B	MDL=0.00032	0.035	0.07
順-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.35	0.7
反-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00030	NIEA W785.58B	MDL=0.00030	0.5	1
三氯乙烯	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.025	0.05
四氯乙烯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.025	0.05
四氯化碳	mg/L	ND<0.00040	NIEA W785.58B	MDL=0.00040	0.025	0.05
甲基第三丁基醚	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.5	1
1,2-二氯苯	mg/L	ND<0.00029	NIEA W785.58B	MDL=0.00029	3	6
1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND<0.00037	NIEA W785.58B	MDL=0.00037	1	2
以下空白						

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。
絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

- 備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽屬於相關內部文件。
2.檢測值低於方法偵測極限以ND表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度值時，以<定量極限表示，並註明其實際檢測值。
3.本報告不得部份複製使用(但全份檢測報告複製除外)及作為宣傳廣告之用。
4.二甲苯測值係由間、對、鄰-二甲苯檢測值總和而得，若檢測值為ND時以MDL值加總；若檢測值小於檢量線最低濃度時，則以實際檢測值做加總。
5.檢測項目委由中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室執行分析，項目詳見檢驗報告附件。
委託單位案件編號：ET115WG0474。
6.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

公司名稱：淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：

林采慧

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號



淇荃環保科技有限公司

CHI CHUAN Environmental Technology Co., Ltd

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第142號

地下水樣品檢驗報告-附件

樣品編號(名稱)：KG4000104(MW-1)

行程代碼：KEUW26040001

樣品特性：無色/無味/無雜質

專案編號：KE115G40001

委託單位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

收樣日期：民國115年04月07日 08時30分

採樣地點：MW-1

報告編號：KG1154000104

採樣單位：淇荃環保科技有限公司
(環境部國環檢證字第142號)

採樣日期：民國115年04月01日 10時15分~11時55分

採樣方法：NIEA W103.56B

報告日期：民國115年04月24日

檢測目的：定檢申報

聯絡人：張意卿

序號	委外檢測項目	序號	委外檢測項目
1	總溶解固體物	25	2,4,5-三氯酚
2	總硬度	26	2,4,6-三氯酚
3	氯鹽	27	五氯酚
4	硫酸鹽	28	柴油總碳氮化合物
5	硫化物	29	氰化物
6	氨氮	30	甲醛
7	亞硝酸鹽氮	31	3,3'-二氯聯苯胺
8	硝酸鹽氮		以下空白
9	無機含氮量		
10	總含氮量		
11	氯鹽		
12	鎘		
13	鉻		
14	銅		
15	鎳		
16	鉛		
17	鋅		
18	汞		
19	砷		
20	鐵		
21	錳		
22	油脂		
23	總有機碳		
24	總酚		

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司


負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號

備註：1.檢測項目委由中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室執行分析，委託單位案件編號：ET115WG0474。

2.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

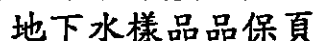

報告編號：KG1154000104

第3頁/共3頁,報告分離使用無效。



淇荃環保科技有限公司

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

專案編號: K211564001

使用/校正日期: 1150401

使用人員: 張麗卿

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☐ WTW pH 3210 ☒ WTW pH 3310 ☐ HACH sensION	Sampling-W- <u>W8</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正		校正後確認	(pH= <u>7.0</u>) (pH= <u>7.0</u>)	斜率(mV/pH)
pH	☒ pH=7 ☒ pH=4 ☒ pH=10	實測值/溫度	<u>7.02/26.8</u>	-61~-56 mV/pH
溫度(°C)	<u>27.0</u> <u>27.2</u> <u>26.7</u>	理論值	<u>7.0</u>	<u>-56.1</u>
編號	<u>11311227~2</u> <u>11404301~2</u> <u>11404302~2</u>	編號	<u>11311227~2</u>	零點電位(mV)
分裝日期	<u>1150331</u> <u>1150331</u> <u>1150331</u>	分裝日期	<u>1150331</u>	-25mV~25mV <u>0.4</u>

※pH使用注意事項

1.確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 3210 ☒ WTW Cond 3310	Sampling-W- <u>W23</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W203
0.01M KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
編號:	<u>11311227~2</u>	(μ S/cm/25°C)	(°C)	(μ S/cm/25°C)
分裝日期:	<u>1150331</u>	<u>1413</u>	<u>27.3</u>	<u>1406</u>
第二來源0.01M KCl標準溶液確認		標準值	溫度	儀器讀值
編號:	<u>11411241~2</u>	(μ S/cm/25°C)	(°C)	(μ S/cm/25°C)
分裝日期:	<u>1150331</u>	<u>1413</u>	<u>26.8</u>	<u>1406</u>
		0.01M KCl:1399~1427		

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 3210 ☒ WTW pH 3310	Sampling-W- <u>W9</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	-
標準溶液校正(mV)		實測值(mV)	理論值(mV)	合格參考值±10 mV
<u>220</u>		<u>222.4</u>	<u>220</u>	

校正標準液編號: 11411241~2 / 分裝日期: 1150331

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 3210 ☒ WTW Oxi 3310	Sampling-W- <u>W58</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	溶氧百分比(%)	斜率(0.7~1.25)	※斜率值0.6~0.7, 需更換電極填充液或清洗電極。
	<u>8.12 / 27.0</u>	<u>101.7</u>	<u>0.88</u>	

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比(%)允收範圍100±3。

2.量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。

3.電極檢查:

☐ 是 ☒ 否-電極內是否有氣泡。

☐ 是 ☒ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☒ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無皺痕。

☐ 是 ☒ 否-電極是否破損。

4.量測儀器大氣壓力值比對:

☒ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar): 1015

標準件(mbar): 1014

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
濁度計	☒ WTW Turb 355IR	Sampling-W- <u>W5</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W219
校正標準液(NTU)		實測值(NTU)	理論值(NTU)	合格參考值±1.0 %
<u>1000</u>		<u>998.8</u>	<u>1000</u>	
校正標準液編號: <u>1150303-1~1</u>				

採樣器材清洗: ☒ 是 ☐ 否-相關採樣器材清洗。



淇荃環保科技有限公司

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號: 1011564001

採樣日期: 115 年 04 月 01 日

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

採樣地點: 雲林縣

採樣人員: 林統慶

井號: MW-1

實驗室編號: 106400104

井篩深度: 3m-9m

井位座標: E(X): 168904 N(Y): 263514 (☒TWD ☐67 ☐97 ☒

資料來源: ☒監測井告示牌 ☐業主提供 ☐無

天候狀況: ☒晴天 ☒陰天 ☐雨天

環境描述: 監測井鎖扣是否完整: ☒是 ☐否 (現場情況描述: ☐井內積水 ☐無鎖頭 ☐其它)

洗井前水位量測: 1.10: 11, 2.316m 2.10: 12, 2.317m 3.10: 13, 2.316m (水位變化±3cm)

洗井紀錄資料

洗井開始時間: 10 時 15 分; 洗井結束時間: 10 時 35 分

井管內徑: 2 (inch)	水位面至井口深度: 2.305 (m)	井底至井口深度: 12.268 (m)
井水深度: 9.96 (m)	井水體積: 19.926 (L)	泵進水口深度: 6.00 (m)
井篩長度: 6 (m)	水流元容積: 0.4 (L)	現場儀器量測頻率: 4 (min-次)

(1)洗井方法: A. ☒微洗井-定量抽水 B. ☐井柱水體積置換法-定量抽水

C. ☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8), 將井水抽乾

(2)洗井設備: ☒氣囊式抽水器 ☐貝勒管 ☐其他:

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度°C) ±0.1/±0.2°C	導電度 (μS/cm) ±3% 註1	溶氧 (mg/L) ±10%或 ±0.3	氧化還原電位 (mV) ±10 mV	濁度 (NTU) (註1)	洗井水觀察 (水色、氣味、雜質)
(洗井前) 10:15	0.1	2.317	0.4	7.38/25.2	2.20	2.48	196.5	4.62	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:19	0.1	2.316	0.4	7.44/25.2	2.17	2.17	183.1	4.68	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:23	0.1	2.316	0.4	7.44/25.1	2.14	1.83	173.6	4.30	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:27	0.1	2.317	0.4	7.45/25.1	2.13	1.72	171.3	4.21	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:31	0.1	2.317	0.4	7.45/25.0	2.12	1.61	169.9	3.99	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:35	0.1	2.316	0.4	7.45/25.0	2.11	1.54	168.5	4.04	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井)									☐ 無色 ☐ 色 ☐ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☐ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(採樣) 10:37	0.1	2.316	0.4	7.48/25.0 7.48/25.0°C	2.11 2.11	1.51	168.4	3.82	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁

汲出水總體積: 2.8 (L) 洗井結束時水位面至井口深度: 2.316 (m); 水位洩降 0.01 (m)

採樣資料【開始時間: 10 時 37 分, 結束時間: 10 時 48 分】

採樣器材: ☒同洗井設備 ☐貝勒管 ☐其他 採樣器放置深度: * (m)

附註: ☐採樣器放置深度由委託單位指定 (☐井篩中段 ☐水位下 米 ☐井底上 米 ☐其它:)

☐非標準井 (☐2 吋簡易井; ☐其它形式:

☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙 ☒其它 總懸浮固體: 0.11 mg/L

井水體積(L): 2 吋井: 2.0*井水深度 4 吋井: 8.1*井水深度 井水體積 (L) = 0.51 × 直徑(吋) × 直徑(吋) × 井水深度(公尺)

註1: 濁度(NTU) > 20 為±10%, 20~5 為±2, 3 次低於 5 為穩定



淇荃環保科技有限公司

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號: 10211594w/

採樣日期: 115 年 04 月 01 日

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

採樣地點: 雲林縣

採樣人員: 林統厚

井號: MW-1

實驗室編號: 1094w/04 井篩深度: 3m-9m

井位座標: E(X): 168904 N(Y): 2635141 (☒ TWD ☐ 67 ☐ 97 ☐)

資料來源: ☒ 監測井告示牌 ☐ 業主提供 ☐ 無

天候狀況: ☒ 晴天 ☒ 陰天 ☐ 雨天

環境描述: 監測井鎖扣是否完整: ☒ 是 ☐ 否 (現場情況描述: ☐ 井內積水 ☐ 無鎖頭 ☐ 其它)

洗井前水位量測: 1. 10:50, 2-32m 2. 10:51, 2-32m 3. 10:52, 2-32m (水位變化±3cm)

洗井紀錄資料

洗井開始時間: 10 時 54 分; 洗井結束時間: 10 時 59 分

井管內徑: <u>2</u> (inch)	水位面至井口深度: <u>2-305</u> (m)	井底至井口深度: <u>12-268</u> (m)
井水深度: <u>9-963</u> (m)	井水體積: <u>19-926</u> (L)	泵進水口深度: <u>6-000</u> (m)
井篩長度: <u>6</u> (m)	水流元容積: <u>0.4</u> (L)	現場儀器量測頻率: <u>1</u> (min-次)

(1) 洗井方法: A. ☒ 微洗井-定量抽水 B. ☐ 井柱水體積置換法-定量抽水

C. ☐ 本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8), 將井水抽乾

(2) 洗井設備: ☒ 氣囊式抽水器 ☐ 貝勒管 ☐ 其他:

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度°C) ±0.1/±0.2°C	導電度 (μS/cm) ±3% <u>ms/cm</u>	溶氧 (mg/L) ±10% 或 ±0.3	氧化還原電位(mV) ±10 mV	濁度 (NTU) (註 1)	洗井水觀察 (水色、氣味、雜質)
(洗井前) 10:54	0.5	2-321	0.5	7.44/26.3	2.08	0.59	159.4	3.11	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:55	0.5	2-320	0.5	7.44/26.3	2.09	0.63	158.5	3.19	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:56	0.5	2-321	0.5	7.44/26.3	2.09	0.59	157.9	2.27	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:57	0.5	2-320	0.5	7.44/26.3	2.09	0.59	156.4	3.20	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:58	0.5	2-321	0.5	7.44/26.3	2.09	0.55	155.8	2.89	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 10:59	0.5	2-320	0.5	7.44/26.3	2.09	0.56	154.9	2.73	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井)									☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(採樣) 11:01	0.5	2-321	15-95	7.44/26.2 7.44/26.2°C	2.09 2.09	0.55	154.3	2.11	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 臭味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁

汲出水總體積: 18-95 (L) 洗井結束時水位面至井口深度: 2-320 (m); 水位洩降 0.015 (m)

採樣資料【開始時間: 11 時 01 分, 結束時間: 11 時 55 分】

採樣器材: ☒ 同洗井設備 ☐ 貝勒管 ☐ 其他 採樣器放置深度: 4 (m)

附註: ☐ 採樣器放置深度由委託單位指定 (☐ 井篩中段 ☐ 水位下 米 ☐ 井底上 米 ☐ 其它:)

☐ 非標準井 (☐ 2 吋簡易井; ☐ 其它形式:)

☐ 井內含有不互溶有機液體 ☐ 井底有泥沙 ☒ 其它 系統銹蝕: 0.11 mg/L

井水體積(L): 2 吋井: 2.0*井水深度 4 吋井: 8.1*井水深度 井水體積 (L) = 0.51*直徑(吋)*直徑(吋)*井水深度(公尺)

註 1: 濁度(NTU) > 20 為±10%, 20~5 為±2, 3 次低於 5 為穩定

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
 檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 NIEA W785

檢驗員: 徐子揚
 驗算員: 李仁堂

* 檢量線製作日期: 115.03.25 分析日期: 115.04.07		STD		STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	RF	RSD(%)	初始檢量線確認		初始檢量線確認 D(%)
檢測項目	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	配製濃度	訊號強度	
氟苯(1S)	濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	10	-	
Fluorobenzene	訊號強度	1457817	1532700	1579189	1601614	1641796					訊號強度	1498659	
1,2-二氯苯-d4(5S)	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.32	10.9%	10		8.5%
1,2-Dichlorobenzene-d4	訊號強度	55049	251895	491110	974667	1876438					訊號強度	440625	
4-溴氟苯(5S)	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.26	12.6%	10		12.8%
4-Bromofluorobenzene	訊號強度	46413	183096	386556	802772	1626700					訊號強度	339902	
二氯二氟甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.35	7.1%	10		0.6%
Dichlorodifluoromethane	訊號強度	56123	282286	556103	1088158	2099237					訊號強度	525671	
氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.57	6.2%	10		-7.5%
Chloromethane	訊號強度	88431	448998	894718	1795570	3369181					訊號強度	912300	
氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.42	4.0%	10		-8.6%
Vinyl chloride	訊號強度	64317	328956	667699	1365295	2595353					訊號強度	688210	
溴甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.24	2.6%	10		-12.6%
Bromomethane	訊號強度	35154	181462	376915	758442	1479028					訊號強度	397773	
氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.25	6.0%	10		-3.6%
chloroethane	訊號強度	40319	194009	404956	814224	1535307					訊號強度	395750	
三氯一氟甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.46	5.2%	10		2.4%
trichlorofluoromethane	訊號強度	72851	351752	726527	1466732	2843789					訊號強度	675362	
1,1-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.30	5.7%	10		-3.8%
1,1-dichloroethane	訊號強度	48264	230157	480958	952583	1860466					訊號強度	471697	
二氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.39	5.5%	10		-12.8%
methylene chloride	訊號強度	56511	323952	640704	1247441	2395960					訊號強度	666190	
反-1,2-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.33	3.4%	10		-5.4%
trans-1,2-dichloroethane	訊號強度	50056	254387	524248	1066583	2051383					訊號強度	521991	
甲基第三丁基醚	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.78	3.7%	10		-4.2%
Methyl tert-butyl ether	訊號強度	119626	567342	1214823	2483270	5116392					訊號強度	1213181	
1,1-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.66	5.4%	10		-2.7%
1,1-dichloroethane	訊號強度	103795	512832	1047119	2073382	4033714					訊號強度	1017894	
2,2-二氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.37	3.7%	10		-6.1%
2,2-dichloropropane	訊號強度	57641	279435	587205	1189321	2358561					訊號強度	592080	
順-1,2-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.35	3.9%	10		-4.5%
cis-1,2-dichloroethane	訊號強度	54080	263089	544120	1107579	2201794					訊號強度	544873	
溴氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.17	5.1%	10		-5.1%
bromochloromethane	訊號強度	26224	126177	263898	533882	1024252					訊號強度	262749	
氯仿	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.62	5.2%	10		-3.8%
chloroform	訊號強度	95951	483440	981679	1960516	3747534					訊號強度	962656	
1,1,1-三氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.45	4.7%	10		-5.1%
1,1,1-trichloroethane	訊號強度	70492	337771	705940	1433819	2798312					訊號強度	707205	
四氯化碳	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.36	4.4%	10		-4.4%
carbon tetrachloride	訊號強度	56442	272860	563249	1148539	2265728					訊號強度	564356	
1,1-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.39	2.7%	10		-3.7%
1,1-dichloropropene	訊號強度	55978	284618	607525	1280486	2566954					訊號強度	600220	
苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			1.18	2.3%	10		-6.2%
benzene	訊號強度	173478	892836	1884852	3835645	7443759					訊號強度	1871543	
1,2-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.44	4.8%	10		-2.9%
1,2-dichloroethane	訊號強度	69388	345529	700677	1394681	2748370					訊號強度	685820	
三氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.29	3.9%	10		-2.3%
trichloroethylene	訊號強度	44785	225691	454250	927369	1810671					訊號強度	446071	
1,2-二氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.29	3.1%	10		-1.5%
1,2-dichloropropane	訊號強度	44670	219631	452249	923562	1864613					訊號強度	441540	
二溴甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.19	5.1%	10		-3.8%
dibromomethane	訊號強度	29689	143872	298313	589195	1165742					訊號強度	292946	
一溴二氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.37	2.7%	10		-4.1%
bromodichloromethane	訊號強度	55765	274965	572642	1161732	2356244					訊號強度	569722	
順-1,3-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.31	7.1%	10		-9.3%
cis-1,3-dichloropropene	訊號強度	41321	226486	483747	1022849	2235712					訊號強度	506116	
甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.51	8.0%	10		-6.7%
toluene	訊號強度	66766	361264	808116	1758999	3550203					訊號強度	809699	
反-1,3-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.23	7.6%	10		-2.7%
trans-1,3-dichloropropene	訊號強度	32721	161792	369584	789188	1683805					訊號強度	360906	
1,1,2-三氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.16	1.0%	10		-3.8%
1,1,2-trichloroethane	訊號強度	23128	123328	253373	509047	1030218					訊號強度	247634	
四氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00			0.21	2.5%	10		-2.5%
tetrachloroethylene	訊號強度	31697	159100	326980	676967	1338969					訊號強度	321653	

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
 檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 NIEA W785

檢驗員: 徐于嵐
 驗算員: 李仁皇

* 檢驗線製作日期: 115.03.25 分析日期: 115.04.07		STD	STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	RF	RF RSD(%)	初始檢量線確認		初始檢量線確認 D(%)
檢測項目	濃度值(ug/L)	訊號強度								配製濃度	訊號強度	
1,3-二氯丙烷	1.00	41968	211311	451347	939327	1906963	0.29	2.3%	配製濃度	10	462652	-7.7%
1,3-dichloropropane	訊號強度									配製濃度	10	
一氯二溴甲烷	1.00	27931	142089	295676	611551	1262528	0.19	1.6%	配製濃度	10	291272	-2.6%
1,2-二溴乙烷	1.00	21454	109759	235288	499319	1034594	0.15	4.0%	配製濃度	10	233716	-3.6%
1,2-dibromoethane	訊號強度									配製濃度	10	
氯苯	1.00	72674	379989	813147	1679665	3410445	0.51	2.5%	配製濃度	10	806111	-5.3%
chlorobenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1,1,1,2-四氯乙烷	1.00	33470	171205	360081	751962	1545238	0.23	2.2%	配製濃度	10	355476	-3.0%
1,1,1,2-tetrachloroethane	訊號強度									配製濃度	10	
乙苯	1.00	111350	624757	1420197	3097527	6366115	0.88	10.4%	配製濃度	10	1415216	-7.0%
ethylbenzene	訊號強度									配製濃度	20	
間,對-二甲苯	2.00	77440	493431	1105573	2391231	4772842	0.33	12.9%	配製濃度	20	1092595	-8.9%
m,p-xylene	訊號強度									配製濃度	10	
鄰-二甲苯	1.00	44242	266927	604386	1308743	2671129	0.37	12.0%	配製濃度	10	593274	-7.0%
o-xylene	訊號強度									配製濃度	10	
苯乙烯	1.00	55772	363447	843774	1828753	3670656	0.50	15.4%	配製濃度	10	824224	-9.1%
styrene	訊號強度									配製濃度	10	
溴仿	1.00	14540	75075	163155	337768	701151	0.10	3.6%	配製濃度	10	142038	7.7%
bromofom	訊號強度									配製濃度	10	
異丙基苯	1.00	113883	735147	1667588	3691933	7517610	1.02	15.1%	配製濃度	10	1683468	-10.3%
isopropylbenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1,1,2,2-四氯乙烷	1.00	41340	202745	412953	828518	1682276	0.26	4.1%	配製濃度	10	404296	-1.8%
1,1,2,2-tetrachloroethane	訊號強度									配製濃度	10	
溴苯	1.00	26842	148795	316004	662730	1328864	0.20	4.4%	配製濃度	10	314519	-6.2%
bromobenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1,2,3-三氯丙烷	1.00	33249	167230	348762	700650	1404824	0.22	2.4%	配製濃度	10	348123	-5.6%
1,2,3-trichloropropane	訊號強度									配製濃度	10	
正丙基苯	1.00	134396	850244	1907546	4163349	8355651	1.16	13.2%	配製濃度	10	1895202	-8.8%
n-propylbenzene	訊號強度									配製濃度	10	
2-氯甲苯	1.00	90644	560019	1218342	2547302	5078316	0.74	9.4%	配製濃度	10	1198326	-8.3%
2-chlorotoluene	訊號強度									配製濃度	10	
1,3,5-三甲苯	1.00	96272	663690	1518965	3300328	6602399	0.90	16.6%	配製濃度	10	1539166	-13.5%
1,3,5-trimethylbenzene	訊號強度									配製濃度	10	
4-氯甲苯	1.00	79972	510101	1108117	2280535	4480984	0.66	10.0%	配製濃度	10	1048048	-5.6%
4-chlorotoluene	訊號強度									配製濃度	10	
1,1-二甲基乙基苯	1.00	97761	507656	1164182	2662003	5502582	0.75	11.3%	配製濃度	10	1175086	-4.8%
tert-butylbenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1,2,4-三甲苯	1.00	98173	677921	1526353	3249980	6443974	0.90	15.2%	配製濃度	10	1497818	-10.5%
1,2,4-trimethylbenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1-甲基丙基苯	1.00	119054	847450	1871192	4160637	8298108	1.13	17.0%	配製濃度	10	1883153	-10.8%
sec-butylbenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1,3-二氯苯	1.00	60009	323191	664797	1365361	2673609	0.42	1.9%	配製濃度	10	638196	-2.0%
1,3-dichlorobenzene	訊號強度									配製濃度	10	
對-異丙基甲苯	1.00	96001	688723	1540472	3363917	6684375	0.92	17.0%	配製濃度	10	1579951	-14.6%
p-isopropyltoluene	訊號強度									配製濃度	10	
1,4-二氯苯	1.00	60703	323580	659376	1341380	2635244	0.42	2.0%	配製濃度	10	637624	-2.5%
1,4-dichlorobenzene	訊號強度									配製濃度	10	
正丁基苯	1.00	110941	711676	1569816	3397714	6743349	0.95	12.4%	配製濃度	10	1547324	-8.2%
n-butylbenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1,2-二氯苯	1.00	68092	358620	733606	1504429	2937744	0.46	2.0%	配製濃度	10	733324	-5.6%
1,2-dichlorobenzene	訊號強度									配製濃度	10	
1,2-二溴-3-氯丙烷	1.00	8164	35935	71231	146374	303808	0.05	9.4%	配製濃度	10	69988	2.7%
1,2-dibromo-3-chloropropane	訊號強度									配製濃度	10	
1,2,4-三氯苯	1.00	48978	245144	503485	1072166	2107350	0.33	2.6%	配製濃度	10	507159	-3.8%
1,2,4-trichlorobenzene	訊號強度									配製濃度	10	
六氯丁二烯	1.00	22843	126589	260302	563690	1105225	0.17	4.2%	配製濃度	10	256781	-3.1%
Hexachlorobutadiene	訊號強度									配製濃度	10	
萘	1.00	105052	498984	1097245	2420673	4923988	0.71	6.0%	配製濃度	10	1099008	-2.6%
Naphthalene	訊號強度									配製濃度	10	
1,2,3-三氯苯	1.00	52823	263482	524284	1095460	2125881	0.34	4.3%	配製濃度	10	534618	-4.7%
1,2,3-trichlorobenzene	訊號強度									配製濃度	10	

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕提/氣相層析質譜儀 NIEA W785

檢驗員: 徐子蔚
驗員: 李仁皇

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8 分析日期: 115.04.07

樣品編號		檢量線檢核分析		檢量線檢核分析		檢量線檢核分析		檢量線檢核分析		檢量線檢核分析		檢量線檢核分析	
		1150407 .CCa	1150407 .CCb	1150407 .QC	1150407 .QC	1150407 .QC	1150407 .QC	1150407 .QC	1150407 .QC	1150407 .QC	1150407 .QC		
檢測項目		分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)
氯苯 (IS)	分析濃度值 (ug/L)	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—
	回收率 (%)	1540825	—	1470607	—	1649866	—	1582545	—	1591608	—	1421481	—
	RF / 回收率 (%)	11.03	—	11.73	—	10.81	—	11.47	—	11.48	—	10.44	—
1,2-二氯苯-d4 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	11.03	—	11.73	—	10.81	—	11.47	—	11.48	—	10.44	—
	回收率 (%)	546521	10.0	554631	10.0	573069	10.0	583301	10.0	587221	10.0	477271	—
	RF / 回收率 (%)	110.3	—	117.3	—	108.1	—	114.7	—	114.8	—	104.4472	—
4-溴氯苯 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	10.32	—	11.10	—	9.76	—	10.35	—	10.31	—	8.27	—
	回收率 (%)	413390	10.0	424467	10.0	418828	10.0	426185	10.0	426839	10.0	305673	—
	RF / 回收率 (%)	103.2	—	111.0	—	97.6	—	103.5	—	103.1	—	82.6827	—
氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	9.34	—	10.71	—	8.81	—	10.54	—	9.76	—	N.D.	—
	回收率 (%)	815273	6.60	891958	7.06	823643	10.0	945109	11.4	879915	10.19	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.53	—	0.61	—	88.1	—	92.5	—	97.6	—	0	—
氯乙烯	分析濃度值 (ug/L)	7.73	—	8.50	—	7.83	—	9.33	—	8.97	—	N.D.	—
	回收率 (%)	503788	22.69	528615	15.01	546636	10.0	624737	11.4	603965	13.55	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.33	—	0.36	—	78.3	—	81.9	—	89.7	—	0	—
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.26	—	11.30	—	10.17	—	12.02	—	11.44	—	N.D.	—
	回收率 (%)	479657	2.63	504068	13.00	508734	10.0	576885	11.4	552075	11.76	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.31	—	0.34	—	101.7	—	105.4	—	114.4	—	0	—
二氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	10.54	—	11.54	—	10.91	—	13.23	—	12.32	—	N.D.	—
	回收率 (%)	640009	5.40	668775	15.40	709299	10.0	824852	11.4	773005	12.18	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.42	—	0.45	—	109.1	—	116.0	—	123.2	—	0	—
反-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.32	—	10.86	—	10.12	—	12.21	—	11.32	—	N.D.	—
	回收率 (%)	525592	3.20	527801	8.59	551710	10.0	638681	11.4	595625	11.24	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.34	—	0.36	—	101.2	—	107.1	—	113.2	—	0	—
甲基第三丁基醚 (MTBE)	分析濃度值 (ug/L)	10.10	—	10.85	—	10.51	—	12.26	—	11.16	—	N.D.	—
	回收率 (%)	1209275	1.02	1239854	8.52	1347657	10.0	1507651	11.4	1380009	5.97	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.78	—	0.84	—	105.1	—	107.6	—	111.6	—	0	—
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.63	—	10.48	—	9.42	—	11.30	—	10.44	—	N.D.	—
	回收率 (%)	980702	3.73	1018573	4.76	1027010	10.0	1182534	11.4	1099051	10.37	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.64	—	0.69	—	94.2	—	99.1	—	104.4	—	0	—
順-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.72	—	10.44	—	9.88	—	11.83	—	11.14	—	N.D.	—
	回收率 (%)	521273	2.78	534009	4.35	567498	10.0	651622	11.4	616783	11.91	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.34	—	0.36	—	98.8	—	103.8	—	111.4	—	0	—
氯仿	分析濃度值 (ug/L)	9.96	—	10.78	—	9.79	—	11.93	—	11.05	—	N.D.	—
	回收率 (%)	949891	0.35	981178	7.84	999250	10.0	1168263	11.4	1088183	12.11	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.62	—	0.67	—	97.9	—	104.7	—	110.5	—	0	—
1,1,1-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.93	—	11.19	—	10.06	—	12.33	—	11.47	—	N.D.	—
	回收率 (%)	687265	0.66	739032	11.92	745615	10.0	875989	11.4	819806	13.06	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.45	—	0.50	—	100.6	—	108.1	—	114.7	—	0	—
四氯化碳	分析濃度值 (ug/L)	9.84	—	11.35	—	10.36	—	12.40	—	11.40	—	N.D.	—
	回收率 (%)	546698	1.63	601942	13.48	616496	10.0	707964	11.4	654447	9.56	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.35	—	0.41	—	103.6	—	108.8	—	114.0	—	0	—
苯	分析濃度值 (ug/L)	10.03	—	10.73	—	9.79	—	12.04	—	11.24	—	N.D.	—
	回收率 (%)	1816400	0.25	1854751	7.26	1898450	10.0	2240343	11.4	2103578	13.83	0	—
	RF / 回收率 (%)	1.18	—	1.26	—	97.9	—	105.6	—	112.4	—	0	—
1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.54	—	10.11	—	9.44	—	11.38	—	10.20	—	N.D.	—
	回收率 (%)	654218	4.56	661315	1.08	692738	10.0	801373	11.4	721981	7.73	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.42	—	0.45	—	94.4	—	99.8	—	102.0	—	0	—
三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.77	—	10.49	—	9.39	—	11.53	—	10.70	—	N.D.	—
	回收率 (%)	438153	2.25	448611	4.86	450578	10.0	530856	11.4	495243	13.03	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.28	—	0.31	—	93.9	—	101.1	—	107.0	—	0	—
甲苯	分析濃度值 (ug/L)	10.72	—	11.34	—	10.60	—	13.10	—	11.95	—	N.D.	—
	回收率 (%)	836449	7.25	844020	13.39	885066	10.0	1049586	11.4	962637	11.98	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.54	—	0.57	—	106.0	—	114.9	—	119.5	—	0	—
1,1,2-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.24	—	11.68	—	10.77	—	13.49	—	12.08	—	N.D.	—
	回收率 (%)	275547	12.36	273291	16.76	282720	10.0	339866	11.4	306039	11.51	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.18	—	0.19	—	107.7	—	118.4	—	120.8	—	0	—
四氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.28	—	11.34	—	10.68	—	13.02	—	12.09	—	N.D.	—
	回收率 (%)	363908	12.75	349260	13.38	369055	10.0	431712	11.4	403037	12.39	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.24	—	0.24	—	106.8	—	114.2	—	120.9	—	0	—
氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.31	—	11.82	—	11.03	—	13.66	—	12.43	—	N.D.	—
	回收率 (%)	889793	13.10	887648	18.21	929205	10.0	1104124	11.4	1010307	11.95	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.58	—	0.60	—	110.3	—	119.9	—	124.3	—	0	—
乙苯	分析濃度值 (ug/L)	10.30	—	10.92	—	10.28	—	13.01	—	11.92	—	N.D.	—
	回收率 (%)	1401212	2.99	1418235	9.22	1496971	10.0	1817267	11.4	1674833	14.79	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.91	—	0.96	—	102.8	—	114.1	—	119.2	—	0	—
間,對-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	22.32	—	23.57	—	22.26	—	27.70	—	25.76	—	N.D.	—
	回收率 (%)	1151345	11.58	1160856	17.87	1229934	20.0	1468060	22.8	1372775	14.56	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.37	—	0.39	—	111.3	—	121.5	—	128.8	—	0	—
鄰-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	10.69	—	11.29	—	10.51	—	13.39	—	12.33	—	N.D.	—
	回收率 (%)	609272	6.88	614515	12.95	641688	10.0	784069	11.4	726228	15.94	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.40	—	0.42	—	105.1	—	117.5	—	123.3	—	0	—
1,4-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.30	—	12.00	—	11.46	—	13.89	—	12.60	—	N.D.	—
	回收率 (%)	723213	13.03	732910	20.02	784937	10.0	912672	11.4	832421	9.46	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.47	—	0.50	—	114.6	—	121.8	—	126.0	—	0	—
1,2-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.37	—	11.90	—	11.53	—	13.98	—	12.61	—	N.D.	—
	回收率 (%)	811605	13.69	810882	19.01	881149	10.0	1025351	11.4	929806	8.96	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.53	—	0.55	—	115.3	—	122.7	—	126.1	—	0	—
萘	分析濃度值 (ug/L)	9.87	—	10.28	—	10.83	—	12.95	—	11.38	—	N.D.	—
	回收率 (%)	1086235	1.32	1080265	2.82	1276875	10.0	1463625	11.4	1294259	4.95	0	—
	RF / 回收率 (%)	0.70	—	0.73	—	108.3	—	113.6	—	113.8	—	0	—

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕提/氣相層析質譜儀 NIEA W785

檢核員: 徐于嵐
檢驗員: 李仁白

IS範圍上下限:

分析日期: 115.04.07

檢測項目	樣品編號	檢量線重複分析		檢量線重複分析		重複樣品分析		添加樣品分析		重複樣品分析		樣品重複分析	
		1150407 .CCc	分析濃度 (ug/L)	1150407 .CCd	分析濃度 (ug/L)	1150407 QC	配製濃度 (ug/L)	1150407 .SK	配製濃度 (ug/L)	1150407 .QCR	重複差異%	1150407 .SR	重複差異%
氯苯 (IS)	分析濃度值 (ug/L)	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	
1-fluorobenzene	訊號強度	1420578											
1,2-二氯苯-d4 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	11.47											
S-1,2-Dichlorobenzene-d4	訊號強度	523660	10.0										
	回收率%	114.7											
4-溴氯苯 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	10.70											
S-4-Bromofluorobenzene	訊號強度	395245	10.0										
	回收率%	107.0											
氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	10.41											
Chloromethane	訊號強度	838049	4.13										
	RF / 回收率%	0.59											
氯乙烯	分析濃度值 (ug/L)	10.01											
Vinyl chloride	訊號強度	601347	0.09										
	RF / 回收率%	0.42											
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.35											
1,1-dichloroethene	訊號強度	488979	13.48										
	RF / 回收率%	0.34											
二氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	11.25											
methylene chloride	訊號強度	630059	12.55										
	RF / 回收率%	0.44											
反-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.99											
trans-1,2-dichloroethene	訊號強度	515816	9.86										
	RF / 回收率%	0.36											
甲基第三丁基醚	分析濃度值 (ug/L)	10.30											
(MTBE)	訊號強度	1136718	3.00										
	RF / 回收率%	0.80											
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.51											
1,1-dichloroethane	訊號強度	987288	5.12										
	RF / 回收率%	0.69											
順-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.28											
cis-1,2-dichloroethene	訊號強度	508355	2.84										
	RF / 回收率%	0.36											
氯仿	分析濃度值 (ug/L)	10.60											
chloroform	訊號強度	931564	6.00										
	RF / 回收率%	0.66											
1,1,1-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.06											
1,1,1-trichloroethane	訊號強度	705726	10.64										
	RF / 回收率%	0.50											
四氯化碳	分析濃度值 (ug/L)	11.12											
carbon tetrachloride	訊號強度	569732	11.19										
	RF / 回收率%	0.40											
苯	分析濃度值 (ug/L)	10.50											
benzene	訊號強度	1753428	4.97										
	RF / 回收率%	1.23											
1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.86											
1,2-dichloroethane	訊號強度	622900	1.44										
	RF / 回收率%	0.44											
三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.35											
trichloroethylene	訊號強度	427892	3.54										
	RF / 回收率%	0.30											
甲苯	分析濃度值 (ug/L)	11.15											
toluene	訊號強度	801606	11.48										
	RF / 回收率%	0.56											
1,1,2-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.35											
1,1,2-trichloroethane	訊號強度	256600	13.49										
	RF / 回收率%	0.18											
四氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.68											
tetrachloroethylene	訊號強度	347421	16.76										
	RF / 回收率%	0.24											
氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.54											
chlorobenzene	訊號強度	836954	15.39										
	RF / 回收率%	0.59											
乙苯	分析濃度值 (ug/L)	10.60											
ethylbenzene	訊號強度	1329956	6.03										
	RF / 回收率%	0.94											
間,對-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	23.21											
m,p-xylene	訊號強度	1104118	16.06										
	RF / 回收率%	0.39											
鄰-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	11.20											
o-xylene	訊號強度	588676	12.01										
	RF / 回收率%	0.41											
1,4-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.75											
1,4-dichlorobenzene	訊號強度	693061	17.49										
	RF / 回收率%	0.49											
1,2-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.79											
1,2-dichlorobenzene	訊號強度	776211	17.93										
	RF / 回收率%	0.55											
萘	分析濃度值 (ug/L)	9.71											
Naphthalene	訊號強度	984945	2.95										
	RF / 回收率%	0.69											

4/13

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8													分析日期: 115.04.07
檢測項目	樣品編號	1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201					
取樣體積 (ml)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0					
稀釋倍數	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
甲苯 (S)	分析濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					
	訊號強度	1476482	1431896	1364965	1382492	1352622	1372229	1357813					
4-溴苯 (SS)	分析濃度值(ug/L)	8.03	8.37	8.27	8.51	8.35	8.53	8.42					
	訊號強度	308442	311580	293706	306045	293727	304535	297204					
4-Bromofluorobenzene	添加濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					
	回收率(%)	80.3	83.7	82.7	85.1	83.5	85.3	84.2					
1,2-二氯苯-d4(SS)	分析濃度值(ug/L)	9.35	10.45	10.18	10.88	10.58	10.90	10.87					
	訊號強度	443876	481205	446603	483673	460040	480602	474384					
1,2-Dichlorobenzene-d4	添加濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					
	回收率(%)	93.5	104.5	101.8	108.8	105.8	109.0	108.7					
二氯二氟甲烷 Dichlorodifluoromethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0					
氯甲烷 Chloromethane	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100					
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
氯乙烷 Vinyl chloride	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0					
	實際濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
溴甲烷 Bromomethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0					
氯乙烷 chloroethane	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100					
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
三氯一氟甲烷 trichlorofluoromethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0					
	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100					
1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0					
	實際濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

分析日期: 115.04.07

檢測項目		樣品編號		1150407-BK										KG4000104										KG4000107										KG4000204										KG4000207										KG4000101										KG4000201									
取樣體積 (ml)		稀釋倍數		5.0		1.0		5.0		1.0		5.0		1.0		5.0		1.0		5.0		1.0		5.0		1.0		5.0		1.0		5.0		1.0																																							
二氯甲烷 methylene chloride *	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
反-1,2-二氯乙烯 trans-1,2-dichloroethene *	實際濃度值(mg/L)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND																																									
	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
反-1,2-二氯乙烯 trans-1,2-dichloroethene *	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
	實際濃度值(mg/L)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND																																									
甲基第三丁基醚 Methyl tert-butyl ether *	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane *	實際濃度值(mg/L)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND																																									
	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
2,2-二氯丙烷 2,2-dichloropropane	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100																																											
順-1,2-二氯乙烯 cis-1,2-dichloroethene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
溴氯甲烷 bromochloromethane	實際濃度值(mg/L)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND																																									
	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
氯仿 chloroform *	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100		<0.00100																																											
1,1,1-三氯乙烯 1,1,1-trichloroethane *	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
四氯化碳 carbon tetrachloride *	實際濃度值(mg/L)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND																																									
	分析濃度值(ug/L)	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.																																									
1,1-二氯丙烯 1,1-dichloropropene	測試強度	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																									
	實際濃度值(ug/L)	ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND																																									

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
 檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W185

檢驗員: 徐子蘭

驗算員: 李仁堂

分析日期: 115.04.07

IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8

檢測項目	樣品編號	IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8									
		I150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201			
萃取體積 (ml)	稀釋倍數	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0			
		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
苯 benzene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
1,2-二氯乙烷 1,2-dichloroethane *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
三氯乙烯 trichloroethylene *	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
1,2-二氯丙烷 1,2-dichloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
二溴甲烷 dibromomethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
一溴二氯甲烷 bromodichloromethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
順-1,3-二氯丙烯 cis-1,3-dichloropropene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
甲苯 toluene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
反-1,3-二氯丙烯 trans-1,3-dichloropropene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-trichloroethane *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
四氯乙烯 tetrachloroethylene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W/85

檢驗員: 徐子龍
驗算員: 李仁聖

分析日期: 115.04.07

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

檢測項目		樣品編號	IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8																	22791.0780
取樣體積 (ml)			1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201											
稀釋倍數			5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0											
1,3-二氯丙烷 1,3-dichloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
一氯二溴甲烷 dibromochloromethane	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
1,2-二溴乙烷 1,2-dibromomethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
氯苯 chlorobenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,1,2-tetrachloroethane	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
乙苯 ethylbenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											
間,對-二甲苯 m,p-xylene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
鄰-二甲苯 o-xylene	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											
苯乙烯 styrene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
溴仿 bromoform	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
異丙基苯 isopropylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W785

檢驗員:

徐子嵐

驗算員:

李仁堂

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

分析日期: 115.04.07

檢測項目	樣品編號		IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8										分析日期: 115.04.07	
	1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201							
取樣體積 (ml)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0							
稀釋倍數	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0							
1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-tetrachloroethane	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
溴苯 bromobenzene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-trichloropropane	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
正丙基苯 n-propylbenzene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
2-氯甲苯 2-chlorotoluene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
1,3,5-三甲基苯 1,3,5-trimethylbenzene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
4-氯甲苯 4-chlorotoluene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
1,1-二甲基乙基苯 tert-butylbenzene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
1,2,4-三甲基苯 1,2,4-trimethylbenzene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
1-甲基丙基苯 sec-butylbenzene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							
1,3-二氯苯 1,3-dichlorobenzene	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.							
訊號強度	0	0	0	0	0	0	0							
實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100							

4/3

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
 檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W185

檢驗員: 徐子蘭

驗算員: 李仁望

分析日期: 115.04.07

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

檢測項目	樣品編號	1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201												
取樣體積 (ml)	稀釋倍數	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0												
對-異丙基甲苯 p-isopropyltoluene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												
1,4-二氯苯 1,4-dichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
正丁基苯 n-butylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												
1,2-二氯苯 1,2-dichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
1,2-二溴-3-氯丙烷 1,2-dibromo-3-chloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												
1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												
六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												
萘 Naphthalene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
1,2,3-三氯苯 1,2,3-trichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												

* 註: 實際濃度值(mg/L) = 分析濃度值(ug/L) × 稀釋倍數 / 1000

分析方法：NIEA W785

檢測項目	樣品編號	11503.25 - 檢量線		1150407_CCB		1150407_BK		KG4000104		KG4000107		KG4000204		KG4000207		KG4000101		KG4000201		樣品RT		樣品RT		樣品RT		樣品RT		樣品RT	
		15.476	~ 15.536	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
氟苯(S)	Fluorobenzene	15.476	~ 15.536	15.506	15.506	15.506	15.506	15.506	15.506	15.508	15.508	15.506	15.506	15.508	15.508	15.504	15.504	15.509	15.509										
4-溴氟苯(S)	4-Bromofluorobenzene	24.839	~ 24.899	24.869	24.869	24.872	24.872	24.868	24.868	24.871	24.871	24.873	24.873	24.871	24.871	24.872	24.872	24.873	24.873										
1,2-二氯乙烷(S)	1,2-Dichloroethane-d4	27.946	~ 28.006	27.974	27.974	27.976	27.976	27.976	27.976	27.976	27.976	27.975	27.975	27.976	27.976	27.976	27.976	27.976	27.976										
二氯二氟甲烷	Dichlorodifluoromethane	3.732	~ 3.792	3.763	3.763	3.761	3.761	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
氯甲烷	Chloromethane	4.237	~ 4.297	4.267	4.266	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
氯乙烷	Vinyl chloride	4.560	~ 4.620	4.589	4.587	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
溴甲烷	Bromomethane	5.536	~ 5.596	5.566	5.563	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
氯乙烷	Chloroethane	5.829	~ 5.889	5.859	5.859	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
三氯一氟甲烷	Trichlorofluoromethane	6.569	~ 6.629	6.595	6.597	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethene	8.004	~ 8.064	8.033	8.034	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
二氯甲烷	Methylene chloride	9.335	~ 9.395	9.367	9.364	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
反-1,2-二氯乙烷	trans-1,2-Dichloroethene	10.043	~ 10.103	10.073	10.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
甲基第三丁基醚	Methyl-1-butyl ether	10.061	~ 10.121	10.090	10.090	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethane	11.135	~ 11.195	11.166	11.164	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
2,2-二氯丙烷	2,2-Dichloropropane	12.593	~ 12.653	12.622	12.622	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
順-1,2-二氯乙烷	cis-1,2-Dichloroethene	12.608	~ 12.668	12.639	12.636	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
溴氯甲烷	Bromochloromethane	13.206	~ 13.266	13.238	13.236	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
氯仿	Chloroform	13.408	~ 13.468	13.438	13.436	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-Trichloroethane	13.851	~ 13.911	13.880	13.877	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
四氯化碳	Carbon tetrachloride	14.252	~ 14.312	14.285	14.279	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
1,1-二氯丙烷	1,1-Dichloropropane	14.260	~ 14.320	14.289	14.287	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
苯	Benzene	14.792	~ 14.852	14.814	14.812	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane	14.843	~ 14.903	14.874	14.874	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
三氯乙烷	Trichloroethene	16.385	~ 16.445	16.414	16.412	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	16.949	~ 17.009	16.979	16.978	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
二溴甲烷	Dibromomethane	17.236	~ 17.296	17.263	17.265	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
一溴二氯甲烷	Bromodichloromethane	17.601	~ 17.661	17.630	17.628	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
順-1,3-二氯丙烷	cis-1,3-Dichloropropene	18.640	~ 18.700	18.669	18.671	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
甲苯	Toluene	19.393	~ 19.453	19.423	19.423	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										
反-1,3-二氯丙烷	trans-1,3-Dichloropropene	19.892	~ 19.952	19.920	19.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000										

揮發性有機化合物檢驗記錄表-定性判定
檢測方法：吹氣捕集/氣相層析質譜法 NIEA W785

瑞泰環境科技股份有限公司

檢測項目	樣品編號	11500.25 檢量柱		1150407.CCB	1150407.BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
		20.03min	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT						
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-Trichloroethane	20.300 ~ 20.360	20.331	20.328	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
四氯乙烷	Tetrachloroethane	20.601 ~ 20.661	20.630	20.632	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,3-二氯丙烷	1,3-Dichloropropane	20.674 ~ 20.734	20.703	20.702	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2-二溴甲烷	Dibromochloromethane	21.164 ~ 21.224	21.195	21.194	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2-二溴乙烷	1,2-Dibromethane	21.431 ~ 21.491	21.459	21.461	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
氯苯	Chlorobenzene	22.462 ~ 22.522	22.491	22.491	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,1,2-Tetrachloroethane	22.623 ~ 22.683	22.653	22.654	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
乙苯	Ethylbenzene	22.674 ~ 22.734	22.703	22.703	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
間,對-二甲苯	m-Xylene & p-Xylene	22.916 ~ 22.976	22.946	22.945	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
鄰-二甲苯	o-Xylene	23.752 ~ 23.812	23.784	23.784	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
苯乙烯	Styrene	23.782 ~ 23.842	23.813	23.811	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
溴仿	Bromofom	24.193 ~ 24.253	24.221	24.224	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
異丙基苯	Isopropylbenzene	24.502 ~ 24.562	24.533	24.533	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethane	25.120 ~ 25.180	25.150	25.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
溴苯	Bromobenzene	25.167 ~ 25.227	25.196	25.197	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	25.225 ~ 25.285	25.255	25.255	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
正丙基苯	n-Propylbenzene	25.343 ~ 25.403	25.374	25.374	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
2-氯甲苯	2-Chlorotoluene	25.544 ~ 25.604	25.575	25.574	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,3,5-三甲基苯	1,3,5-Trimethylbenzene	25.689 ~ 25.749	25.719	25.719	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
4-氯甲苯	4-Chlorotoluene	25.763 ~ 25.823	25.794	25.792	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,1-二甲基乙基苯	tert-Butylbenzene	26.359 ~ 26.419	26.390	26.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2,4-三甲基苯	1,2,4-Trimethylbenzene	26.455 ~ 26.515	26.484	26.485	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1-甲基丙基苯	sec-Butylbenzene	26.798 ~ 26.858	26.828	26.828	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,3-二氯苯	1,3-Dichlorobenzene	27.054 ~ 27.114	27.085	27.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
對-異丙基苯	p-Isopropyltoluene	27.075 ~ 27.135	27.107	27.105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	27.229 ~ 27.289	27.259	27.259	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
正丁基苯	n-Butylbenzene	27.895 ~ 27.955	27.925	27.925	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2-二氯苯	1,2-Dichlorobenzene	27.984 ~ 28.044	28.014	28.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2-二溴-3-氯丙烷	1,2-Dibromo-3-chloropropane	29.523 ~ 29.583	29.554	29.549	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2,4-三氯苯	1,2,4-Trichlorobenzene	31.129 ~ 31.189	31.159	31.158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
六氯丁二烯	Hexachlorobutadiene	31.431 ~ 31.491	31.461	31.461	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
萘	Naphthalene	31.649 ~ 31.709	31.679	31.681	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
1,2,3-三氯苯	1,2,3-Trichlorobenzene	32.147 ~ 32.207	32.176	32.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						

分析方法：NIEA W785

[illegible]

檢驗員：徐子剛
審核員：李一卓

檢測項目	樣品編號	11501.15 檢量線		1150407.CCC		1150407.CCD		樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
		20.300	~ 20.360	標準品RT	20.332	標準品RT	20.631												
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-Trichloroethane	20.601	~ 20.661	20.632	20.631														
四氯乙烷	Tetrachloroethene	20.674	~ 20.734	20.702	20.702														
1,3-二氯丙烷	1,3-Dichloropropane	21.164	~ 21.224	21.195	21.195														
一氯二溴甲烷	Dibromochloromethane	21.431	~ 21.491	21.459	21.459														
1,2-二溴乙烷	1,2-Dibromoethane	22.462	~ 22.522	22.491	22.491														
氯苯	Chlorobenzene	22.623	~ 22.683	22.653	22.653														
1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,1,2-Tetrachloroethane	22.674	~ 22.734	22.704	22.704														
乙苯	Ethylbenzene	22.916	~ 22.976	22.947	22.947														
間對二甲苯	m-Xylene & p-Xylene	23.752	~ 23.812	23.782	23.782														
鄰二甲苯	o-Xylene	23.782	~ 23.842	23.810	23.810														
苯乙烯	Styrene	24.193	~ 24.253	24.223	24.223														
溴仿	Bromofom	24.502	~ 24.562	24.533	24.533														
異丙基苯	Isopropylbenzene	25.120	~ 25.180	25.148	25.148														
1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethane	25.167	~ 25.227	25.197	25.197														
溴苯	Bromobenzene	25.225	~ 25.285	25.255	25.255														
1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	25.343	~ 25.403	25.373	25.373														
正丙基苯	n-Propylbenzene	25.544	~ 25.604	25.574	25.574														
2-氯甲苯	2-Chlorotoluene	25.689	~ 25.749	25.719	25.719														
1,3,5-三甲基苯	1,3,5-Trimethylbenzene	25.763	~ 25.823	25.792	25.792														
4-氯甲苯	4-Chlorotoluene	26.359	~ 26.419	26.390	26.390														
1,1-二甲基乙基苯	tert-Butylbenzene	26.455	~ 26.515	26.484	26.484														
1,2,4-三甲苯	1,2,4-Trimethylbenzene	26.798	~ 26.858	26.828	26.828														
1-甲基丙基苯	sec-Butylbenzene	27.054	~ 27.114	27.084	27.084														
1,3-二氯苯	1,3-Dichlorobenzene	27.075	~ 27.135	27.105	27.105														
對-異丙基甲苯	p-Isopropyltoluene	27.229	~ 27.289	27.258	27.258														
1,4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	27.895	~ 27.955	27.925	27.925														
正丁基苯	n-Butylbenzene	27.984	~ 28.044	28.014	28.014														
1,2-二氯苯	1,2-Dichlorobenzene	29.323	~ 29.383	29.354	29.354														
1,2-二氯-3-氯丙烷	1,2-Dichloro-3-chloropropane	31.129	~ 31.189	31.159	31.159														
1,2,4-三氯苯	1,2,4-Trichlorobenzene	31.431	~ 31.491	31.459	31.459														
六氯丁二烯	Hexachlorobutadiene	31.649	~ 31.709	31.680	31.680														
萘	Naphthalene	32.147	~ 32.207	32.178	32.178														
1,2,3-三氯苯	1,2,3-Trichlorobenzene																		


審核：8/13

認證	序號	品保樣品名稱		壺拔樣品分析結果			添加樣品分析結果			重複品管查核分析結果			重複樣品分析結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				配製值 (μg/L)	回收率(%)	壺拔 管制標準	添加量 (μg/L)	回收量 (μg/L)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (μg/L)	分析濃度2 (μg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準	分析濃度1 (μg/L)	分析濃度2 (μg/L)	差異 百分比率(%)	重複																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

4/13

淇 荃 環 保 科 技 有 限 公 司

採樣現場記錄—照片說明表

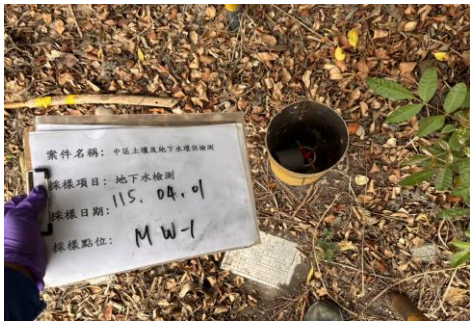			
說明:	MW-1(採樣前)(東)	說明:	MW-1(採樣前)(西)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-1(採樣前)(南)	說明:	MW-1(採樣前)(北)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-1(採樣中)	說明:	MW-1(採樣後)(水位計)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-1(水流元)	說明:	MW-1(井牌)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
		頁次	1/1



環境部 環境檢驗測定機構許可證

環境部國環檢證字第142號

淇荃環保科技有限公司經本部依「環境
檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發
此證。

本證有效期限自114年02月26日至
119年02月25日止

許可證內容詳見副頁



部長彭啓

中華民國114年3月4日



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號
第1頁共3頁

檢驗室名稱：淇荃環保科技有限公司

檢驗室地址：高雄市大社區萬金路349巷21-1號

檢驗室主管：林采慧

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法 (NIEA W103)
- 2、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 3、1,1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 4、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 5、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 6、1,1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 7、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 8、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 9、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 10、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 11、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 12、三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 13、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 14、四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(填註地下水檢測類別副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號

第2頁共3頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 15、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 16、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 17、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 18、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 19、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 20、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 21、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 22、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 23、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)



(續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號

第3頁共3頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 24、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部114年2月5日環部授研字第1145101132號函辦理。





中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第020號

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1 TEL: 07-8152248 FAX: 07-8152250

地下水樣品檢測報告

報告序號: ET115WG0474

行程代碼: KEUW26040001

檢驗室名稱: 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4000104(MW-1)

樣品特性: 地下水

樣品編號: ET115WG0474-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

檢測目的: 定檢申報

採樣地點: MW-1

採樣時間: 115/04/01 11:42

採樣結束: 115/04/01 11:42

收樣時間: 115/04/02 09:52

報告日期: 115/04/22

案件編號: ET115WG0474

採樣方法: NIEA W103.56B

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	監測標準	管制標準
總溶解固體物	1310	mg/L	NIEA W210.58A		1250	-
總硬度	509	CaCO ₃ mg/L	NIEA W208.51A		750	-
氯鹽	268	mg/L	NIEA W415.54B		625	-
硫酸鹽	195	mg/L	NIEA W415.54B		625	-
氨氮	11.0	mg/L	NIEA W437.52C		-	0.25
亞硝酸鹽氮	<0.01(0.0009)	mg/L	NIEA W418.54C		5	10
硝酸鹽氮	0.06	mg/L	NIEA W436.53C		50	100
氟鹽(以F-計)	0.83	mg/L	NIEA W415.54B		4.0	8.0
鎘	ND(<0.00035)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00035	0.025	0.050
鉻	ND(<0.00044)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00044	0.25	0.50
銅	ND(<0.00080)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00080	5.0	10
鎳	<0.005(0.003)	mg/L	NIEA W311.54C		0.5	1.0
鉛	ND(<0.0030)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.0030	0.05	0.10
鋅	0.005	mg/L	NIEA W311.54C		25	50
汞	<0.0004(0.0001)	mg/L	NIEA W330.52A		-	0.020
砷	0.0212	mg/L	NIEA W434.54B		-	0.50
鐵	0.180	mg/L	NIEA W311.54C		1.5	-
錳	0.364	mg/L	NIEA W311.54C		0.25	-
總有機碳	2.5	mg/L	NIEA W532.53C		10	-
總酚	ND(<0.0033)	mg/L	NIEA W524.50C	MDL=0.0033	0.14	-



中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第020號

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1 TEL: 07-8152248 FAX: 07-8152250

地下水樣品檢測報告

報告序號: ET115WG0474

行程代碼: KEUW26040001

檢驗室名稱: 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4000104(MW-1)

樣品特性: 地下水

樣品編號: ET115WG0474-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

檢測目的: 定檢申報

採樣地點: MW-1

採樣時間: 115/04/01 11:42

採樣結束: 115/04/01 11:42

收樣時間: 115/04/02 09:52

報告日期: 115/04/22

案件編號: ET115WG0474

採樣方法: NIEA W103.56B

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	監測標準	管制標準
氰化物	ND(<0.0019)	mg/L	NIEA W468.50C	MDL=0.0019	0.25	0.50
2, 4, 5-三氯酚	ND(<0.00043)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00043	1.85	3.7
2, 4, 6-三氯酚	ND(<0.00046)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00046	0.05	0.1
五氯酚	ND(<0.00041)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00041	0.04	0.08
3, 3'-二氯聯苯胺	ND(<0.00044)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00044	0.05	0.1

以下空白

備註:

1. 本報告已由環境部核可之報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
空氣採樣類: 蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、鄭昇賢(ETA-09)、蔡智淵(ETA-10)
無機檢測類: 簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05)、沈桂嬌(ETI-07)、游心怡(ETI-08)
無機檢測類: 李苑如(ETI-09)、黃鳳君(ETI-10)
有機檢測類: 施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)、卓杏花(ETO-06)
2. 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限×稀釋倍數)。
3. 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間, 分析結果以"<定量極限×稀釋倍數"表示。
4. 本樣品係由客戶自行送樣, 樣品基本資料均為客戶提供, 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一) 茲保證本報告內容完全符合環境部及有關機關之標準方法及品質品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 經政府機關調查屬實, 除自負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:

檢驗室主管:



中環科技事業股份有限公司

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1

TEL: 07-8152248 FAX: 07-8152250

報告序號: ET115WG0474

地下水樣品檢測報告

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4000104(MW-1)

樣品編號: ET115WG0474-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

採樣地點: MW-1

採樣時間: 115/04/01 11:42

收樣時間: 115/04/02 09:52

報告日期: 115/04/22

案件編號: ET115WG0474

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	監測標準	管制標準
硫化物	ND(<0.0056)	mg/L	NIEA W433.52A	MDL=0.0056	-	-
無機含氮量	<11.1(11.1)	mg/L	NIEA W418.54C NIEA W436.53C NIEA W437.52C		-	-
總含氮量	11.3	mg/L	NIEA W439.50C		-	-
油脂(正己烷抽出物)	ND(<2.0)	mg/L	NIEA W505.54B	MDL=2.0	-	-
柴油總碳氫化合物	0.114	mg/L	NIEA W802.51B		-	-
甲醛	<0.0286 (0.00592)	mg/L	NIEA W782.52B		-	-

以下空白

備註:

1. 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示,並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限×稀釋倍數)。
2. 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間,分析結果以"<定量極限>×稀釋倍數"表示。
3. 本樣品係由客戶自行包樣,樣品基本資料均為客戶提供,本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



負責人:



檢驗室主管:

林曉娟



中環科技事業股份有限公司
液體樣品容量法分析報告表(滴定法)

最新確認日期: 115.02.01

AH-453-026.027

4/4 (AH)

分析方法: NIEA W208

分析項目: Hardness

滴定液名稱: EDTA 偵測極限: 0.28

滴定液濃度 C: 1003

試劑空白 B: 0.02

分析員: AH

分析日期: 115.04.02

審核人: 桂 4/4

樣品編號	取樣體積 V (mL)	滴定液消耗量 A (mL)	濃度* (mg碳酸鈣/L)	DF	DFx濃度	公告	重複分析差異% (0~15)
空白分析1	50	0.02	0.000	✓	查核樣品濃度 100(mg/L)	QC% (85~115)	添加% (80~120)
空白分析2					空白平均值	0.000	平均值 / 分析員確認值
查核分析1	50	5.02	100.300		100.3	✓	差異百分比
查核分析2						100.300	
ET115WG0474-001	50	5.05	100.902	5.0	504.510	505 8/4	飲用水
ET115WG0474-001	50	6.36	127.180	4.0	508.720	509	QC%(97.9 ~ 102.5)
ET115WG0474-001	50	2.59	51.554	10.0	515.540	516 8/4	添加%(96.2 ~ 107.4)
ET115WG0475-001	50	3.37	67.201	5.0	336.005	336 8/4	重複分析差異%
ET115WG0475-001	50	6.62	132.396	2.5	330.990	331	3.0
							地下水
							QC%(98.2 ~ 102.3)
							添加%(96.6 ~ 106.8)
							重複分析差異%
							2.6
							水質水量
							QC%(97.9 ~ 102.0)
							添加%(96.6 ~ 107.8)
							重複分析差異%
							1.9

重複分析	取樣體積	滴定液消耗量	濃度*	DF	DFx濃度	重複分析平均值	重複分析標準偏差
ET115WG0474-001	50	6.36	127.180	4.0	508.720	511	
ET115WG0474-001D	50	6.41	128.183	4.0	512.732	510.726	0.8
							✓

樣品編號	滴定液消耗量	添加前濃度*	取樣體積	添加液濃度	添加體積	最終體積	DF	濃度*	回收率%
ET115WG0474-001(DF10)	7.64	51.554	49	5000	1	50	1.0	152.857	102.3
									✓

註: 濃度*(mg碳酸鈣/L) = (A-B)×C÷V

數據繳交日期: 115.04.02

AH

✓樣品編號

✓樣品數量

✓稀釋倍數

✓分析數值

分析方法：NIEA W311

ICP-OES 金屬分析報告表 (CF=2)

4 SEE
EE-153-0115-019

儀器編號：ICP-C

分析人員： EE

分析日期：115.04.08 查驗／審核人：

[illegible]

註1: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$ E: 添加分析濃度 A: 樣品濃度

註2: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

註4: CF=2樣品經前處理消化濃縮取100mL,最終定量至50mL.

分析人員：EE 分析日期：115.04.08

4/8EE
EF-413-015-019

待

ICP metal report worksheet 2 (CF=2, Processed data)

附錄二-267

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期：115.02.01

ICP-C (CF2) 檢量線報告表

4SEE
EE-153-15-079

分析日期：115.04.08

分析人員：EE

查驗/審核人：林芳

Ag 328.068 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 42801.3037363

intercept a= 34.665752

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	39.3073	0.00011	
#2	0.005	261.518	0.00530	6.0
#3	0.01	450.8021	0.00972	-2.8
#4	0.02	873.5607	0.01960	-2.0
#5	0.05	2167.2848	0.04983	-0.3
#6	0.1	4345.0348	0.10071	0.7
#7	0.2	8583.6545	0.19974	-0.1
#8				
#9				

As 193.696 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 1579.7350513

intercept a= 12.409038

r= 0.9999

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	9.5986	-0.00178	
#2	0.03	54.6029	0.02671	-11.0
#3	0.05	85.918	0.04653	-6.9
#4	0.1	169.2896	0.09931	-0.7
#5	0.2	321.3437	0.19556	-2.2
#6	0.5	801.1431	0.49928	-0.1
#7	1	1635.0861	1.02718	2.7
#8	2	3151.6623	1.98720	-0.6
#9				

B 249.772 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 34717.9126719

intercept a= 1555.171730

r= 0.9999

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	1372.1499	-0.00527	
#2	0.05	3206.9845	0.04758	-4.8
#3	0.1	4933.3706	0.09730	-2.7
#4	0.2	8419.2451	0.19771	-1.1
#5	0.5	18972.9324	0.50169	0.3
#6	1	37035.8252	1.02197	2.2
#7	2	70609.6582	1.98902	-0.5
#8				
#9				

Cd 228.802 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 35813.1482885

intercept a= 24.814583

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	27.9496	0.00009	
#2	0.002	93.2917	0.00191	-4.5
#3	0.005	208.7501	0.00514	2.8
#4	0.01	380.1642	0.00992	-0.8
#5	0.02	737.2957	0.01989	-0.5
#6	0.05	1817.1801	0.05005	0.1
#7				
#8				
#9				

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期：115.02.01

48EE
EE-153-015-079

ICP-C (CF2) 檢量線報告表

分析日期：115.04.08

分析人員：EE

查驗/審核人：

Cr 267.716 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 43708.9795743

intercept a= 38.649410

r= 1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度(mg/L)	強度	迴歸後濃度(mg/L)	誤差%
#1	0	15.0873	-0.00054	
#2	0.005	259.6804	0.00506	1.2
#3	0.01	465.01	0.00975	-2.5
#4	0.02	900.6818	0.01972	-1.4
#5	0.05	2196.9543	0.04938	-1.2
#6	0.1	4456.967	0.10108	1.1
#7	0.2	8830.0633	0.20114	0.6
#8	0.5	21867.1981	0.49941	-0.1
#9				

Cu 324.754 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 41189.3654276

intercept a= 640.278037

r= 1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度(mg/L)	強度	迴歸後濃度(mg/L)	誤差%
#1	0	600.1849	-0.00097	
#2	0.005	840.3865	0.00486	-2.8
#3	0.01	1015.887	0.00912	-8.8
#4	0.02	1443.8147	0.01951	-2.5
#5	0.05	2686.4449	0.04968	-0.6
#6	0.1	4838.5173	0.10193	1.9
#7	0.2	8960.4875	0.20200	1.0
#8	0.5	21189.0899	0.49889	-0.2
#9				

Fe 259.940 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 17351.9322672

intercept a= 16.919755

r= 1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度(mg/L)	強度	迴歸後濃度(mg/L)	誤差%
#1	0	21.4405	0.00026	
#2	0.01	200.0033	0.01055	5.5
#3	0.02	362.2625	0.01990	-0.5
#4	0.05	892.4204	0.05046	0.9
#5	0.1	1780.9501	0.10166	1.7
#6	0.2	3476.4671	0.19938	-0.3
#7	0.5	8618.6493	0.49572	-0.9
#8	1	17404.7975	1.00207	0.2
#9				

Mn 259.372 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 148140.2226986

intercept a= 63.401166

r= 1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度(mg/L)	強度	迴歸後濃度(mg/L)	誤差%
#1	0	50.1967	-0.00009	
#2	0.01	1540.148	0.00997	-0.3
#3	0.02	3006.8909	0.01987	-0.7
#4	0.05	7478.0052	0.05005	0.1
#5	0.1	15101.3726	0.10151	1.5
#6	0.2	29936.1045	0.20165	0.8
#7	0.5	73398.0069	0.49504	-1.0
#8	1	148500.1032	1.00200	0.2
#9				

ICP-C (CF2) 檢量線報告表

分析日期：115.04.08

分析人員：EE

查驗/審核人：

Ni 231.604 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 10690.1854529

intercept a= 12.549694

r= 1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度(mg/L)	強度	迴歸後濃度(mg/L)	誤差%
#1	0	11.4612	-0.00010	
#2	0.01	122.1096	0.01025	2.5
#3	0.02	230.6919	0.02041	2.1
#4	0.05	551.3277	0.05040	0.8
#5	0.1	1092.7056	0.10104	1.0
#6	0.2	2157.0742	0.20061	0.3
#7	0.5	5307.5153	0.49531	-0.9
#8	1	10725.0607	1.00209	0.2
#9				

Pb 220.353 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 4426.4639381

intercept a= 5.250687

r= 1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度(mg/L)	強度	迴歸後濃度(mg/L)	誤差%
#1	0	12.592	0.00166	
#2	0.01	50.3368	0.01019	1.9
#3	0.02	94.465	0.02015	0.8
#4	0.05	228.1225	0.05035	0.7
#5	0.1	451.2152	0.10075	0.8
#6	0.2	887.1297	0.19923	-0.4
#7	0.5	2197.3779	0.49523	-1.0
#8	1	4442.5186	1.00244	0.2
#9				

Zn 213.857 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 59719.0060793

intercept a= 39.738427

r= 1.0000

	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度(mg/L)	強度	迴歸後濃度(mg/L)	誤差%
#1	0	33.6913	-0.00010	
#2	0.005	356.3243	0.00530	6.0
#3	0.01	647.1662	0.01017	1.7
#4	0.02	1203.7611	0.01949	-2.6
#5	0.05	3010.2678	0.04974	-0.5
#6	0.1	6051.5062	0.10067	0.7
#7	0.2	11965.7588	0.19970	-0.2
#8	0.5	29900.7521	0.50003	0.0
#9				

離子層析法分析報告表

分析方法：NIEA W415

IC-D

鹽氣

F-

分析報告

分析日期： 115.04.07 分析人員：

GC/AT

偵測極限：

0.019

定量極限：

0.1

審核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b =$

0.35596

intercept a=

0.16297

$$\mathbf{r} =$$

0.99983

檢量線分析日期：

115.04.07

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope b= 0.35596 intercept a= -0.16297 r = 0.99983 檢量線分析日期: 115.04.07

檢量線2					〈公告〉檢量線(確認/查核)% ±15・ 查核% 85~115・添加% 80~120・重複% 0~20				
標準樣品#	X 濃度	Y 高度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%					
#1	1.5	0.444	1.7052	13.7	✓	飲用水 重複% 7.7	查核樣品回收率% 85.0~115.0	添加分析回收率% 80.0~120.0	
#2	3.0	0.896	2.9750	-0.8					
#3	5.0	1.583	4.9050	-1.9					
#4	8.0	2.638	7.8688	-1.6					
#5	15.0	5.150	14.9258	-0.5					
#6	20.0	6.999	20.1202	0.6	✓	地下水 重複% 10.5	查核樣品回收率% 87.7~113.0	添加分析回收率% 80.0~120.0	
#7									
#8									
#9									
查核分析	高度	分析結果	添加濃度	相對誤差值%	查核分析	高度	分析結果	添加濃度	回收率%
檢量線確認(ICV)	1.626	5.0258	5	0.5	查核樣品(QC)1	1.613	4.9892	5	99.8
檢量線查核(CCV)1	1.576	4.8853	5	-2.3	查核樣品(QC)2				
檢量線查核(CCV)2					平均值		空白分析1	0.000	ND
檢量線查核(CCV)3					差異%		空白分析2		

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註2:"#"表連續稀釋

註5: $F^* = \text{濃度} F \times \text{稀釋倍數} DF$

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

數據繳交日期：115.04.08

附錄二-273

IC-氟鹽(1-4) F-(NIEA W415) 【LIMS】 0407(GC,AT)-AMY.xls L-5檢2 / 第1頁

ET115W90975001

中環科技事業股份有限公司

氟鹽F- 檢量線

GL-8-0942099

GC89

審核人：

分析日期：115.04.07

分析人員：GC/AT

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 0.29192

intercept a= 0.00849

r = 0.99985

檢量線1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	0.1	0.037	0.0977	-2.3
#2	0.3	0.097	0.3032	1.1
#3	0.5	0.152	0.4916	-1.7
#4	0.8	0.242	0.7999	0.0
#5	1.0	0.305	1.0157	1.6
#6	1.5	0.444	1.4919	-0.5
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 0.35596

intercept a= -0.16297

r = 0.99983

檢量線2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	1.5	0.444	1.7052	13.7
#2	3.0	0.896	2.9750	-0.8
#3	5.0	1.583	4.9050	-1.9
#4	8.0	2.638	7.8688	-1.6
#5	15.0	5.150	14.9258	-0.5
#6	20.0	6.999	20.1202	0.6
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b=

intercept a=

r =

檢量線3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b=

intercept a=

r =

檢量線4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

分析日期: 115.04.07

分析人員: GC/AT

氣鹽 F- 品管

審核人:

gc 49

中環科技

檢量線 1

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比
ET115WG0474001	0.250			1	0.8273	0.8273	0.8308	0.8
ET115WG0474001D	0.252			1	0.8342	0.8342		✓
重複分析								
樣品編號	高度	添加前濃度 A	取樣體積 B	添加液濃度 C	添加體積 D	最終體積 E	稀釋倍數 DF	回收率 %
添加分析								

檢量線 3

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
樣品編號	高度	添加前濃度 A	取樣體積 B	添加液濃度 C	添加體積 D	最終體積 E	稀釋倍數 DF	回收率 %
添加分析								

檢量線 2

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
樣品編號	高度	添加前濃度 A	取樣體積 B	添加液濃度 C	添加體積 D	最終體積 E	稀釋倍數 DF	回收率 %
ET115WG0474001	0.545	0.8273	49.5	100	0.5	50	1.9889	117.0
添加分析								

檢量線 4

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
樣品編號	高度	添加前濃度 A	取樣體積 B	添加液濃度 C	添加體積 D	最終體積 E	稀釋倍數 DF	回收率 %
添加分析								

離子層析法分析報告表

分析方法：NIEA W415

IC-D

鹽氣

C1-

分析報告

分析日期： 115.04.07

分析人員：

GC/AT

偵測極限：

0.022

定量極限：

0.1

審核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b =$

0.28830

intercept a=

-1.53407

$$\mathbf{r} =$$

0.99963

檢量線分析日期：

115.04.07

檢量線3					X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	<公告>檢量線(確認/查核)% ±15・				
標準樣品#					濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%	查核% 85~115・添加% 80~120・重複% 0~20				
#1					20.0	4.610	21.3114	6.6					
#2					30.0	6.922	29.3308	-2.2					
#3					40.0	9.676	38.8834	-2.8					
#4					50.0	12.903	50.0766	0.2	飲用水	查核樣品回收率%	添加分析回收率%		
#5					80.0	21.601	80.2465	0.3	重複% 5.6	87.9~110.7	80.0~120.0		
#6					100.0	27.338	100.1459	0.1	地下水	查核樣品回收率%	添加分析回收率%		
#7									重複% 7.4	88.4~108.0	80.0~120.0		
#8									水質水量	查核樣品回收率%	添加分析回收率%		
#9									重複% 6.2	88.5~108.7	80.0~119.8		
查核分析		高度	分析結果	添加濃度	相對誤差值%	查核分析		高度	分析結果	添加濃度	回收率%		
檢量線確認(ICV)		9.435	38.0474	40	-4.9	查核樣品(QC)1		9.842	39.4591	40	98.6		
檢量線查核(CCV)1		9.639	38.7550	40	-3.1	查核樣品(QC)2							
檢量線查核(CCV)2						平均值			空白分析1	0.000	ND		
檢量線查核(CCV)3						差異%			空白分析2				

[illegible]

重複分析								
樣品編號	高度	取樣體積 V_s	稀釋體積 V_t	稀釋倍數 DF	分析結果A	$A \cdot DF$	平均值	差異百分比
ET115WG0474-001	13.937	10	50	5.0	53.6631	268.3155	268.6278	0.2
ET115WG0474-001-D	13.973	10	50	5.0	53.7880	268.9400		
								✓

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註2:"#"表連續稀釋

註5: $F^* = \text{濃度} F \times \text{稀釋倍數} DF$

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

數據繳交日期：115.04.08

GC-8-094091

GC 89

中環科技事業股份有限公司

氯鹽Cl- 檢量線

審核人：



分析日期：115.04.07

分析人員：GC/AT

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b=

intercept a=

r =

檢量線1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.23308

intercept a= -0.06510

r = 0.99995

檢量線2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	1.5	0.308	1.6007	6.7
#2	3.0	0.622	2.9479	-1.7
#3	5.0	1.084	4.9301	-1.4
#4	8.0	1.808	8.0363	0.5
#5	15.0	3.414	14.9266	-0.5
#6	20.0	4.610	20.0579	0.3
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.28830

intercept a= -1.53407

r = 0.99963

檢量線3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	20.0	4.610	21.3114	6.6
#2	30.0	6.922	29.3308	-2.2
#3	40.0	9.676	38.8834	-2.8
#4	50.0	12.903	50.0766	0.2
#5	80.0	21.601	80.2465	0.3
#6	100.0	27.338	100.1459	0.1
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.35989

intercept a= -7.97940

r = 0.99977

檢量線4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	80.0	21.601	82.1929	2.7
#2	100.0	27.338	98.1339	-1.9
#3	150.0	45.350	148.1825	-1.2
#4	200.0	64.587	201.6349	0.8
#5	300.0	99.936	299.8566	0.0
#6				
#7				
#8				
#9				

审核人：

檢量線3

[illegible]

險量線4

[illegible]

GL-8-0942097

GL 4/9

黃 4/9

審核人：

中環科技事業股份有限公司

硫酸鹽SO4= 檢量線

分析日期：115.04.07

分析人員：GC/AT

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b=

intercept a=

r =

檢量線1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

檢量線2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b=

intercept a=

r =

檢量線3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	20.0	1.497	20.7623	3.8
#2	30.0	2.184	29.3092	-2.3
#3	40.0	2.985	39.2743	-1.8
#4	50.0	3.896	50.6080	1.2
#5	80.0	6.260	80.0183	0.0
#6	100.0	7.868	100.0233	0.0
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.08038

intercept a= -0.17187

r = 0.99979

檢量線4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	80.0	6.260	85.5542	6.9
#2	100.0	7.868	100.0499	0.0
#3	150.0	12.800	144.5103	-3.7
#4	200.0	18.506	195.9482	-2.0
#5	300.0	30.489	303.9712	1.3
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.11093

intercept a= -3.23053

r = 0.99851

ET115W0548-001
ET115W0548-002

分析日期: 115.04.07

中環科技事業股份有限公司
硫酸鹽 S04= 品管

審核人: GC/AT
最新確認日期: 114.08.01

檢量線1

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F
添加分析								
樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F
回收率 %								

檢量線3

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
ET115W0734-001	3.387	10	50	5	44.2756	221.3780	219.7295	1.5
ET115W0734-001-D	3.334	10	50	5	43.6162	218.0810		
ET115W0874-001	2.969	10	50	5	39.0753	195.3765	195.7185	0.3
ET115W0874-001-D	2.980	10	50	5	39.2121	196.0605		
V								
重複分析								
添加分析								
樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F
回收率 %								

檢量線2

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F
回收率 %								

檢量線4

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
ET115W0734-001(DFS)	12.107	44.2756	49	5000	1	50	138.2631	94.9
ET115W0874-001(DFS)	12.036	39.0753	49	5000	1	50	137.6231	99.3
V								
添加分析								
樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F
回收率 %								

分析方法：NIEA W418

吸光分析報告表

分析項目： NO2-N

儀器名稱： UV-F

分析人員： FZ

分析日期： 115.04.02

使用波長： 543 nm

定量極限： 0.002

偵測極限： 0.00017

審核人：

115.04.02

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 2.9847$

```
intercept a= 0.000856
```

截距濃度 = 0.000287

$$r = 1.0000$$

		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
RF	標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	#1	0	0.0000	-0.00029		重複% 4.6	94.4~104.5	78.2~113.3
3.200	#2	0.002	0.0064	0.00186	-7.0	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
3.100	#3	0.004	0.0124	0.00387	-3.3	重複% 5.6	93.6~106.1	75.0~113.7
3.070	#4	0.01	0.0307	0.01000	0.0	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
3.080	#5	0.02	0.0616	0.02035	1.8	重複% 5.5	93.8~105.6	75.0~114.7
3.040	#6	0.04	0.1216	0.04045	1.1			
2.986	#7	0.1	0.2986	0.09976	-0.2	公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	#8					重複% 0~20	80~120	75~125
檢量線	確認 (ICV)	0.01	0.0309	0.01007	0.7		f 值	
	查核1 (CCV)	0.01	0.0307	0.01000	0.0		1.0000	R
	查核2 (CCV)						1.0000	QC
RF平均值 3.079	方法空白1	0	0.0006	-0.00009		空白平均值	-0.00009	
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
RF範圍2.155 ~ 4.003	查核分析1	0.01	0.0307	0.01000		100.0		
	查核分析2					-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100% 註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

註3: "＃"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.02

附錄二-282

NO2-N(W418) 【LIMS】 0402(FZ)-碁P(3)

最新確認日期：115.02.01

分析方法：NIEA W433

吸光分析報告表

分析項目:	Sulfide硫化物	儀器名稱:	UV-D	分析人員:	FS	分析日期:	115.04.03
使用波長:	664 nm	定量極限:	0.020	偵測極限:	0.0056	審核人:	李新
線性公式:	X=(Y-a)/b		slope b= 0.7682	intercept a= 0.009249	r=	0.9988	

QC低濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
標準樣品#		濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 13.0	84.2~113.9	75.0~125.0
#1		0	0.0097	0.0006		地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#2		0.02	0.0242	0.0195	-2.5	重複% 10.0	84.2~113.0	75.0~125.0
#3		0.05	0.0457	0.0474	-5.2	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#4		0.1	0.0864	0.1004	0.4	重複% 15.0	80.0~120.0	75.0~125.0
#5		0.2	0.1694	0.2085	4.2	公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#6		0.25	0.1964	0.2436	-2.6	重複% 20	80~120	75~125
#7						溫泉水(公告)	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#8						重複% 20	80~120	75~125
檢量線 (±10%)	確認 (ICV)	0.048195	0.0484	0.0510	0.0510	5.8	f 值	
	查核1 (CCV)	0.1	0.0839	0.0972		-2.8	R	1.0007
	查核2 (CCV)						QC	0.9639
方法空白1		0	0.0043	-0.0064	-0.0064	空白平均值	-0.0064	
方法空白2						查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
查核分析1		0.048195	0.0452	0.0468	0.0468	97.1		
查核分析2						—	—	—

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3:"#"表連續稀釋

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

數據繳交日期：115.04.03

附錄二-283

Sulfide硫化物(W433) 【LIMS】 0403(FS)-熔L-低P(2)

分析方法：NIEA W434

吸光分析報告表

Be-65275-76 Be 4/7
期： 115.04.04

分析項目： As(水質) 儀器名稱： AA-900 分析人員： BQ

分析日期： 115.04.04

使用波長： 193.7 nm 零點校正液： 10% HCl 偵測極限： 0.00013

審核人：李 4/8

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope $b=0.0164$ intercept $a=0.002252$ 截距濃度= 0.000137, $r=0.9997$ 定量極限: 0.0010

		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
RF	標準樣品#	濃度(μg/L)	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	水質水量	QC樣品回收%	添加分析回收%
	#1	0	0.0000	-0.13732		重複% 12.7	82.3~120.0	75.0~124.3
0.0198	#2	1	0.0198	1.07000	7.0	地下水	QC樣品回收%	添加分析回收%
0.0176	#3	2	0.0352	2.00902	0.5	重複% 11.4	89.8~118.3	76.4~121.3
0.0179	#4	4	0.0716	4.22854	5.7	飲用水	QC樣品回收%	添加分析回收%
0.0168	#5	6	0.1007	6.00293	0.0	重複% 5.9	81.5~120.0	84.3~116.5
0.0163	#6	8	0.1302	7.80171	-2.5			
0.0165	#7	10	0.1652	9.93585	-0.6			
0.0166	#8	16	0.2655	16.05171	0.3	公告	QC樣品回收%	添加分析回收%
檢量線	確認 (ICV)	3	0.0533	3.11268	3.8	重複% 0~20	80~120	75~125
	查核1 (CCV)	4	0.0744	4.39927	10.0			
	查核2 (CCV)	4	0.0714	4.21634	5.4			
檢量線	ICB	0	0.0010	-0.07634		ND		
	CCB 1	0	0.0002	-0.12512		ND		
	CCB 2	0	0.0014	-0.05195		ND		
RF平均值	方法空白1	0	-0.0004	-0.16171	4 1/2 A0	空白平均值	-0.00016	
0.0174	方法空白2					查核樣品回收率%	差異%	平均值
RF範圍 0.0122	查核分析1	3	0.0526	3.07000		102.3		3.070000
~ 0.0226	查核分析2					—	—	—

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註5: 檢量線與樣品消化時, 已稀釋2倍

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為mg/L及mL

註4: " #" 表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.04

☒樣品編號 ☐樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

As (AA)(W434,R201,R301)【LIMS】0404(BQ)-溶水P(1)

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W436

分析項目： $\text{NO}_3^- \text{N}$

儀器名稱： FIA-D

分析人員： FZ

分析日期： 115.04.02

使用波長： 540 nm

定量極限： 0.01

偵測極限： 0.0019

審核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 0.8740$

```
intercept a= 0.002381
```

截距濃度 = 0.002724

 $r=0.9994$

低濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	飲用水		
RF	標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 8.5	QC樣品回收率% 91.0~109.6	添加分析回收率% 75.8~125.0
	#1	0	0.0001	-0.0026		地下水		
1.140	#2	0.01	0.0114	0.0103	3.0	重複% 5.7	QC樣品回收率% 86.7~114.5	添加分析回收率% 77.2~118.6
1.055	#3	0.02	0.0211	0.0214	7.0	水質水量		
0.984	#4	0.05	0.0492	0.0536	7.2	重複% 8.7	QC樣品回收率% 85.4~114.2	添加分析回收率% 83.3~119.1
0.869	#5	0.1	0.0869	0.0967	-3.3			
0.889	#6	0.2	0.1777	0.2006	0.3			
	#7					公告		
	#8					重複% 0~15	QC樣品回收率% 80~120	添加分析回收率% 75~125
檢量線	確認 (ICV)	0.05	0.0466	0.0506	1.2	分析日期	鍋管轉化效率(%)	鍋管轉化效率查核(%)
	查核1 (CCV)	0.1	0.0867	0.0965	-3.5	115.04.02	101.4	99.5
	查核2 (CCV)					★NO ₃ ⁻ N濃度=TON測值-(NO ₂ ⁻ N濃度÷鍋管轉化效率×100)		
	查核3 (CCV)							
RF平均值	方法空白1	0	0.0000	-0.0027		空白平均值		-0.0027
0.987	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異%
RF範圍0.691	查核分析1	0.05	0.0440	0.0476		95.2		
~ 1.283	查核分析2					-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3: " #" 表連續稀釋

註4: $\text{NO}_3^- \text{N}$ 濃度 = NO_3^- 濃度 $\times 0.226$

註5: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL。

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

附錄二-285

附錄二-285 NO3-N & TON(FIA) 【D】 (NIEA W436) 【LIMS】 0402(FZ)-瑤<低>P(3)

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W437

分析項目： $\text{NH}_3\text{-N}$

儀器名稱：

FIA-C

分析人員：

DW

分析日期：

15.04.02

使用波長： 660 nm

定量極限：

0.02

偵測極限：

0.0055

審核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 0.1844$

```
intercept a= -0.000690
```

截距濃度 = -0.003742

r=1.0000

高濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
RF	標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	#1	0	0.0000	0.0037		重複% 10.0	88.9~110.4	85.0~115.0
0.181	#2	0.2	0.0362	0.2001	0.0	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.181	#3	0.5	0.0906	0.4951	-1.0	重複% 7.9	90.1~110.6	85.0~115.0
0.183	#4	1	0.1832	0.9972	-0.3	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.184	#5	1.5	0.2766	1.5037	0.2	重複% 9.0	90.4~111.2	85.0~115.0
0.184	#6	2	0.3679	1.9989	-0.1			
	#7							
	#8					公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
檢量線	確認 (ICV)	1.0	0.1861	1.0130	1.3	重複% 0~15	85~115	85~115
	查核1 (CCV)	1.0	0.1823	0.9924	-0.8			
	查核2 (CCV)	1.0	0.1755	0.9555	-4.5			
	查核3 (CCV)							
RF平均值 0.183	方法空白1	0	0.0004			查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
	方法空白2					98.0		
RF範圍0.128 ~ 0.238	查核分析1	1.0	0.1801	0.9804		-	-	-
	查核分析2							

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3: "#"表連續稀釋

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☐分析數值

數據繳交日期：115.04.02

附錄-286 NH₃-N 氨氮(FIA)【B·C】(NIEA W437)【LIMS】0402(DW)-塔L-高P(3)

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W437

分析項目： $\text{NH}_3\text{-N}$

儀器名稱：

FIA-C

分析人員：

DW

分析日期：

115.04.02

使用波長： 660 nm

定量極限：

0.02

值測極限：

0.0055

审核人：

4%

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 0.1805$

```
intercept a= 0.000209
```

$$\text{截距濃度} = 0.001158$$

r=0 9999

低濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
RF	標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	#1	0	0.0000	-0.0012		重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
0.190	#2	0.02	0.0038	0.0199	-0.5	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.190	#3	0.04	0.0076	0.0409	2.3	重複% 7.9	85.0~115.0	85.0~115.0
0.185	#4	0.06	0.0111	0.0603	0.5	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.183	#5	0.08	0.0146	0.0797	-0.4	重複% 9.0	85.0~115.0	85.0~115.0
0.184	#6	0.1	0.0184	0.1008	0.8			
0.181	#7	0.2	0.0362	0.1994	-0.3			
	#8							
檢量線	確認 (ICV)	0.06	0.0118	0.0642	7.0	公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	查核1 (CCV)					重複% 0-15	85-115	85-115
	查核2 (CCV)							
	查核3 (CCV)							
RF平均值 0.186	方法空白1					空白平均值		
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
RF範圍0.130 ~ 0.242	查核分析1							
	查核分析2					—	—	—

[illegible]

重複分析						AxDF		
樣品編號	吸光度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	濃度 A	樣品濃度	平均值	差異百分比

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3: "#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.02

附錄二-287
NH3

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

287 NH3-N氨氮(FIA)【B·C】(NIEA W437)【LIMS】0402(DW)-琰I-低P(4)

分析方法：NIEA W439

FIA 分析報告表

分析項目： TN(總氮) 儀器名稱： FIA-D

分析日期：~~115.04.07~~

使用波長： 540 nm 偵測極限： 0.024

分析人員： AT

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope $b=0.1685$ intercept $a=0.100437$ 截距濃度= 0.596065 $r=0.9995$

標準樣品#		X 濃度	Y 高度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%	定量極限： 0.5		
#1		0	0.0907	-0.0578				
#2		0.5	0.1844	0.4983	-0.3			
#3		1	0.2559	0.9226	-7.7	水質水量 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
#4		2	0.4463	2.0526	2.6	重複% 10.0 85.0~115.0 85.0~115.0		
#5		4	0.7883	4.0823	2.1			
#6		8	1.4786	8.1790	2.2			
#7		10	1.7545	9.8164	-1.8			
#8								
#9						公 告 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
檢量線	確認 (ICV)	2	0.4351	1.9861	-0.7	重複% 0~10 85~115 85~115		
	查核1 (CCV)	2	0.4250	1.9262	-3.7	NO ₃ -N : 2.2350		
	查核2 (CCV)	2	0.4218	1.9072	-4.6	NO ₂ -N : 2.2614		
	查核3 (CCV)					鎘還原效率確認: 98.8 % (需>90%)		
UV消化效率確認(尿素)		20	1.7029	分析日期	回收率%	93.9	消化效率回收率範圍(%) >85.0	
UV消化效率確認(NO ₃ -N)		20	1.8140	115.04.07				
方法空白1		0	0.0908	-0.0572		空白平均值		-0.0572
方法空白2						查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
查核分析1		2	0.4414	2.0235		101.2		
查核分析2						-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3: "#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.07

附錄二-288

TN總氮 (FLA) 【D】 (NIEA W439) 【LIMS】 0407(AT)-瑤P(3)

分析方法：NIEA W468

FIA 分析報告表

分析項目： CN^-

儀器名稱： FIA-E

分析人員： AT

分析日期： 115.04.07

使用波長： 600 nm

定量極限： 0.01

偵測極限： 0.0019

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 160014.7940$

intercept a= -195.277262

截距濃度= -0.001220

 $r=0.9987$

		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	公 告		
標準樣品#		濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 0~10	QC樣品回收% 85~115	添加分析回收% 85~115
#1		0	15.8	0.00132		飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#2		0.01	1492.7	0.01055	5.5	重複% 8.9	85.0~115.0	85.0~110.3
#3		0.02	3139.9	0.02084	4.2	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#4		0.05	7815.7	0.05006	0.1	重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
#5		0.1	14545.4	0.09212	-7.9	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#6		0.15	24634.2	0.15517	3.4	重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
#7		0.2	31797.2	0.19993	0.0			
#8								
分解效率 確認	測試溶液A	0.20	15213.8	0.09630	0.09630	2.0 (DF)	0.1926	96.3%【≥90%】
	測試溶液B	2.00	409.7	0.00378	0.00378	≤0.02mg/L		
檢量線	確認 (ICV)	0.05	7575.7	0.04856	0.04856	-2.9		
	查核1 (CCV)	0.05	7993.8	0.05118		2.4		
	查核2 (CCV)							
	查核3 (CCV)							
	方法空白1	0	8.1	0.00127	0.00127	空白平均值	ND	
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
	查核分析1	0.05	7945.0	0.05087	0.05087	101.7		
	查核分析2					-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4/ 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

☒ 樣品編號 ☒ 樣品數量 ☐ 稀釋倍數 ☒ 分析數值

註3: "#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.07

附錄二-289

CN-氰化物 (FIA) 【E】 (NIEA W468) 【LIMS】 0407(AT)-琺L-P(1)

分析方法：NIEA W524

FIA 分析報告表

DD-316-038-040

分析項目：Phenol 儀器名稱：FIA-B 分析人員：DD 分析日期：115.04.07

使用波長： 505 nm 定量極限： 0.02 偵測極限： 0.0033 審核人： 林有文

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope $b=0.0573$ intercept $a=0.000004$ 截距濃度= 0.000070 $r=1.0000$

標準樣品#		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
濃度		吸光度	迴歸後濃度	誤差%	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%	
#1		0	-0.00002	-0.000419		重複% 9.6	85.0~112.2	85.0~115.0
#2		0.02	0.00114	0.019825	-0.9	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#3		0.05	0.00287	0.050017	0.0	重複% 8.8	85.0~115.0	85.0~113.1
#4		0.1	0.00581	0.101326	1.3			
#5		0.2	0.01140	0.198883	-0.6			
#6		0.5	0.02864	0.499756	0.0			
#7								
#8								
檢量線	確認 (ICV)	0.1	0.00601	0.104817	4.8	公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	查核1 (CCV)	0.1	0.00579	0.100977	1.0	重複% 0-15	85-115	85-115
	查核2 (CCV)							
	查核3 (CCV)							
	方法空白1	0	-0.00013	-0.002339		空白平均值	-0.0023	
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
	查核分析1	0.1	0.00613	0.106911		106.9		
	查核分析2					-	-	-

[illegible]

重複分析							
樣品編號	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	AxDF 樣品濃度	平均值 差異百分比
ET11SWG0474-001MS	0.00629			1.0	0.109703	0.109703	0.110401 1.3
ET11SWG0474-001MSD	0.00637			1.0	0.111099	0.111099	

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100% 註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

註3: "#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.07 DD附錄二-291

Phenol (FIA) 【B·C】 (NIEA W524) 【LIMS】 0407(DD)-塔P(2)

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期: 115.02.01
GC-1061~005
GC 9/10

分析方法: NIEA W532

TOC 分析報告表

分析項目: TOC 偵測極限: 0.090 分析人員: GC 分析日期: 115.04.08
儀器型號: 1030 O-I-Analytical-E 定量極限: 0.50 試藥面積: 529 審核人: 
線性公式: $Y=bX+a$ slope b= 3576.000 intercept a= 1214.000 截距濃度= 0.0679 r=0.9999
RF(ugC/cnt)= 0.0002796 Offset mass= 0.3394344 $r^2= 0.9998$

標準樣品#	濃度	X 質量(ug C)	Y 面積值	Xc 迴歸後質量	(Xc-X)/X*100 誤差%	RF	飲用水 重複% 5.6 QC樣品回收率% 89.0~109.1 添加分析回收率% 87.0~114.2
#1	0	0	646	-0.158813			
#2	0.5	2.50	10708	2.654522	6.2	21416.000	
#3	1	5.00	20625	5.427316	8.5	20625.000	
#4	2	10.00	35672	9.634457	-3.7	17836.000	
#5	4	20.00	72486	19.927651	-0.4	18121.500	
#6	7	35.00	125888	34.858850	-0.4	17984.000	
#7	10	50.00	180533	50.137592	0.3	18053.300	
#8							
#9							
總有機碳量(A)	-	20	71045	19.524748			
添加無機碳量(B)	-	20	71682	19.702853			
檢量線確認(ICV)	2	10	35768	9.661298	-3.4		添加無機碳 25 ug C
檢量線查核1(CCV)	2	10	36777	9.943415	-0.6		無機碳去除效率檢查
檢量線查核2(CCV)	2	10	37459	10.134102	1.3		99.3 (%)
檢量線查核3(CCV)		10					<< 需大於90% >>
體積校正值(V)	5.0	試藥	529	0.147908		RF平均值	★濃度A公式: m+V
		試藥+試劑水	-	0.339434	濃度	19005.967	公告 重複% 0~15
試劑水	空白1	-	1067	0.150425	0.0301	FR範圍	QC樣品回收% 80~120 添加分析回收% 75~125
	空白2	-	2155	0.454630	0.0909	13304.177	查核樣品回收率% 97.5 平均值/差異% 1.9802
查核分析1	2	10	36079	9.748254	1.9497	~ 24707.757	100.5 3.1
查核分析2	2	10	37170	10.053298	2.0107		

樣品分析	樣品編號	面積值	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	質量* (m)	濃度A	A×DF	待測物濃度	分析員確認值
ET115WG0474-001	45306				1.0	12.519650	2.5039	2.5039	2.5039	2.5
ET115WG0475-001	11431				1.0	3.048200	0.6096	0.6096	0.6096	0.6
ET115WG0508-001	12350				1.0	3.305152	0.6610	0.6610	0.6610	0.7
ET115WG0526-001	15770				1.0	4.261384	0.8523	0.8523	0.8523	0.9
ET115WG0523-001	68555				1.0	19.020070	3.8040	3.8040	3.8040	3.8
ET115WG0524-001	10815				1.0	2.875966	0.5752	0.5752	0.5752	0.6
ET115WG0529-001	34156				1.0	9.402110	1.8804	1.8804	1.8804	1.9
ET115WG0530-001	24223				1.0	6.624843	1.3250	1.3250	1.3250	1.3
ET115WG0550-004	161159				1.0	44.912148	8.9824	8.9824	8.9824	9.0
ET115WG0550-006	101095	5	250#	50.0		28.118254	5.6237	281.1850	281.1850	281

重複分析	樣品編號	面積值	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	質量* (m)	濃度A	A×DF	待測物濃度	平均值 \ 差異百分比
ET115WG0474-001	45306				1.0	12.519650	2.5039	2.5039	2.5039	2.5759
ET115WG0474-001D	47878				1.0	13.238781	2.6478	2.6478	2.6478	5.6
ET115WG0526-001	15770				1.0	4.261384	0.8523	0.8523	0.8523	0.8493
ET115WG0526-001D	15662				1.0	4.231187	0.8462	0.8462	0.8462	0.7

添加分析									
樣品編號	面積值	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0474-001	117912	2.5039	49	200	1	50	1.0	6.5641	102.8
ET115WG0526-001	90982	0.8523	49	200	1	50	1.0	5.0581	105.6

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2: "*"代表扣除試劑之質量, "#"表連續稀釋

註3: 添加回收率=(ExF-AxB)÷(Cx×D)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

☑樣品編號 ☑樣品數量 ☑稀釋倍數 ☑分析數值

數據繳交日期: 115.04.02

GC-1030(總有機碳)(W532)【LIMS】0408(GC)-塔L-P(3)

水 中 醛 類 品 管 樣 品 分 析 報 告

HPLC-A 分析儀器

检测方法:NIEA W782

[illegible]

濃度單位: mg/L

$$* \text{樣品濃度 (mg/L)} = \frac{\text{分析濃度 (}\mu\text{g/mL)} \times \text{萃取最終定體積 (mL)} \times \frac{1\text{mg}}{1000\text{ }\mu\text{g}}}{\text{萃取樣體積 (mL)} \times \frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}}} \times \text{CF} \times \text{稀釋倍數}$$

CF: 從衍生物濃度換算為醛化合物濃度之校正因子, 甲醛為0.143, 乙醛為0.196。

分析人員 DS 4/

查驗/審核人 張 4/10/16

公告:	查核回收%	添加回收%	差異百分比%
	70.0~130.0	60.0~140.0	25.0

水質半揮發性有機物分析報告

Units:mg/L

$$\text{*樣品濃度 (mg/L)} = \frac{\text{分折濃度 (}\mu\text{g/mL)} \times \text{萃取最終定置體積 (mL)} \times \frac{1\text{mg}}{1000\text{ }\mu\text{g}}}{1} \times \text{稀釋倍數}$$

$$\frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}} \times \text{萃取樣體積}(\text{mL}) \times$$

分析人員

查驗/審核人

26/11/26

水質半揮發性有機物分析品管報告

[illegible]

濃度單位: mg/L mg/kg (圖選一)

$$\text{*樣品濃度 (mg/L)} = \frac{\text{分析濃度 (}\mu\text{g/mL)} \times \text{萃取最終定暈體積 (mL)} \times \frac{1\text{mg}}{1000\text{ }\mu\text{g}}}{\text{萃取樣體積 (mL)} \times \frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}}} \times \text{稀釋倍數}$$


2000 ml

分析人員 TH

查驗/審核人 謝子/26

水中柴油總碳氫化合物分析報告表


最新確認日期：115.02.01

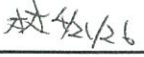案件編號： ET115WG0474, 0475 分析日期： 115. 04. 12 分析人員： DI 查驗/審核人： 

檢測方法： NIEA W802 儀器名稱： GC-H 定量極限： 0.050 mg/L 儀器記錄本編號： EQ48-40-39

PT16-256-32 DS-0407ext.

	Y	X	CF	Yc	(Yc-Y)/Y*100	GH1150412IC-B STDEV= 0.06292 AVG of CF= 4.45876 RSD of CF= 1.41118% 試樣分析注入量(uL)：1
標準樣品#	注入之質量(ng)	面積總和	校正因子	迴歸後重量 (ng)	誤差%	
#1	50	221.600 ✓	4.43	49.7	-0.6	
#2	100	453.915	4.54	101.8	1.8	
#3	200	895.535 ✓	4.48	200.8	0.4	
#4	500	2190.439	4.38	491.3	-1.7	
#5	1000	4405.834 ✓	4.41	988.1	-1.2	
#6	1500	6775.501	4.52	1519.6	1.3	
ICV	200	763.736 ✓	3.82	171.3	-14.4	地下水 QC樣品回收% 添加分析回收%
CCV 1	200	973.921	4.87	218.4	9.2	重複%:25.0 60.0~115.4 55.0~99.7
CCV 2	200	959.873 ✓	4.80	215.3	7.6	水質水量 QC樣品回收% 添加分析回收%
						重複%:25.0 60.0~125.0 55.0~119.0

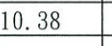查核分析	查核添加濃度 (mg/L)	面積	萃取液質量 (ng)	空白分析濃度(mg/L)		
方法空白1	0	46.273 ✓	10.38	0.010 		
				查核分析濃度(mg/L)	查核樣品回收率(%)	重複差異百分比(%)
查核分析1	0.2	654.913 ✓	146.9	0.147	73.4	

樣品分析								
樣品編號	取樣體積 V (mL)	試樣濃縮液之體積 V1	樣品萃取液稀釋倍數D	面積總和 A	試樣分析質量 (ng)	樣品濃度 (mg/L)	確認值(mg/L)	備註
ET115WG0474-001	1000	1.0	1	509.070	114.17	0.114 ✓	0.114 ✓	4
ET115WG0475-001	1000	1.0	1	240.634 ✓	53.97	0.054 ✓	0.054	4

重複分析							
樣品編號	取樣體積 (mL)	萃取液體積 (mL)	稀釋倍數 DF	面積總和	萃取液質量 (ng)	添加分析濃度C (mg/L)	相對差異百分比(%)
ET115WG0474-001MS	1000	10	1	1360.960	305.23	0.305	2.9
ET115WG0474-001MSD	1000	10	1	1322.288	296.56	0.297	

添加分析								
樣品編號	取樣體積B(mL)	試樣分析質量A(ng)	添加體積D (uL)	添加質量C (ng)	最終體積F(mL)	面積	添加分析質量E (ng)	添加回收率%
ET115WG0474-001MS	1000	114.17	1000	200	10	1360.960 ✓	305.2	95.5

註1:濃度單位: mg/L

註2:樣品濃度(mg/L)=(面積總和A*濃縮液體積V1*稀釋倍數D)/(平均感應因子CF*試樣分析注入量V2*萃取水樣之體積V)

註3:添加回收率%=[((添加分析濃度E-試樣濃縮液質量A))/(添加質量C)]*100

註4:樣品所含之碳氫化合物非屬典型柴油。

註5:檢測值為汽油後段之碳氫化合物。

註6:樣品中除柴油外尚含碳數高於柴油之碳氫化合物。

註7:檢測值為汽油後段及柴油中碳氫化合物之總和。



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第2頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 17、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (NIEA W313)
- 18、汞：水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
- 19、氯鹽：水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (NIEA W407)
- 20、氯化物：水中氯化物檢測方法—分光光度計法 (NIEA W410)
- 21、氯鹽(以F⁻計)：水中氯鹽檢測方法—氯選擇性電極法 (NIEA W413)
- 22、氯鹽(以F⁻計)：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 23、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 24、氯鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 25、硝酸鹽：水中陰離子檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 26、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法—比色法 (NIEA W418)
- 27、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (NIEA W430)
- 28、砷：水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 29、硝酸鹽：水中硝酸鹽及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (NIEA W436)
- 30、氨氮：水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (NIEA W437)
- 31、氨氮：水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (NIEA W448)
- 32、氯化物：水中氯化物檢測方法—線上分解/氣體擴散/流動注入分析法 (NIEA W468)
- 33、總酚：水中酚類檢測方法—比色法 (NIEA W520)
- 34、總酚：水中總酚檢測方法—分光光度計法 (NIEA W521)
- 35、總酚：水中酚類檢測方法—線上蒸餾/流動分析法 (NIEA W524)
- 36、總有機碳：水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 (NIEA W532)
- 37、大粒松：水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 38、巴拉松：水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)

(續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第3頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 39、達馬松：水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 40、加保扶：水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (NIEA W635)
- 41、巴拉列：水中巴拉列檢測方法—分光光度計法 (NIEA W641)
- 42、2,4-地：水中二、四-地檢測方法—氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W642)
- 43、毒殺芬：水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W653)
- 44、可氣丹：水中可氣丹檢測方法—氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W660)
- 45、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 46、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 47、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 48、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 49、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 50、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 51、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 52、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接地下水檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第4頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 53、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 54、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 55、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 56、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 57、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 58、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 59、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 60、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 61、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 62、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 63、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 64、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 65、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接地下水檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第5頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 66、順-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 67、茶：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 68、2,4,5-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 69、2,4,6-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 70、3,3'-二氯聯苯胺：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 71、五氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 72、總石油碳氫化合物：水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測器法 (NIEA W901)

(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部(改制前為行政院環境保護署)112年4月25日環署授檢字第1127103190號及113年4月18日環部授研字第1135105058號函辦理。



地下水樣品檢驗報告

樣品名稱：MW-2

樣品特性：無色/無味/無雜質

委 託 單 位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

採樣地點：MW-2

採樣單位：淇荃環保科技有限公司

採樣方法：NIEA W103.56B

檢 測 目 的：定檢申報

專案編號：KE115G40001

收樣日期：*

報告編號：KE115G4000105N(註3)

採樣日期：民國115年04月01日 13時55分~15時15分

報 告 日 期：民國115年04月24日

聯絡人：張意卿

[illegible]

聲 明 書

(一)茲保證本報告內容，自本實驗室收樣至報告出具之過程，以本公司人員最佳之專業知識，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。

備註: 1.檢測值低於方法定量極限以<定量極限表示。

2.本報告不得部份複製使用(但全份檢測報告複製除外)及作為宣傳廣告之用。

3.樣品並未進入檢驗室，測項皆為現場測項，故相關辨識之報告編號以專案編號取代。

4.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

公司名稱：淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：

杯采碧

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號



淇荃環保科技有限公司

CHI CHUAN Environmental Technology Co., Ltd

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第142號

地下水樣品檢驗報告

樣品編號(名稱)：KG4000107(MW-2)

行程代碼：KEUW26040001

樣品特性：無色/無味/無雜質

專案編號：KE115G40001

委託單位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

收樣日期：民國115年04月07日 08時30分

採樣地點：MW-2

報告編號：KG1154000107

採樣單位：淇荃環保科技有限公司
(環境部國環檢證字第142號)

採樣日期：民國115年04月01日 13時55分-15時15分

採樣方法：NIEA W103.56B

報告日期：民國115年04月24日

檢測目的：定檢申報

聯絡人：張意卿

檢測項目	單位	檢測值	檢測方法	備註	第2類地下水 監測標準	第2類地下水 管制標準
苯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.025	0.05
甲苯	mg/L	ND<0.00029	NIEA W785.58B	MDL=0.00029	5	10
二甲苯 ^{註1}	mg/L	ND<0.00073	NIEA W785.58B	MDL=0.00073	50	100
乙苯	mg/L	ND<0.00026	NIEA W785.58B	MDL=0.00026	3.5	7
氯苯	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.5	1
1,4-二氯苯	mg/L	ND<0.00026	NIEA W785.58B	MDL=0.00026	0.375	0.75
苯	mg/L	ND<0.00017	NIEA W785.58B	MDL=0.00017	0.2	0.4
氯甲烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.15	0.3
二氯甲烷	mg/L	ND<0.00025	NIEA W785.58B	MDL=0.00025	0.025	0.05
氯仿	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.5	1
1,1-二氯乙烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	4.25	8.5
1,2-二氯乙烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.025	0.05
1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND<0.00037	NIEA W785.58B	MDL=0.00037	0.025	0.05
氯乙烯	mg/L	ND<0.00032	NIEA W785.58B	MDL=0.00032	0.01	0.02
1,1-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00032	NIEA W785.58B	MDL=0.00032	0.035	0.07
順-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.35	0.7
反-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00030	NIEA W785.58B	MDL=0.00030	0.5	1
三氯乙烯	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.025	0.05
四氯乙烯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.025	0.05
四氯化碳	mg/L	ND<0.00040	NIEA W785.58B	MDL=0.00040	0.025	0.05
甲基第三丁基醚	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.5	1
1,2-二氯苯	mg/L	ND<0.00029	NIEA W785.58B	MDL=0.00029	3	6
1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND<0.00037	NIEA W785.58B	MDL=0.00037	1	2
以下空白						

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。

絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載

不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽屬於相關內部文件。

2.檢測值低於方法偵測極限以ND表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度值時，以<定量極限表示，並註明其實際檢測值。

3.本報告不得部份複製使用(但全份檢測報告複製除外)及作為宣傳廣告之用。

4.二甲苯測值係由間、對-二甲苯、鄰-二甲苯檢測值總和而得，若檢測值為ND時以MDL值加總；若檢測值小於檢量線最低濃度時，則以實際檢測值做加總。

5.檢測項目委由中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室執行分析，項目詳見檢驗報告附件。

委託單位案件編號：ET115WG0475。

6.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

公司名稱：淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：

林采慧

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號



淇荃環保科技有限公司

CHI CHUAN Environmental Technology Co., Ltd

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第142號

地下水樣品檢驗報告-附件

樣品編號(名稱)：KG4000107(MW-2)

行程代碼：KEUW26040001

樣品特性：無色/無味/無雜質

專案編號：KE115G40001

委託單位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

收樣日期：民國115年04月07日 08時30分

採樣地點：MW-2

報告編號：KG1154000107

採樣單位：淇荃環保科技有限公司
(環境部國環檢證字第142號)

採樣日期：民國115年04月01日 13時55分~15時15分

採樣方法：NIEA W103.56B

報告日期：民國115年04月24日

檢測目的：定檢申報

聯絡人：張意卿

序號	委外檢測項目	序號	委外檢測項目
1	總溶解固體物	25	2,4,5-三氯酚
2	總硬度	26	2,4,6-三氯酚
3	氯鹽	27	五氯酚
4	硫酸鹽	28	柴油總碳氫化合物
5	硫化物	29	氰化物
6	氨氮	30	甲醛
7	亞硝酸鹽氮	31	3,3'-二氯聯苯胺
8	硝酸鹽氮		以下空白
9	無機含氮量		
10	總含氮量		
11	氯鹽		
12	鎘		
13	鉻		
14	銅		
15	鎳		
16	鉛		
17	鋅		
18	汞		
19	砷		
20	鐵		
21	錳		
22	油脂		
23	總有機碳		
24	總酚		

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司


負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬全路349巷21-1號

備註：1.檢測項目委由中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室執行分析，委託單位案件編號：ET115WG0475。

2.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

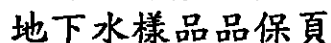

報告編號：KG1154000107

附錄二-304



淇荃環保科技有限公司

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

專案編號: K211564001

使用/校正日期: 1150401

使用人員: 張嘉明

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☐ WTW pH 3210 ☒ WTW pH 3310 ☐ HACH sensION	Sampling-W- <u>W8</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正		校正後確認	(pH= <u>7.0</u>) (pH= <u>7.0</u>)	斜率(mV/pH)
pH	☒ pH=7 ☒ pH=4 ☒ pH=10	實測值/溫度	<u>7.02/26.8</u>	-61~-56 mV/pH
溫度(°C)	<u>27.0</u> <u>27.2</u> <u>26.7</u>	理論值	<u>7.0</u>	<u>-56.1</u>
編號	<u>11311227~2</u> <u>11404301~2</u> <u>11404302~2</u>	編號	<u>11311227~2</u>	零點電位(mV)
分裝日期	<u>1150331</u> <u>1150331</u> <u>1150331</u>	分裝日期	<u>1150331</u>	-25mV~25mV <u>0.4</u>

※pH使用注意事項

1. 確認作業時, 需記錄確認buffer液之溫度及測值, 此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 3210 ☒ WTW Cond 3310	Sampling-W- <u>W23</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W203
0.01M KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
編號:	<u>11311227~2</u>	(μS/cm/25°C)	(°C)	(μS/cm/25°C)
分裝日期:	<u>1150331</u>	<u>1413</u>	<u>27.3</u>	<u>1406</u>
第二來源0.01M KCl標準溶液確認		標準值	溫度	儀器讀值
編號:	<u>11411241~2</u>	(μS/cm/25°C)	(°C)	(μS/cm/25°C)
分裝日期:	<u>1150331</u>	<u>1413</u>	<u>26.8</u>	<u>1406</u>
				0.01M KCl: 1399~1427

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 3210 ☒ WTW pH 3310	Sampling-W- <u>W9</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	-
標準溶液校正(mV)		實測值(mV)	理論值(mV)	合格參考值±10 mV
<u>220</u>		<u>222.4</u>	<u>220</u>	

校正標準液編號: 11411241~2 / 分裝日期: 1150331

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 3210 ☒ WTW Oxi 3310	Sampling-W- <u>W58</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	溶氧百分比(%)	斜率(0.7~1.25)	※斜率值0.6~0.7, 需更換電極填充液或清洗電極。
	<u>8.12 / 27.0</u>	<u>101.7</u>	<u>0.88</u>	

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前, 需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比(%)允收範圍100±3。

2. 量測時若為感潮河段或海域, 需輸入鹽度, 進行鹽度補償。

3. 電極檢查:

☐ 是 ☒ 否-電極內是否有氣泡。

☐ 是 ☒ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☒ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無皺痕。

☐ 是 ☒ 否-電極是否破損。

4. 量測儀器大氣壓力值比對:

☒ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar): 1015

標準件(mbar): 1014

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
濁度計	☒ WTW Turb 355IR	Sampling-W- <u>W5</u>	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W219
校正標準液(NTU)		實測值(NTU)	理論值(NTU)	合格參考值±1.0 %
<u>1000</u>		<u>998.8</u>	<u>1000</u>	
校正標準液編號: <u>1150303-1~1</u>				
採樣器材清洗: ☒ 是 ☐ 否-相關採樣器材清洗。				

審核人員: 張嘉明



淇荃環保科技有限公司

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號: K2115G4w/

採樣日期: 115年 04月 01日

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

採樣地點: 雲林縣

採樣人員: 林維度

井號: MW-2

實驗室編號: KQ4w/07

井篩深度: 4-8m

井位座標: E(X): 168119.45 N(Y): 2635065.048 (TWD 67 97)

資料來源: ☒ 監測井告示牌 ☐ 業主提供 ☐ 無

天候狀況: ☐ 晴天 ☒ 陰天 ☐ 雨天

環境描述: 監測井鎖扣是否完整: ☒ 是 ☐ 否 (現場情況描述: ☐ 井內積水 ☐ 無鎖頭 ☐ 其它)

洗井前水位量測: 1. 13:51, 1.885 m 2. 13:52, 1.885 m 3. 13:53, 1.886 m (水位變化±3cm)

洗井紀錄資料

洗井開始時間: 13時 55分; 洗井結束時間: 14時 17分

井管內徑: 2 (inch)	水位面至井口深度: 1.875 (m)	井底至井口深度: 7.940 (m)
井水深度: 6.065 (m)	井水體積: 12.130 (L)	泵進水口深度: 6.000 (m)
井篩長度: 4.000 (m)	水流元容積: 0.4 (L)	現場儀器量測頻率: 4 (min-次)

(1) 洗井方法: A. ☒ 微洗井-定量抽水 B. ☐ 井柱水體積置換法-定量抽水

C. ☐ 本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8), 將井水抽乾

(2) 洗井設備: ☒ 氣囊式抽水器 ☐ 貝勒管 ☐ 其他:

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度°C) ±0.1/±0.2°C	導電度 (μS/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 % 或 ±0.3	氧化還原電位 (mV) ±10 mV	濁度 (NTU) (註 1)	洗井水觀察 (水色、氣味、雜質)
(洗井前) 13:55	0.1	1.886	0.4	7.95/23.7	780	1.19	177.4	3.24	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 13:59	0.1	1.885	0.4	7.92/23.8	770	1.42	176.9	2.94	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:03	0.1	1.886	0.4	7.89/23.8	764	1.28	176.6	2.63	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:07	0.1	1.885	0.4	7.84/23.8	762	1.13	176.6	3.56	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:11	0.1	1.886	0.4	7.86/23.8	762	1.06	176.7	3.51	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:15	0.1	1.885	0.4	7.86/23.8	762	1.05	176.2	3.10	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) :									☐ 無色 ☐ 色 ☐ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☐ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(採樣) 14:17	0.1	1.886	0.24	7.84/23.8 7.86/23.8 °C	762 762	1.02	176.0	3.22	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁

汲出水總體積: 2.64 (L) 洗井結束時水位面至井口深度: 1.885 (m); 水位洩降 0.010 (m)

採樣資料【開始時間: 14時 17分, 結束時間: 14時 23分】

採樣器材: ☒ 同洗井設備 ☐ 貝勒管 ☐ 其他 採樣器放置深度: 7 (m)

附註: ☐ 採樣器放置深度由委託單位指定 (☐ 井篩中段 ☐ 水位下 米 ☐ 井底上 米 ☐ 其它:)

☐ 非標準井 (☐ 2吋簡易井; ☐ 其它形式:

☐ 井內含有不互溶有機液體 ☐ 井底有泥沙 ☒ 其它 總懸浮固體 = 0.14 mg/L

井水體積 (L): 2吋井: 2.0*井水深度 4吋井: 8.1*井水深度 井水體積 (L) = 0.51*直徑(吋)*直徑(吋)*井水深度(公尺)

註 1: 濁度 (NTU) > 20 為 ±10%, 20~5 為 ±2, 3 次低於 5 為穩定

審核人員: 張嘉明



淇荃環保科技有限公司

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號: KE11564001

採樣日期: 115年04月01日

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

採樣地點: 雲林縣

採樣人員: 林銘慶

井號: MW-2

實驗室編號: KG400107 井篩深度: 4m-8m

井位座標: E(X): 168779.015 N(Y): 2635065.048 (☒ TWD ☐ 67 ☐ 97 ☐)

資料來源: ☒ 監測井告示牌 ☐ 業主提供 ☐ 無

天候狀況: ☐ 晴天 ☒ 陰天 ☐ 雨天

環境描述: 監測井鎖扣是否完整: ☒ 是 ☐ 否 (現場情況描述: ☐ 井內積水 ☐ 無鎖頭 ☐ 其它)

洗井前水位量測: 1. 14:25, 1.890m 2. 14:26, 1.891m 3. 14:27, 1.890m (水位變化±3cm)

洗井紀錄資料

洗井開始時間: 14時27分; 洗井結束時間: 14時34分

井管內徑: <u>></u> (inch)	水位面至井口深度: <u>1.875</u> (m)	井底至井口深度: <u>7.940</u> (m)
井水深度: <u>6.065</u> (m)	井水體積: <u>12.130</u> (L)	泵進水口深度: <u>600</u> (m)
井篩長度: <u>4</u> (m)	水流元容積: <u>0.4</u> (L)	現場儀器量測頻率: <u>1</u> (min-次)

(1) 洗井方法: A. ☒ 微洗井-定量抽水 B. ☐ 井柱水體積置換法-定量抽水

C. ☐ 本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8), 將井水抽乾

(2) 洗井設備: ☒ 氣囊式抽水器 ☐ 貝勒管 ☐ 其他:

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.1/±0.2℃	導電度 (μS/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或 ±0.3	氧化還原電位(mV) ±10 mV	濁度 (NTU) (註1)	洗井水觀察 (水色、氣味、雜質)
(洗井前) 14:29	0.5	1.890	0.5	7.95/24.5	787	0.42	173.5	2.94	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:30	0.5	1.890	0.5	7.95/24.5	789	0.41	173.5	2.68	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:31	0.5	1.890	0.5	7.95/24.5	790	0.41	173.4	2.50	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:32	0.5	1.891	0.5	7.95/24.5	790	0.41	173.2	2.44	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:33	0.5	1.890	0.5	7.95/24.5	791	0.40	173.0	2.57	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:34	0.5	1.890	0.5	7.95/24.5	792	0.42	172.8	2.69	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) :									☐ 無色 ☐ 色 ☐ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☐ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(採樣) 14:36	0.5	1.890	10.75	7.95/24.5 7.95/24.5℃	793 793	0.41	173.0	2.43	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁

汲出水總體積: 13.75 (L) 洗井結束時水位面至井口深度: 1.890 (m); 水位洩降 0.015 (m)

採樣資料【開始時間: 14時36分, 結束時間: 15時15分】

採樣器材: ☐ 同洗井設備 ☐ 貝勒管 ☐ 其他 採樣器放置深度: X (m)

附註: ☐ 採樣器放置深度由委託單位指定 (☐ 井篩中段 ☐ 水位下 米 ☐ 井底上 米 ☐ 其它:)

☐ 非標準井 (☐ 2吋簡易井; ☐ 其它形式:

☐ 井內含有不互溶有機液體 ☐ 井底有泥沙 ☒ 其它 總餘氣: 0.14mg/L

井水體積(L): 2吋井: 2.0*井水深度 4吋井: 8.1*井水深度 井水體積 (L) = 0.51*直徑(吋)*直徑(吋)*井水深度(公尺)

註1: 濁度(NTU) > 20 為±10%, 20~5 為±2, 3次低於5為穩定

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
 檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 NIEA W785

檢驗員: 徐子揚
 驗算員: 李仁堂

* 檢量線製作日期: 115.03.25 分析日期: 115.04.07		STD		STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	RF	RF RSD(%)	初始檢量線確認		初始檢量線確認 D(%)
檢測項目	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	配製濃度	訊號強度	
氟苯(1S)	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	10.00	配製濃度	10	
Fluorobenzene	訊號強度	1457817	訊號強度	1532700	訊號強度	1579189	訊號強度	1601614	訊號強度	1641796	訊號強度	1498659	
1,2-二氯苯-d4(5S)	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	8.5%
1,2-Dichlorobenzene-d4	訊號強度	55049	訊號強度	251895	訊號強度	491110	訊號強度	974667	訊號強度	1876438	訊號強度	440625	
4-溴氟苯(5S)	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	12.8%
4-Bromofluorobenzene	訊號強度	46413	訊號強度	183096	訊號強度	386556	訊號強度	802772	訊號強度	1626700	訊號強度	339902	
二氯二氟甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	0.6%
Dichlorodifluoromethane	訊號強度	56123	訊號強度	282286	訊號強度	556103	訊號強度	1088158	訊號強度	2099237	訊號強度	525671	
氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-7.5%
Chloromethane	訊號強度	88431	訊號強度	448998	訊號強度	894718	訊號強度	1795570	訊號強度	3369181	訊號強度	912300	
氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-8.6%
Vinyl chloride	訊號強度	64317	訊號強度	328956	訊號強度	667699	訊號強度	1365295	訊號強度	2595353	訊號強度	688210	
溴甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-12.6%
Bromomethane	訊號強度	35154	訊號強度	181462	訊號強度	376915	訊號強度	758442	訊號強度	1479028	訊號強度	397773	
氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-3.6%
chloroethane	訊號強度	40319	訊號強度	194009	訊號強度	404956	訊號強度	814224	訊號強度	1535307	訊號強度	395750	
三氯一氟甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	2.4%
trichlorofluoromethane	訊號強度	72851	訊號強度	351752	訊號強度	726527	訊號強度	1466732	訊號強度	2843789	訊號強度	675362	
1,1-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-3.8%
1,1-dichloroethane	訊號強度	48264	訊號強度	230157	訊號強度	480958	訊號強度	952583	訊號強度	1860466	訊號強度	471697	
二氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-12.8%
methylene chloride	訊號強度	56511	訊號強度	323952	訊號強度	640704	訊號強度	1247441	訊號強度	2395960	訊號強度	666190	
反-1,2-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-5.4%
trans-1,2-dichloroethane	訊號強度	50056	訊號強度	254387	訊號強度	524248	訊號強度	1066583	訊號強度	2051383	訊號強度	521991	
甲基第三丁基醚	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-4.2%
Methyl tert-butyl ether	訊號強度	119626	訊號強度	567342	訊號強度	1214823	訊號強度	2483270	訊號強度	5116392	訊號強度	1213181	
1,1-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-2.7%
1,1-dichloroethane	訊號強度	103795	訊號強度	512832	訊號強度	1047119	訊號強度	2073382	訊號強度	4033714	訊號強度	1017894	
2,2-二氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-6.1%
2,2-dichloropropane	訊號強度	57641	訊號強度	279435	訊號強度	587205	訊號強度	1189321	訊號強度	2358561	訊號強度	592080	
順-1,2-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-4.5%
cis-1,2-dichloroethane	訊號強度	54080	訊號強度	263089	訊號強度	544120	訊號強度	1107579	訊號強度	2201794	訊號強度	544873	
溴氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-5.1%
bromochloromethane	訊號強度	26224	訊號強度	126177	訊號強度	263898	訊號強度	533882	訊號強度	1024252	訊號強度	262749	
氯仿	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-3.8%
chloroform	訊號強度	95951	訊號強度	483440	訊號強度	981679	訊號強度	1960516	訊號強度	3747534	訊號強度	962656	
1,1,1-三氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-5.1%
1,1,1-trichloroethane	訊號強度	70492	訊號強度	337771	訊號強度	705940	訊號強度	1433819	訊號強度	2798312	訊號強度	707205	
四氯化碳	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-4.4%
carbon tetrachloride	訊號強度	56442	訊號強度	272860	訊號強度	563249	訊號強度	1148539	訊號強度	2265728	訊號強度	564356	
1,1-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-3.7%
1,1-dichloropropene	訊號強度	55978	訊號強度	284618	訊號強度	607525	訊號強度	1280486	訊號強度	2566954	訊號強度	600220	
苯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-6.2%
benzene	訊號強度	173478	訊號強度	892836	訊號強度	1884852	訊號強度	3835645	訊號強度	7443759	訊號強度	1871543	
1,2-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-2.9%
1,2-dichloroethane	訊號強度	69388	訊號強度	345529	訊號強度	700677	訊號強度	1394681	訊號強度	2748370	訊號強度	685820	
三氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-2.3%
trichloroethylene	訊號強度	44785	訊號強度	225691	訊號強度	454250	訊號強度	927369	訊號強度	1810671	訊號強度	446071	
1,2-二氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-1.5%
1,2-dichloropropane	訊號強度	44670	訊號強度	219631	訊號強度	452249	訊號強度	923562	訊號強度	1864613	訊號強度	441540	
二溴甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-3.8%
dibromomethane	訊號強度	29689	訊號強度	143872	訊號強度	298313	訊號強度	589195	訊號強度	1165742	訊號強度	292946	
一溴二氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-4.1%
bromodichloromethane	訊號強度	55765	訊號強度	274965	訊號強度	572642	訊號強度	1161732	訊號強度	2356244	訊號強度	569722	
順-1,3-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-9.3%
cis-1,3-dichloropropene	訊號強度	41321	訊號強度	226486	訊號強度	483747	訊號強度	1022849	訊號強度	2235712	訊號強度	506116	
甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-6.7%
toluene	訊號強度	66766	訊號強度	361264	訊號強度	808116	訊號強度	1758999	訊號強度	3550203	訊號強度	809699	
反-1,3-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-2.7%
trans-1,3-dichloropropene	訊號強度	32721	訊號強度	161792	訊號強度	369584	訊號強度	789188	訊號強度	1683805	訊號強度	360906	
1,1,2-三氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-3.8%
1,1,2-trichloroethane	訊號強度	23128	訊號強度	123328	訊號強度	253373	訊號強度	509047	訊號強度	1030218	訊號強度	247634	
四氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	濃度值(ug/L)	5.00	濃度值(ug/L)	10.00	濃度值(ug/L)	20.00	濃度值(ug/L)	40.00	配製濃度	10	-2.5%
tetrachloroethylene	訊號強度	31697	訊號強度	159100	訊號強度	326980	訊號強度	676967	訊號強度	1338969	訊號強度	321653	

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 NIEA W785

檢驗員: 徐于嵐
驗算員: 李仁皇

* 檢驗線製作日期: 115.03.25 分析日期: 115.04.07		STD	STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	RF	RF RSD(%)	初始檢量線確認		初始檢量線確認 D(%)
檢測項目												
1,3-二氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.29	2.3%	配製濃度	10	
1,3-dichloropropane	訊號強度	41968	211311	451347	939327	1906963				訊號強度	462652	-7.7%
一氯二溴甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.19	1.6%	配製濃度	10	
1,1-dibromochloromethane	訊號強度	27931	142089	295676	611551	1262528				訊號強度	291272	-2.6%
1,2-二溴乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.15	4.0%	配製濃度	10	
1,2-dibromoethane	訊號強度	21454	109759	235288	499319	1034594				訊號強度	233716	-3.6%
氯苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.51	2.5%	配製濃度	10	
chlorobenzene	訊號強度	72674	379989	813147	1679665	3410445				訊號強度	806111	-5.3%
1,1,1,2-四氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.23	2.2%	配製濃度	10	
1,1,1,2-tetrachloroethane	訊號強度	33470	171205	360081	751962	1545238				訊號強度	355476	-3.0%
乙苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.88	10.4%	配製濃度	10	
ethylbenzene	訊號強度	111350	624757	1420197	3097527	6366115				訊號強度	1415216	-7.0%
間,對-二甲苯	濃度值(ug/L)	2.00	10.00	20.00	40.00	80.00		0.33	12.9%	配製濃度	20	
m,p-xylene	訊號強度	77440	493431	1105573	2391231	4772842				訊號強度	1092595	-8.9%
鄰-二甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.37	12.0%	配製濃度	10	
o-xylene	訊號強度	44242	266927	604386	1308743	2671129				訊號強度	593274	-7.0%
苯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.50	15.4%	配製濃度	10	
styrene	訊號強度	55772	363447	843774	1828753	3670656				訊號強度	824224	-9.1%
溴仿	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.10	3.6%	配製濃度	10	
bromofom	訊號強度	14540	75075	163155	337768	701151				訊號強度	142038	7.7%
異丙基苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		1.02	15.1%	配製濃度	10	
isopropylbenzene	訊號強度	113883	735147	1667588	3691933	7517610				訊號強度	1683468	-10.3%
1,1,2,2-四氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.26	4.1%	配製濃度	10	
1,1,2,2-tetrachloroethane	訊號強度	41340	202745	412953	828518	1682276				訊號強度	404296	-1.8%
溴苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.20	4.4%	配製濃度	10	
bromobenzene	訊號強度	26842	148795	316004	662730	1328864				訊號強度	314519	-6.2%
1,2,3-三氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.22	2.4%	配製濃度	10	
1,2,3-trichloropropane	訊號強度	33249	167230	348762	700650	1404824				訊號強度	348123	-5.6%
正丙基苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		1.16	13.2%	配製濃度	10	
n-propylbenzene	訊號強度	134396	850244	1907546	4163349	8355651				訊號強度	1895202	-8.8%
2-氯甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.74	9.4%	配製濃度	10	
2-chlorotoluene	訊號強度	90644	560019	1218342	2547302	5078316				訊號強度	1198326	-8.3%
1,3,5-三甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.90	16.6%	配製濃度	10	
1,3,5-trimethylbenzene	訊號強度	96272	663690	1518965	3300328	6602399				訊號強度	1539166	-13.5%
4-氯甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.66	10.0%	配製濃度	10	
4-chlorotoluene	訊號強度	79972	510101	1108117	2280535	4480984				訊號強度	1048048	-5.6%
1,1-二甲基乙基苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.75	11.3%	配製濃度	10	
tert-butylbenzene	訊號強度	97761	507656	1164182	2662003	5502582				訊號強度	1175086	-4.8%
1,2,4-三甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.90	15.2%	配製濃度	10	
1,2,4-trimethylbenzene	訊號強度	98173	677921	1526353	3249980	6443974				訊號強度	1497818	-10.5%
1-甲基丙基苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		1.13	17.0%	配製濃度	10	
sec-butylbenzene	訊號強度	119054	847450	1871192	4160637	8298108				訊號強度	1883153	-10.8%
1,3-二氯苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.42	1.9%	配製濃度	10	
1,3-dichlorobenzene	訊號強度	60009	323191	664797	1365361	2673609				訊號強度	638196	-2.0%
對-異丙基甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.92	17.0%	配製濃度	10	
p-isopropyltoluene	訊號強度	96001	688723	1540472	3363917	6684375				訊號強度	1579951	-14.6%
1,4-二氯苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.42	2.0%	配製濃度	10	
1,4-dichlorobenzene	訊號強度	60703	323580	659376	1341380	2635244				訊號強度	637624	-2.5%
正丁基苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.95	12.4%	配製濃度	10	
n-butylbenzene	訊號強度	110941	711676	1569816	3397714	6743349				訊號強度	1547324	-8.2%
1,2-二氯苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.46	2.0%	配製濃度	10	
1,2-dichlorobenzene	訊號強度	68092	358620	733606	1504429	2937744				訊號強度	733324	-5.6%
1,2-二溴-3-氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.05	9.4%	配製濃度	10	
1,2-dibromo-3-chloropropane	訊號強度	8164	35935	71231	146374	303808				訊號強度	69988	2.7%
1,2,4-三氯苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.33	2.6%	配製濃度	10	
1,2,4-trichlorobenzene	訊號強度	48978	245144	503485	1072166	2107350				訊號強度	507159	-3.8%
六氯丁二烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.17	4.2%	配製濃度	10	
Hexachlorobutadiene	訊號強度	22843	126589	260302	563690	1105225				訊號強度	256781	-3.1%
萘	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.71	6.0%	配製濃度	10	
Naphthalene	訊號強度	105052	498984	1097245	2420673	4923988				訊號強度	1099008	-2.6%
1,2,3-三氯苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00		0.34	4.3%	配製濃度	10	
1,2,3-trichlorobenzene	訊號強度	52823	263482	524284	1095460	2125881				訊號強度	534618	-4.7%

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕提/氣相層析質譜儀 NIEA W785

檢驗員: 徐子蔚
驗算員: 李仁皇

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8 分析日期: 115.04.07

樣品編號	檢驗項目	檢量線重核分析		檢量線重核分析		重核樣品分析		添加樣品分析		重核重覆分析		樣品重覆分析	
		1150407	.CCa	1150407	.CCb	1150407	.QC	KG4000104	.SK	1150407	.QCR	KG4000104	.SR
		分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	配製濃度 (ug/L)	分析濃度 (ug/L)	配製濃度 (ug/L)	分析濃度 (ug/L)	重複差異%	分析濃度 (ug/L)	重複差異%
1-氟苯 (IS)	分析濃度值 (ug/L)	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—
	訊號強度	1540825		1470607		1649866		1582545		1591608		1421481	
	回收率%	110.3		117.3		108.1		114.7		114.8		104.4472	
1,2-二氯苯-d4 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	11.03	10.0	11.73	10.0	10.81	10.0	583301	10.0	587221	10.0	477271	—
	訊號強度	546521		554631		573069		583301		587221		477271	
	回收率%	110.3		117.3		108.1		114.7		114.8		104.4472	
4-溴氯苯 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	10.32	10.0	11.10	10.0	9.76	10.0	10.35	10.0	10.31	10.0	8.27	—
	訊號強度	413390		424467		418828		426185		426839		305673	
	回收率%	103.2		111.0		97.6		103.5		103.1		82.6827	
氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	9.34	6.60	10.71	7.06	8.81	10.0	10.54	11.4	9.76	10.19	N.D.	—
	訊號強度	815273		891958		823643		945109		879915		0	
	RF / 回收率%	0.53		0.61		88.1		92.5		97.6		0	
氯乙烯	分析濃度值 (ug/L)	7.73	22.69	8.50	15.01	7.83	10.0	9.33	11.4	8.97	13.55	N.D.	—
	訊號強度	503788		528615		546636		624737		603965		0	
	RF / 回收率%	0.33		0.36		78.3		81.9		89.7		0	
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.26	2.63	11.30	13.00	10.17	10.0	12.02	11.4	11.44	11.76	N.D.	—
	訊號強度	479657		504068		508734		576885		552075		0	
	RF / 回收率%	0.31		0.34		101.7		105.4		114.4		0	
二氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	10.54	5.40	11.54	15.40	10.91	10.0	13.23	11.4	12.32	12.18	N.D.	—
	訊號強度	640009		668775		709299		824852		773005		0	
	RF / 回收率%	0.42		0.45		109.1		116.0		123.2		0	
反-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.32	3.20	10.86	8.59	10.12	10.0	12.21	11.4	11.32	11.24	N.D.	—
	訊號強度	525592		527801		551710		638681		595625		0	
	RF / 回收率%	0.34		0.36		101.2		107.1		113.2		0	
甲基第三丁基醚 (MTBE)	分析濃度值 (ug/L)	10.10	1.02	10.85	8.52	10.51	10.0	12.26	11.4	11.16	5.97	N.D.	—
	訊號強度	1209275		1239854		1347657		1507651		1380009		0	
	RF / 回收率%	0.78		0.84		105.1		107.6		111.6		0	
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.63	3.73	10.48	4.76	9.42	10.0	11.30	11.4	10.44	10.37	N.D.	—
	訊號強度	980702		1018573		1027010		1182534		1099051		0	
	RF / 回收率%	0.64		0.69		94.2		99.1		104.4		0	
順-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.72	2.78	10.44	4.35	9.88	10.0	11.83	11.4	11.14	11.91	N.D.	—
	訊號強度	521273		534009		567498		651622		616783		0	
	RF / 回收率%	0.34		0.36		98.8		103.8		111.4		0	
氯仿	分析濃度值 (ug/L)	9.96	0.35	10.78	7.84	9.79	10.0	11.93	11.4	11.05	12.11	N.D.	—
	訊號強度	949891		981178		999250		1168263		1088183		0	
	RF / 回收率%	0.62		0.67		97.9		104.7		110.5		0	
1,1,1-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.93	0.66	11.19	11.92	10.06	10.0	12.33	11.4	11.47	13.06	N.D.	—
	訊號強度	687265		739032		745615		875989		819806		0	
	RF / 回收率%	0.45		0.50		100.6		108.1		114.7		0	
四氯化碳	分析濃度值 (ug/L)	9.84	1.63	11.35	13.48	10.36	10.0	12.40	11.4	11.40	9.56	N.D.	—
	訊號強度	546698		601942		616496		707964		654447		0	
	RF / 回收率%	0.35		0.41		103.6		108.8		114.0		0	
苯	分析濃度值 (ug/L)	10.03	0.25	10.73	7.26	9.79	10.0	12.04	11.4	11.24	13.83	N.D.	—
	訊號強度	1816400		1854751		1898450		2240343		2103578		0	
	RF / 回收率%	1.18		1.26		97.9		105.6		112.4		0	
1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.54	4.56	10.11	1.08	9.44	10.0	11.38	11.4	10.20	7.73	N.D.	—
	訊號強度	654218		661315		692738		801373		721981		0	
	RF / 回收率%	0.42		0.45		94.4		99.8		102.0		0	
三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.77	2.25	10.49	4.86	9.39	10.0	11.53	11.4	10.70	13.03	N.D.	—
	訊號強度	438153		448611		450578		530856		495243		0	
	RF / 回收率%	0.28		0.31		93.9		101.1		107.0		0	
甲苯	分析濃度值 (ug/L)	10.72	7.25	11.34	13.39	10.60	10.0	13.10	11.4	11.95	11.98	N.D.	—
	訊號強度	836449		844020		885066		1049586		962637		0	
	RF / 回收率%	0.54		0.57		106.0		114.9		119.5		0	
1,1,2-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.24	12.36	11.68	16.76	10.77	10.0	13.49	11.4	12.08	11.51	N.D.	—
	訊號強度	275547		273291		282720		339866		306039		0	
	RF / 回收率%	0.18		0.19		107.7		118.4		120.8		0	
四氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.28	12.75	11.34	13.38	10.68	10.0	13.02	11.4	12.09	12.39	N.D.	—
	訊號強度	363908		349260		369055		431712		403037		0	
	RF / 回收率%	0.24		0.24		106.8		114.2		120.9		0	
氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.31	13.10	11.82	18.21	11.03	10.0	13.66	11.4	12.43	11.95	N.D.	—
	訊號強度	889793		887648		929205		1104124		1010307		0	
	RF / 回收率%	0.58		0.60		110.3		119.9		124.3		0	
乙苯	分析濃度值 (ug/L)	10.30	2.99	10.92	9.22	10.28	10.0	13.01	11.4	11.92	14.79	N.D.	—
	訊號強度	1401212		1418235		1496971		1817267		1674833		0	
	RF / 回收率%	0.91		0.96		102.8		114.1		119.2		0	
間,對-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	22.32	11.58	23.57	17.87	22.26	20.0	27.70	22.8	25.76	14.56	N.D.	—
	訊號強度	1151345		1160856		1229934		1468060		1372775		0	
	RF / 回收率%	0.37		0.39		111.3		121.5		128.8		0	
鄰-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	10.69	6.88	11.29	12.95	10.51	10.0	13.39	11.4	12.33	15.94	N.D.	—
	訊號強度	609272		614515		641688		784069		726228		0	
	RF / 回收率%	0.40		0.42		105.1		117.5		123.3		0	
1,4-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.30	13.03	12.00	20.02	11.46	10.0	13.89	11.4	12.60	9.46	N.D.	—
	訊號強度	723213		732910		784937		912672		832421		0	
	RF / 回收率%	0.47		0.50		114.6		121.8		126.0		0	
1,2-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.37	13.69	11.90	19.01	11.53	10.0	13.98	11.4	12.61	8.96	N.D.	—
	訊號強度	811605		810882		881149		1025351		929806		0	
	RF / 回收率%	0.53		0.55		115.3		122.7		126.1		0	
萘	分析濃度值 (ug/L)	9.87	1.32	10.28	2.82	10.83	10.0	12.95	11.4	11.38	4.95	N.D.	—
	訊號強度	1086235		1080265		1276875		1463625		1294259		0	
	RF / 回收率%	0.70		0.73		108.3		113.6		113.8		0	

4/13

IS範圍上下限:

分析日期: 115.04.07

檢測項目	樣品編號	檢量線重複分析		檢量線重複分析		重複樣品分析		添加樣品分析		重複樣品分析		樣品重複分析	
		1150407 .CCc	分析濃度 (ug/L)	1150407 .CCd	分析濃度 (ug/L)	1150407 .QC	配製濃度 (ug/L)	1150407 .SK	配製濃度 (ug/L)	1150407 .QCR	重複差異%	1150407 .SR	重複差異%
氯苯 (IS)	分析濃度值 (ug/L)	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	
1-fluorobenzene	訊號強度	1420578											
1,2-二氯苯-d4 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	11.47											
1,2-Dichlorobenzene-d4	訊號強度	523660	10.0										
	回收率%	114.7											
4-溴氯苯 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	10.70											
4-Bromochlorobenzene	訊號強度	395245	10.0										
	回收率%	107.0											
氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	10.41											
Chloromethane	訊號強度	838049	4.13										
	RF / 回收率%	0.59											
氯乙烯	分析濃度值 (ug/L)	10.01											
Vinyl chloride	訊號強度	601347	0.09										
	RF / 回收率%	0.42											
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.35											
1,1-dichloroethane	訊號強度	488979	13.48										
	RF / 回收率%	0.34											
二氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	11.25											
methylene chloride	訊號強度	630059	12.55										
	RF / 回收率%	0.44											
反-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.99											
trans-1,2-dichloroethane	訊號強度	515816	9.86										
	RF / 回收率%	0.36											
甲基第三丁基醚 (MTBE)	分析濃度值 (ug/L)	10.30											
Methyl tert-butyl ether	訊號強度	1136718	3.00										
	RF / 回收率%	0.80											
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.51											
1,1-dichloroethane	訊號強度	987288	5.12										
	RF / 回收率%	0.69											
順-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.28											
cis-1,2-dichloroethane	訊號強度	508355	2.84										
	RF / 回收率%	0.36											
氯仿	分析濃度值 (ug/L)	10.60											
chloroform	訊號強度	931564	6.00										
	RF / 回收率%	0.66											
1,1,1-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.06											
1,1,1-trichloroethane	訊號強度	705726	10.64										
	RF / 回收率%	0.50											
四氯化碳	分析濃度值 (ug/L)	11.12											
carbon tetrachloride	訊號強度	569732	11.19										
	RF / 回收率%	0.40											
苯	分析濃度值 (ug/L)	10.50											
benzene	訊號強度	1753428	4.97										
	RF / 回收率%	1.23											
1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.86											
1,2-dichloroethane	訊號強度	622900	1.44										
	RF / 回收率%	0.44											
三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.35											
trichloroethylene	訊號強度	427892	3.54										
	RF / 回收率%	0.30											
甲苯	分析濃度值 (ug/L)	11.15											
toluene	訊號強度	801606	11.48										
	RF / 回收率%	0.56											
1,1,2-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.35											
1,1,2-trichloroethane	訊號強度	256600	13.49										
	RF / 回收率%	0.18											
四氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	11.68											
tetrachloroethylene	訊號強度	347421	16.76										
	RF / 回收率%	0.24											
氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.54											
chlorobenzene	訊號強度	836954	15.39										
	RF / 回收率%	0.59											
乙苯	分析濃度值 (ug/L)	10.60											
ethylbenzene	訊號強度	1329956	6.03										
	RF / 回收率%	0.94											
間,對-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	23.21											
m,p-xylene	訊號強度	1104118	16.06										
	RF / 回收率%	0.39											
鄰-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	11.20											
o-xylene	訊號強度	588676	12.01										
	RF / 回收率%	0.41											
1,4-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.75											
1,4-dichlorobenzene	訊號強度	693061	17.49										
	RF / 回收率%	0.49											
1,2-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.79											
1,2-dichlorobenzene	訊號強度	776211	17.93										
	RF / 回收率%	0.55											
萘	分析濃度值 (ug/L)	9.71											
Naphthalene	訊號強度	984945	2.95										
	RF / 回收率%	0.69											

分析日期: 115.04.07

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

檢測項目		樣品編號	1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201										
取樣體積 (ml)		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
稀釋倍數		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
氟苯(1S) 1-fluorobenzene	分析濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00										
	訊號強度	1476482	1431896	1364965	1382492	1352622	1372229	1357813											
4-溴氟苯(SS) 4-Bromofluorobenzene	分析濃度值(ug/L)	8.03	8.37	8.27	8.51	8.35	8.53	8.42											
	訊號強度	308442	311580	293706	306045	293727	304535	297204											
	添加濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00											
	回收率(%)	80.3	83.7	82.7	85.1	83.5	85.3	84.2											
1,2-二氯苯-d4(SS) 1,2-Dichlorobenzene-d4	分析濃度值(ug/L)	9.35	10.45	10.18	10.88	10.58	10.90	10.87											
	訊號強度	443876	481205	446603	483673	460040	480602	474384											
	添加濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00											
	回收率(%)	93.5	104.5	101.8	108.8	105.8	109.0	108.7											
二氯二氟甲烷 Dichlorodifluoromethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
氯甲烷 Chloromethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
氯乙烯 Vinyl chloride	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
溴甲烷 Bromomethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
氯乙烷 chloroethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
三氯一氟甲烷 trichlorofluoromethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane	分析濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100											
	訊號強度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.											
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0											
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

分析日期: 115.04.07

檢測項目	樣品編號	1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201												
取樣體積 (ml)		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0												
稀釋倍數		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0												
二氯甲烷 methylene chloride	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
反-1,2-二氯乙烯 trans-1,2-dichloroethene	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
trans-1,2-dichloroethene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
甲基第三基醚 Methyl tert-butyl ether	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
2,2-二氯丙烷 2,2-dichloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
順-1,2-二氯乙烯 cis-1,2-dichloroethene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
順-1,2-二氯乙烯 cis-1,2-dichloroethene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
溴氯甲烷 bromochloromethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
氯仿 chloroform	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
1,1,1-三氯乙烯 1,1,1-trichloroethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												
四氯化碳 carbon tetrachloride	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
1,1-二氯丙烯 1,1-dichloropropene	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.												
1,1-二氯丙烯 1,1-dichloropropene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0												
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100												

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W185

檢驗員:

驗算員:

檢驗項目		樣品編號	IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8										分析日期: 115.04.07	
取樣體積 (ml)			1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201					
稀釋倍數			5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0					
苯 benzene *	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
1,2-二氯乙烷 1,2-dichloroethane *	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
三氯乙烯 trichloroethylene *	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
1,2-二氯丙烷 1,2-dichloropropane	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
二溴甲烷 dibromomethane	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
一溴二氯甲烷 bromodichloromethane	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
順-1,3-二氯丙烯 cis-1,3-dichloropropene	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
甲苯 toluene *	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
反-1,3-二氯丙烯 trans-1,3-dichloropropene	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-trichloroethane *	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					
四氯乙烯 tetrachloroethylene *	記錄強度	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.					
		記錄強度	0	0	0	0	0	0	0					

分析日期: 115.04.07

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

檢測項目	樣品編號	IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8									
		1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201			
1,3-二氯丙烷 1,3-dichloropropane	取樣體積 (ml)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0			
	稀釋倍數	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
一氯二溴甲烷 dibromochloromethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
1,2-二溴乙烷 1,2-dibromomethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
氯苯 chlorobenzene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,1,2-tetrachloroethane	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
乙苯 ethylbenzene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
間,對-二甲苯 m,p-xylene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
鄰-二甲苯 o-xylene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
苯乙烯 styrene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
溴仿 bromoform	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
異丙基苯 isopropylbenzene	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(ug/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W785

檢驗員:

徐子嵐

驗算員:

李仁堂

IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8

分析日期: 115.04.07

檢測項目	樣品編號	1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201										
取樣體積 (ml)		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
稀釋倍數		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-tetrachloroethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
溴苯 bromobenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-trichloropropane	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
正丙基苯 n-propylbenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
2-氯甲苯 2-chlorotoluene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
1,3,5-三甲基苯 1,3,5-trimethylbenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
4-氯甲苯 4-chlorotoluene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
1,1-二甲基乙基苯 tert-butylbenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
1,2,4-三甲基苯 1,2,4-trimethylbenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
1-甲基丙基苯 sec-butylbenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										
1,3-二氯苯 1,3-dichlorobenzene	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100										
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.										
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0										

4/3

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W185

檢驗員: 徐子蘭

驗算員: 李仁望

分析日期: 115.04.07

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

檢測項目	樣品編號	IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8									
		1150407-BK	KG4000104	KG4000107	KG4000204	KG4000207	KG4000101	KG4000201			
取樣體積 (ml)	稀釋倍數	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0			
		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
對-異丙基甲苯 p-isopropyltoluene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
1,4-二氯苯 1,4-dichlorobenzene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
正丁基苯 n-butylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
1,2-二氯苯 1,2-dichlorobenzene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
1,2-二溴-3-氯丙烷 1,2-dibromo-3-chloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			
萘 Naphthalene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
1,2,3-三氯苯 1,2,3-trichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0			
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100			

* 註: 實際濃度值(mg/L) = 分析濃度值(ug/L) × 稀釋倍數 / 1000

揮發性有機化合物檢驗記錄表-定性判定
檢測方法：吹氣捕集/氣相層析質譜法 NIEA W785

檢驗員：徐子貴
日期：2021年11月13日

分析方法：NIEA W785

檢測項目	樣品編號	11503.25 檢量線		1150407_CCB		1150407_BK		KG4000104		KG4000107		KG4000204		KG4000207		KG4000101		KG4000201		樣品RT		樣品RT		樣品RT		樣品RT		樣品RT	
		15.476	15.536	15.506	15.506	15.506	15.506	15.506	15.506	15.508	15.508	15.506	15.506	15.508	15.508	15.504	15.504	15.509	15.509	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
氟苯(S)	Fluorobenzene	24.879	24.899	24.869	24.872	24.872	24.872	24.868	24.871	24.871	24.871	24.873	24.873	24.871	24.871	24.872	24.872	24.873	24.873	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
4-溴氟苯(S)	4-Bromofluorobenzene	27.946	28.006	27.974	27.974	27.974	27.976	27.976	27.976	27.976	27.976	27.975	27.975	27.976	27.976	27.976	27.976	27.976	27.976	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,2-二氯乙烷-44(S)	1,2-Dichloroethane-44	3.732	3.792	3.763	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
二氯二氟甲烷	Dichlorodifluoromethane	4.237	4.297	4.267	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
氯甲烷	Chloromethane	4.560	4.620	4.589	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
溴甲烷	Bromomethane	5.536	5.596	5.566	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
氯乙烷	Chloroethane	5.829	5.889	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	5.859	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
三氯一氟甲烷	Trichlorofluoromethane	6.569	6.629	6.595	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethane	8.004	8.064	8.033	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	8.034	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
二氯甲烷	Methylene chloride	9.335	9.395	9.367	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
反-1,2-二氯乙烷	trans-1,2-Dichloroethane	10.043	10.103	10.073	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	10.072	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
甲基第三丁基醚	Methyl-1-butyl ether	10.061	10.121	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethane	11.135	11.195	11.166	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
2,2-二氯丙烷	2,2-Dichloropropane	12.593	12.653	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	12.622	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
順-1,2-二氯乙烷	cis-1,2-Dichloroethane	12.608	12.668	12.639	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	12.636	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
溴氯甲烷	Bromochloromethane	13.206	13.266	13.238	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	13.236	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
氯仿	Chloroform	13.408	13.468	13.438	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-Trichloroethane	13.851	13.911	13.880	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	13.877	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
四氯化碳	Carbon tetrachloride	14.252	14.312	14.283	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	14.279	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,1-二氯丙烷	1,1-Dichloropropane	14.260	14.320	14.289	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	14.287	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
苯	Benzene	14.792	14.852	14.824	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane	14.843	14.903	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	14.874	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
三氯乙烷	Trichloroethane	16.385	16.445	16.414	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	16.412	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	16.949	17.009	16.979	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	16.978	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
二溴甲烷	Dibromomethane	17.236	17.296	17.263	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
一溴二氯甲烷	Bromodichloromethane	17.601	17.661	17.630	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	17.628	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
順-1,3-二氯丙烷	cis-1,3-Dichloropropene	18.640	18.700	18.669	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	18.671	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
甲苯	Toluene	19.393	19.453	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	19.423	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
反-1,3-二氯丙烷	trans-1,3-Dichloropropene	19.892	19.952	19.920	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	19.919	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT

審核: 43

徐子周
徐子周
徐子周

揮發性有機化合物檢驗記錄表-定性判定
檢測方法：吹氣捕集/氣相層析質譜法 NIEA W785

瑞泰環境科技股份有限公司

检测项目	样品编号	11500.25 微量柱		1150407.CCB		1150407-BK		KG4000104		KG4000107		KG4000204		KG4000207		KG4000101		KG4000201		样品RT		样品RT		样品RT		样品RT	
		20.03min	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT	样品RT
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-Trichloroethane	20.300 ~ 20.360	20.331	20.328	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
四氯乙烷	Tetrachloroethane	20.601 ~ 20.661	20.630	20.632	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,3-二氯丙烷	1,3-Dichloropropane	20.674 ~ 20.734	20.703	20.702	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二溴甲烷	Dibromochloromethane	21.164 ~ 21.224	21.195	21.194	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二溴乙烷	1,2-Dibromomethane	21.431 ~ 21.491	21.459	21.461	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氯苯	Chlorobenzene	22.462 ~ 22.522	22.491	22.491	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,1,2-Tetrachloroethane	22.623 ~ 22.683	22.653	22.654	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
乙苯	Ethylbenzene	22.674 ~ 22.734	22.703	22.703	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
间,1,2-二甲苯	m-Xylene & p-Xylene	22.916 ~ 22.976	22.946	22.945	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
邻-二甲苯	o-Xylene	23.752 ~ 23.812	23.784	23.784	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
苯乙烯	Styrene	23.782 ~ 23.842	23.813	23.811	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
溴仿	Bromoform	24.193 ~ 24.253	24.221	24.224	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
异丙基苯	Isopropylbenzene	24.502 ~ 24.562	24.533	24.533	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethane	25.120 ~ 25.180	25.150	25.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
溴苯	Bromobenzene	25.167 ~ 25.227	25.196	25.197	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	25.225 ~ 25.285	25.255	25.255	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
正丙基苯	n-Propylbenzene	25.343 ~ 25.403	25.374	25.374	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2-氯甲苯	2-Chlorotoluene	25.544 ~ 25.604	25.575	25.574	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,3,5-三甲基苯	1,3,5-Trimethylbenzene	25.689 ~ 25.749	25.719	25.719	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4-氯甲苯	4-Chlorotoluene	25.763 ~ 25.823	25.794	25.792	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1-二甲苯乙基苯	tert-Butylbenzene	26.359 ~ 26.419	26.390	26.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,4-三甲苯	1,2,4-Trimethylbenzene	26.455 ~ 26.515	26.484	26.485	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1-甲基丙基苯	sec-Butylbenzene	26.798 ~ 26.858	26.828	26.828	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,3-二氯苯	1,3-Dichlorobenzene	27.054 ~ 27.114	27.085	27.083	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
对-异丙基苯	p-Isopropyltoluene	27.075 ~ 27.135	27.107	27.105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	27.229 ~ 27.289	27.259	27.259	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
正丁基苯	n-Butylbenzene	27.895 ~ 27.955	27.925	27.925	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二氯苯	1,2-Dichlorobenzene	27.984 ~ 28.044	28.014	28.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二氯-3-氯丙烷	1,2-Dichloro-3-chloropropane	29.523 ~ 29.583	29.554	29.549	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,4-三氯苯	1,2,4-Trichlorobenzene	31.129 ~ 31.189	31.159	31.158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
六氯丁二烯	Hexachlorobutadiene	31.431 ~ 31.491	31.461	31.461	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
萘	Naphthalene	31.649 ~ 31.709	31.679	31.681	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,3-三氯苯	1,2,3-Trichlorobenzene	32.147 ~ 32.207	32.176	32.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

13

03-12

分析方法：NIEA W785

[illegible]


附錄二-321

樣品編號: KG4000104

認證	序號	品保樣品名稱		壺拔樣品分析結果			添加樣品分析結果			重複品管核分析結果			重複樣品分析結果							
				檢驗項目	檢驗方法	配製值 (μg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg/L)	回收量 (μg/L)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (μg/L)	分析濃度2 (μg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準	分析濃度1 (μg/L)	分析濃度2 (μg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
*	1	氯甲烷			10.0	88.1	75~125%	11.4	10.5	92.5	65~135%	8.8	9.8	10.2	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	2	氯乙烷			10.0	78.3	75~125%	11.4	9.3	81.9	65~135%	7.8	9.0	13.5	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	3	1,1-二氯乙烷			10.0	101.7	75~125%	11.4	12.0	105.4	65~135%	10.2	11.4	11.8	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	4	二氯甲烷			10.0	109.1	75~125%	11.4	13.2	116.0	65~135%	10.9	12.3	12.2	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	5	反-1,2-二氯乙烷			10.0	101.2	75~125%	11.4	12.2	107.1	65~135%	10.1	11.3	11.2	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	6	甲基第三丁基醚			10.0	105.1	75~125%	11.4	12.3	107.6	65~135%	10.5	11.2	6.0	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	7	1,1-二氯乙烷			10.0	94.2	75~125%	11.4	11.3	99.1	65~135%	9.4	10.4	10.4	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	8	順-1,2-二氯乙烷			10.0	98.8	75~125%	11.4	11.8	103.8	65~135%	9.9	11.1	11.9	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	9	氯仿			10.0	97.9	75~125%	11.4	11.9	104.7	65~135%	9.8	11.1	12.1	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	10	1,1,1-三氯乙烷			10.0	100.6	75~125%	11.4	12.3	108.1	65~135%	10.1	11.5	13.1	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	11	四氯化碳			10.0	103.6	75~125%	11.4	12.4	108.8	65~135%	10.4	11.4	9.6	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	12	苯			10.0	97.9	75~125%	11.4	12.0	105.6	65~135%	9.8	11.2	13.8	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	13	1,2-二氯乙烷			10.0	94.4	75~125%	11.4	11.4	99.8	65~135%	9.4	10.2	7.7	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	14	三氯乙烷			10.0	93.9	75~125%	11.4	11.5	101.1	65~135%	9.4	10.7	13.0	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	15	甲苯			10.0	106.0	75~125%	11.4	13.1	114.9	65~135%	10.6	11.9	12.0	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	16	1,1,2-三氯乙烷			10.0	107.7	75~125%	11.4	13.5	118.4	65~135%	10.8	12.1	11.5	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	17	四氯乙烷			10.0	106.8	75~125%	11.4	13.0	114.2	65~135%	10.7	12.1	12.4	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	18	氯苯			10.0	110.3	75~125%	11.4	13.7	119.9	65~135%	11.0	12.4	11.9	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	19	乙苯			10.0	102.8	75~125%	11.4	13.0	114.1	65~135%	10.3	11.9	14.8	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	20	間對二甲苯			20.0	111.3	75~125%	22.8	27.7	121.5	65~135%	22.3	25.8	14.6	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	21	鄰二甲苯			10.0	105.1	75~125%	11.4	13.4	117.5	65~135%	10.5	12.3	15.9	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	22	1,4-二氯苯			10.0	114.6	75~125%	11.4	13.9	121.8	65~135%	11.5	12.6	9.5	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	23	1,2-二氯苯			10.0	115.3	75~125%	11.4	14.0	122.7	65~135%	11.5	12.6	9.0	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
*	24	蔡			10.0	108.3	75~125%	11.4	12.9	113.6	65~135%	10.8	11.4	4.9	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
		以下空白																		

淇 荃 環 保 科 技 有 限 公 司

採樣現場記錄—照片說明表

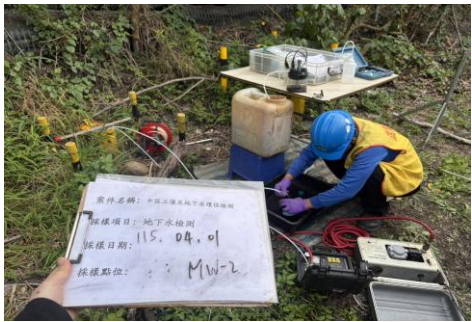			
說明:	MW-2(採樣前)(東)	說明:	MW-2(採樣前)(西)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-2(採樣前)(南)	說明:	MW-2(採樣前)(北)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-2(採樣中)	說明:	MW-2(採樣後)(水位計)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-2(水流元)	說明:	MW-2(井牌)
日期:	115.04.01	日期:	115.04.01
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
		頁次	1/1




環境部 環境檢驗測定機構許可證

環境部國環檢證字第142號

淇荃環保科技有限公司經本部依「環境
檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發
此證。

本證有效期限自114年02月26日至
119年02月25日止

許可證內容詳見副頁

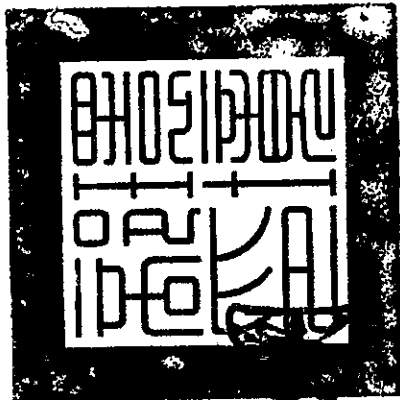

部長彭啓

中華民國114年3月4日



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號
第1頁共3頁

檢驗室名稱：淇荃環保科技有限公司

檢驗室地址：高雄市大社區萬金路349巷21-1號

檢驗室主管：林采慧

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法 (NIEA W103)
- 2、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 3、1,1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 4、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 5、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 6、1,1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 7、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 8、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 9、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 10、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 11、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 12、三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 13、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 14、四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(填註地下水檢測類別副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號

第2頁共3頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 15、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 16、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 17、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 18、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 19、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 20、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 21、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 22、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 23、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)



(續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號

第3頁共3頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 24、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部114年2月5日環部授研字第1145101132號函辦理。





中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第020號

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1 TEL: 07-8152248 FAX: 07-8152250

地下水樣品檢測報告

報告序號: ET115WG0475

行程代碼: KEUW26040001

檢驗室名稱: 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4000107(MW-2)

樣品特性: 地下水

樣品編號: ET115WG0475-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

檢測目的: 定檢申報

採樣地點: MW-2

採樣時間: 115/04/01 15:10

採樣結束: 115/04/01 15:10

收樣時間: 115/04/02 09:53

報告日期: 115/04/22

案件編號: ET115WG0475

採樣方法: NIEA W103.56B

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	監測標準	管制標準
總溶解固體物	828	mg/L	NIEA W210.58A		1250	-
總硬度	331	CaCO ₃ mg/L	NIEA W208.51A		750	-
氯鹽	148	mg/L	NIEA W415.54B		625	-
硫酸鹽	131	mg/L	NIEA W415.54B		625	-
氨氮	0.37	mg/L	NIEA W437.52C		-	0.25
亞硝酸鹽氮	ND(<0.00017)	mg/L	NIEA W418.54C	MDL=0.00017	5	10
硝酸鹽氮	<0.05(0.03)	mg/L	NIEA W436.53C		50	100
氟鹽(以F-計)	0.32	mg/L	NIEA W415.54B		4.0	8.0
鎘	ND(<0.00035)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00035	0.025	0.050
鉻	ND(<0.00044)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00044	0.25	0.50
銅	0.023	mg/L	NIEA W311.54C		5.0	10
鎳	<0.005(0.001)	mg/L	NIEA W311.54C		0.5	1.0
鉛	0.006	mg/L	NIEA W311.54C		0.05	0.10
鋅	0.049	mg/L	NIEA W311.54C		25	50
汞	ND(<0.000094)	mg/L	NIEA W330.52A	MDL=0.000094	-	0.020
砷	<0.0010(0.0009)	mg/L	NIEA W434.54B		-	0.50
鐵	0.040	mg/L	NIEA W311.54C		1.5	-
錳	0.114	mg/L	NIEA W311.54C		0.25	-
總有機碳	0.6	mg/L	NIEA W532.53C		10	-
總酚	ND(<0.0033)	mg/L	NIEA W524.50C	MDL=0.0033	0.14	-



中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第020號

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1 TEL: 07-8152248 FAX: 07-8152250

地下水樣品檢測報告

報告序號: ET115WG0475

行程代碼: KEUW26040001

檢驗室名稱: 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4000107(MW-2)

樣品特性: 地下水

樣品編號: ET115WG0475-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

檢測目的: 定檢申報

採樣地點: MW-2

採樣時間: 115/04/01 15:10

採樣結束: 115/04/01 15:10

收樣時間: 115/04/02 09:53

報告日期: 115/04/22

案件編號: ET115WG0475

採樣方法: NIEA W103.56B

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	監測標準	管制標準
氰化物	ND(<0.0019)	mg/L	NIEA W468.50C	MDL=0.0019	0.25	0.50
2, 4, 5-三氯酚	ND(<0.00043)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00043	1.85	3.7
2, 4, 6-三氯酚	ND(<0.00046)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00046	0.05	0.1
五氯酚	ND(<0.00041)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00041	0.04	0.08
3, 3'-二氯聯苯胺	ND(<0.00044)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00044	0.05	0.1
以下空白						
<p>備註:</p> <p>1. 本報告已由環境部核可之報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下: 空氣採樣類: 蘇明民(ETA-05)、黃任昶(ETA-06)、王仲龍(ETA-07)、鄭昇賢(ETA-09)、蔡智淵(ETA-10) 無機檢測類: 簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05)、沈桂嬌(ETI-07)、游心怡(ETI-08) 無機檢測類: 李苑如(ETI-09)、黃鳳君(ETI-10) 有機檢測類: 施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)、卓杏花(ETO-06)</p> <p>2. 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限×稀釋倍數)。</p> <p>3. 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間, 分析結果以"<定量極限×稀釋倍數"表示。</p> <p>4. 本樣品係由客戶自行送樣, 樣品基本資料均為客戶提供, 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。</p> <p>聲明書:</p> <p>(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 除政府機關所為之行政處分及刑事處罰外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。</p> <p>(二)吾人瞭解如本報告係由本機關委託從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 將受最嚴厲之法律制裁。</p>						
負責人: 			檢驗室主管:  			



中環科技事業股份有限公司

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1

TEL: 07-8152248 FAX: 07-8152250

報告序號: ET115WG0475

地下水樣品檢測報告

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4000107(MW-2)

樣品編號: ET115WG0475-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

採樣地點: MW-2

採樣時間: 115/04/01 15:10

收樣時間: 115/04/02 09:53

報告日期: 115/04/22

案件編號: ET115WG0475

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	監測標準	管制標準
硫化物	ND(<0.0056)	mg/L	NIEA W433.52A	MDL=0.0056	-	-
無機含氮量	<0.40(0.40)	mg/L	NIEA W418.54C NIEA W436.53C NIEA W437.52C		-	-
總含氮量	<0.50(0.35)	mg/L	NIEA W439.50C		-	-
油脂(正己烷抽出物)	ND(<2.0)	mg/L	NIEA W505.54B	MDL=2.0	-	-
柴油總碳氫化合物	0.054	mg/L	NIEA W802.51B		-	-
甲醛	<0.0286 (0.00649)	mg/L	NIEA W782.52B		-	-

以下空白

備註:

1. 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示, 並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限×稀釋倍數)。
2. 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間, 分析結果以"<定量極限×稀釋倍數"表示。
3. 本樣品係由客戶自行送來, 樣品基本資料均為客戶提供, 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



負責人:



檢驗室主管:

林曉如



中環科技事業股份有限公司
液體樣品容量法分析報告表(滴定法)

最新確認日期: 115.02.01

44-453-026.027

4/5 (AH)

分析方法: NIEA W208

分析項目: Hardness

滴定液名稱: EDTA 偵測極限: 0.28

滴定液濃度 C: 1003

試劑空白 B: 0.02

分析員: AH

分析日期: 115.04.02

審核人: 桂芳

樣品編號	取樣體積 V (mL)	滴定液消耗量 A (mL)	濃度* (mg碳酸鈣/L)	DF	DFx濃度	公告	重複分析差異% (0-15)
空白分析1	50	0.02	0.000	✓	查核樣品濃度 100(mg/L)	QC% (85~115)	添加% (80~120)
空白分析2					空白平均值 0.000	平均值 / 分析員確認值	差異百分比
查核分析1	50	5.02	100.300	100.3	✓	100.300	
查核分析2							
ET115WG0474-001	50	5.05	100.902	5.0	504.510	505 (AH)	飲用水
ET115WG0474-001	50	6.36	127.180	4.0	508.720	509	QC%(97.9 ~ 102.5)
ET115WG0474-001	50	2.59	51.554	10.0	515.540	516 (AH)	添加%(96.2 ~ 107.4)
ET115WG0475-001	50	3.37	67.201	5.0	336.005	336 (AH)	重複分析差異%
ET115WG0475-001	50	6.62	132.396	2.5	330.990	331	3.0
							地下水
							QC%(98.2 ~ 102.3)
							添加%(96.6 ~ 106.8)
							重複分析差異%
							2.6
							水質水量
							QC%(97.9 ~ 102.0)
							添加%(96.6 ~ 107.8)
							重複分析差異%
							1.9

重複分析	取樣體積	滴定液消耗量	濃度*	DF	DFx濃度	重複分析平均值	重複分析標準偏差
ET115WG0474-001	50	6.36	127.180	4.0	508.720	511	
ET115WG0474-001D	50	6.41	128.183	4.0	512.732	510.726	0.8
							✓

添加分析									
樣品編號	滴定液消耗量	添加前濃度*	取樣體積	添加液濃度	添加體積	最終體積	DF	濃度*	回收率%
ET115WG0474-001(DF10)	7.64	51.554	49	5000	1	50	1.0	152.857	102.3
									✓

註: 濃度*(mg碳酸鈣/L) = (A-B)×C÷V

數據繳交日期: 115.04.02 AH

✓樣品編號 ✓樣品數量 ✓稀釋倍數 ✓分析數值

中環科技事業股份有限公司

4/10 22

分析日期：115.04.08-09 分析人員：EZ

分析方法：NIEA W210 總溶解性固體(TDS) 分析報告表

【TDS】水質水量 QC回收率% 96.7~103.7
重複差異%(mg/L)≥25(UCL)4.1 · <25 (UCL)20.0

【TDS】飲用水 QC回收率% 95.3~105.1
重複差異%(mg/L)≥25(UCL)10.0 · <25(UCL)20.0

【公告】重複差異% ≥25mg/L管0~10 · <25mg/L管0~20

審核人：桂芳

樣品編號	取樣體積 V _{S(mL)}	坩鍋		恆重重量差	TS/TDS+坩鍋		恆重重量差	查核回收率% 80~120		【公告】重複差異% ≥25mg/L管0~10 · <25mg/L管0~20 【TS】依公告	QC平均值	QC平均值回收率 101.0 (%)
		W ₀₋₁	W ₀	W ₀₋₁ —W ₀	W ₁₋₁	W ₁	W ₁₋₁ —W ₁	W ₁ -W ₀ (g)	TS or TDS (mg/L)			
空白分析 (BK)	100	80.7492	80.7494	0.0002	80.7495	80.7494	0.0001	0.0000	0.0	BK平均值 1.5	202.0	
	100	77.1835	77.1834	0.0001	77.1838	77.1837	0.0001	0.0003	3.0	查核分析回收率% 100.0	QC差異% 2.0	偵測極限：4.0
查核分析(QC) 200 (mg/L)	50	83.5419	83.5417	0.0002	83.5516	83.5517	0.0001	0.0100	200.0			導電度/ TDS(TS)=導電度
	50	79.1251	79.1251	0.0000	79.1352	79.1353	0.0001	0.0102	204.0	102.0	分析員確認值	
ET115WG0475-001 (re-do)	25	86.5827	86.5828	0.0001	86.6037	86.6035	0.0002	0.0207	828.0	836.000	836	936
	25	77.9645	77.9644	0.0001	77.9853	77.9855	0.0002	0.0211	844.0	1.9	0.893	
ET115WG0540-001	10	77.3882	77.3885	0.0003	77.4490	77.4492	0.0002	0.0607	6070.0	6060.000	6060	8850
	10	87.6901	87.6905	0.0004	87.7511	87.7510	0.0001	0.0605	6050.0	0.3		0.685
ET115WG0540-002	25	84.5894	84.5895	0.0001	84.6132	84.6133	0.0001	0.0238	952.0	946.000	946	1145
	25	81.2823	81.2826	0.0003	81.3058	81.3061	0.0003	0.0235	940.0	1.3		0.826
ET115WG0540-003	25	78.5462	78.5462	0.0000	78.5648	78.5650	0.0002	0.0188	752.0	738.000	738	1129
	25	68.4029	68.4029	0.0000	68.4213	68.4210	0.0003	0.0181	724.0	3.8		0.654
ET115WG0540-004	10	68.3235	68.3233	0.0002	68.3409	68.3412	0.0003	0.0179	1790.0	1825.000	1820	2710
	10	68.0955	68.0954	0.0001	68.1140	68.1140	0.0000	0.0186	1860.0	3.8		0.673
ET115WG0540-005	2	80.9668	80.9670	0.0002	80.9746	80.9750	0.0004	0.0080	4000.0	3950.000	3950	5540
	2	79.7343	79.7342	0.0001	79.7419	79.7420	0.0001	0.0078	3900.0	2.5		0.713
ET115WG0540-006	25	82.2714	82.2716	0.0002	82.3449	82.3446	0.0003	0.0730	2920.0	2888.000	2890	4810
	25	76.6154	76.6158	0.0004	76.6870	76.6872	0.0002	0.0714	2856.0	2.2		0.600
ET115WG0507-001	2	77.2877	77.2874	0.0003	77.3068	77.3067	0.0001	0.0193	9650.0	9650.000	9650	12300
	2	66.2433	66.2435	0.0002	66.2628	66.2628	0.0000	0.0193	9650.0	0.0		0.785
ET115WG0508-001	25	75.4809	75.4811	0.0002	75.4982	75.4986	0.0004	0.0175	700.0	694.000	694	940
	25	66.7614	66.7618	0.0004	66.7789	66.7790	0.0001	0.0172	688.0	1.7		0.738

分析方法：NIEA W311

ICP-OES 金屬分析報告表 (CF=2)

4 SEE
EE-153-0115-019

儀器編號：ICP-C

分析人員： EE

分析日期：115.04.08 查驗／審核人：

[illegible]

註1: 添加回收率=(E×F-A×B)÷(C×D)×100% E: 添加分析濃度 A: 樣品濃度

註2: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

註4:CF=2樣品經前處理消化濃縮取100mL,最終定量至50mL.

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期：115.02.01

ICP-C (CF2) 檢量線報告表

分析日期：115.04.08

分析人員：EE

查驗/審核人：> 符多

Ag 328.068 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 42801.3037363

intercept a= 34.665752

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	39.3073	0.00011	
#2	0.005	261.518	0.00530	6.0
#3	0.01	450.8021	0.00972	-2.8
#4	0.02	873.5607	0.01960	-2.0
#5	0.05	2167.2848	0.04983	-0.3
#6	0.1	4345.0348	0.10071	0.7
#7	0.2	8583.6545	0.19974	-0.1
#8				
#9				

As 193.696 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 1579.7350513

intercept a= 12.409038

r= 0.9999

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	9.5986	-0.00178	
#2	0.03	54.6029	0.02671	-11.0
#3	0.05	85.918	0.04653	-6.9
#4	0.1	169.2896	0.09931	-0.7
#5	0.2	321.3437	0.19556	-2.2
#6	0.5	801.1431	0.49928	-0.1
#7	1	1635.0861	1.02718	2.7
#8	2	3151.6623	1.98720	-0.6
#9				

B 249.772 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 34717.9126719

intercept a= 1555.171730

r= 0.9999

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	1372.1499	-0.00527	
#2	0.05	3206.9845	0.04758	-4.8
#3	0.1	4933.3706	0.09730	-2.7
#4	0.2	8419.2451	0.19771	-1.1
#5	0.5	18972.9324	0.50169	0.3
#6	1	37035.8252	1.02197	2.2
#7	2	70609.6582	1.98902	-0.5
#8				
#9				

Cd 228.802 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 35813.1482885

intercept a= 24.814583

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	27.9496	0.00009	
#2	0.002	93.2917	0.00191	-4.5
#3	0.005	208.7501	0.00514	2.8
#4	0.01	380.1642	0.00992	-0.8
#5	0.02	737.2957	0.01989	-0.5
#6	0.05	1817.1801	0.05005	0.1
#7				
#8				
#9				

中環科技事業股份有限公司

最新確認日期：115.02.01

4/8 EE
EE-153-15-19

ICP-C (CF2) 檢量線報告表

分析日期：115.04.08

分析人員：EE

查驗/審核人：林芳芳

Cr 267.716 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 43708.9795743

intercept a= 38.649410

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	15.0873	-0.00054	
#2	0.005	259.6804	0.00506	1.2
#3	0.01	465.01	0.00975	-2.5
#4	0.02	900.6818	0.01972	-1.4
#5	0.05	2196.9543	0.04938	-1.2
#6	0.1	4456.967	0.10108	1.1
#7	0.2	8830.0633	0.20114	0.6
#8	0.5	21867.1981	0.49941	-0.1
#9				

Cu 324.754 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 41189.3654276

intercept a= 640.278037

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	600.1849	-0.00097	
#2	0.005	840.3865	0.00486	-2.8
#3	0.01	1015.887	0.00912	-8.8
#4	0.02	1443.8147	0.01951	-2.5
#5	0.05	2686.4449	0.04968	-0.6
#6	0.1	4838.5173	0.10193	1.9
#7	0.2	8960.4875	0.20200	1.0
#8	0.5	21189.0899	0.49889	-0.2
#9				

Fe 259.940 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 17351.9322672

intercept a= 16.919755

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	21.4405	0.00026	
#2	0.01	200.0033	0.01055	5.5
#3	0.02	362.2625	0.01990	-0.5
#4	0.05	892.4204	0.05046	0.9
#5	0.1	1780.9501	0.10166	1.7
#6	0.2	3476.4671	0.19938	-0.3
#7	0.5	8618.6493	0.49572	-0.9
#8	1	17404.7975	1.00207	0.2
#9				

Mn 259.372 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 148140.2226986

intercept a= 63.401166

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	50.1967	-0.00009	
#2	0.01	1540.148	0.00997	-0.3
#3	0.02	3006.8909	0.01987	-0.7
#4	0.05	7478.0052	0.05005	0.1
#5	0.1	15101.3726	0.10151	1.5
#6	0.2	29936.1045	0.20165	0.8
#7	0.5	73398.0069	0.49504	-1.0
#8	1	148500.1032	1.00200	0.2
#9				

ICP-C (CF2) 檢量線報告表

分析日期：115.04.08
Ni 231.604 nm

分析人員：EE

查驗/審核人：3/5/49

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 10690.1854529

intercept a= 12.549694

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	11.4612	-0.00010	
#2	0.01	122.1096	0.01025	2.5
#3	0.02	230.6919	0.02041	2.1
#4	0.05	551.3277	0.05040	0.8
#5	0.1	1092.7056	0.10104	1.0
#6	0.2	2157.0742	0.20061	0.3
#7	0.5	5307.5153	0.49531	-0.9
#8	1	10725.0607	1.00209	0.2
#9				

Pb 220.353 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 4426.4639381

intercept a= 5.250687

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	12.592	0.00166	
#2	0.01	50.3368	0.01019	1.9
#3	0.02	94.465	0.02015	0.8
#4	0.05	228.1225	0.05035	0.7
#5	0.1	451.2152	0.10075	0.8
#6	0.2	887.1297	0.19923	-0.4
#7	0.5	2197.3779	0.49523	-1.0
#8	1	4442.5186	1.00244	0.2
#9				

Zn 213.857 nm

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 59719.0060793

intercept a= 39.738427

r= 1.0000

標準樣品#	X 濃度(mg/L)	Y 強度	Xc 迴歸後濃度(mg/L)	(Xc-X)/X*100 誤差%
#1	0	33.6913	-0.00010	
#2	0.005	356.3243	0.00530	6.0
#3	0.01	647.1662	0.01017	1.7
#4	0.02	1203.7611	0.01949	-2.6
#5	0.05	3010.2678	0.04974	-0.5
#6	0.1	6051.5062	0.10067	0.7
#7	0.2	11965.7588	0.19970	-0.2
#8	0.5	29900.7521	0.50003	0.0
#9				

吸光分析報告表

分析方法：NIEA W330

分析項目: Hg 儀器名稱: Hg分析儀-E 分析人員: DW 分析日期: 115.04.04

使用波長: 253.7 nm 零點校正液: 0.15% HCL 偵測極限: 0.000094 審核人: 

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope $b=0.00243309$ intercept $a=0.00084226$ 截距濃度=0.00034617 $r=0.9998$ 定量極限: 0.0004

		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
濃度(μg/L)	標準样品#	濃度(ng)	吸光度	迴歸後濃度(μg/L)	誤差%	水質水量	QC樣品回收%	添加分析回收%
0	#1	0	0.0015014	0.054181		重複% 8.8	82.1~114.4	75.0~115.4
0.4	#2	2	0.0063837	0.455506	13.9	地下水	QC樣品回收%	添加分析回收%
1	#3	5	0.0134405	1.035575	3.6	重複% 15.4	86.1~114.1	80.8~113.4
2	#4	10	0.0236672	1.876210	-6.2	飲用水	QC樣品回收%	添加分析回收%
4	#5	20	0.0481075	3.885203	-2.9	重複% 8.6	85.7~115.5	84.4~111.6
6	#6	30	0.0743394	6.041465	0.7	公告	QC樣品回收%	添加分析回收%
8	#7	40	0.0988855	8.059154	0.7	重複% 0~20	80~120	75~125
10	#8	50	0.1224077	9.992679	-0.1			
	#9							
3	確認 (ICV)	15	0.0390458	3.140331	4.7			
2	查核1 (CCV)	10	0.0252963	2.010122	0.5			
	查核2 (CCV)							
檢量線	ICB	0	0.0013797	0.044178		ND		
	CCB 1	0	0.0013998	0.045830		ND		
	CCB 2							
0	方法空白1	0	0.0010494	0.017027		空白平均值	0.000017	
	方法空白2					查核樣品回收率%	差異%	平均值
3	查核分析1	15	0.0352074	2.824815		94.2		2.824815
	查核分析2					-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註2: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為mg/L及mL

註5/ 檢量線與樣品消化時,已稀釋2倍

註3: "#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.04

☒ 樣品編號 ☒ 樣品數量 ☒ 稀釋倍數 ☒ 分析數值

離子層析法分析報告表

分析方法：NIEA W415

IC-D

鹽氣

F-

分析報告

分析日期： 115.04.07

分析人員：

GC/AT

偵測極限：

0.019

定量極限：

0.10

審核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b =$

0.29192

intercept a=

0.00849

$$\mathbf{r} =$$

0.99985

檢量線分析日期：

115.04.07

檢量線1					檢量線2					檢量線3				
標準樣品#	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	標準樣品#	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	標準樣品#	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
#1	0.1	0.037	0.0977	-2.3	#1	0.1	0.037	0.0977	-2.3	#1	0.1	0.037	0.0977	-2.3
#2	0.3	0.097	0.3032	1.1	#2	0.3	0.097	0.3032	1.1	#2	0.3	0.097	0.3032	1.1
#3	0.5	0.152	0.4916	-1.7	#3	0.5	0.152	0.4916	-1.7	#3	0.5	0.152	0.4916	-1.7
#4	0.8	0.242	0.7999	0.0	#4	0.8	0.242	0.7999	0.0	#4	0.8	0.242	0.7999	0.0
#5	1.0	0.305	1.0157	1.6	#5	1.0	0.305	1.0157	1.6	#5	1.0	0.305	1.0157	1.6
#6	1.5	0.444	1.4919	-0.5	#6	1.5	0.444	1.4919	-0.5	#6	1.5	0.444	1.4919	-0.5
#7					#7					#7				
#8					#8					#8				
#9					#9					#9				
查核分析		高度	分析結果	添加濃度	相對誤差值%	查核分析		高度	分析結果	添加濃度	回收率%			
檢量線確認(ICV)		0.161	0.5224	0.5	4.5	檢量線確認(ICV)		0.161	0.5224	0.5	4.5			
檢量線查核(CCV)1		0.159	0.5156	0.5	3.1	檢量線查核(CCV)1		0.159	0.5156	0.5	3.1			
檢量線查核(CCV)2						檢量線查核(CCV)2								
檢量線查核(CCV)3						檢量線查核(CCV)3								

[illegible]

重複分析								
樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比
ET115WG0474-001	0.250			1.0	0.8273	0.8273	0.8308	0.8
ET115WG0474-001-D	0.252			1.0	0.8342	0.8342		
								✓

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註2:"#"表連續稀釋

註5: $F^* = \text{濃度} F \times \text{稀釋倍數} DF$

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

數據繳交日期：115.04.08

離子層析法分析報告表

分析方法：NIEA W415

IC-D

鹽氣

F-

分析報告

分析日期： 115.04.07 分析人員：

GC/AT

偵測極限：

0.019

定量極限：

0.1

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b =$

0.35596

intercept a=

-0.16297

$$\mathbf{r} =$$

0.99983

檢量線分析日期：

115.04.07

檢量線2					〈公告〉檢量線(確認/查核)% ±15・				
標準樣品#		X 濃度	Y 高度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%	查核% 85~115・添加% 80~120・重複% 0~20			
#1		1.5	0.444	1.7052	13.7	<div> <div>飲用水</div> <div>查核樣品回收率% 重複% 7.7</div> <div>添加分析回收率% 85.0~115.0 80.0~120.0</div> </div>			
#2		3.0	0.896	2.9750	-0.8				
#3		5.0	1.583	4.9050	-1.9				
#4		8.0	2.638	7.8688	-1.6				
#5		15.0	5.150	14.9258	-0.5				
#6		20.0	6.999	20.1202	0.6	<div> <div>地下水</div> <div>查核樣品回收率% 重複% 10.5</div> <div>添加分析回收率% 87.7~113.0 80.0~120.0</div> </div> <div> <div>水質水量</div> <div>查核樣品回收率% 重複% 7.4</div> <div>添加分析回收率% 85.0~112.7 80.0~120.0</div> </div>			
#7									
#8									
#9									
查核分析	高度	分析結果	添加濃度	相對誤差值%	查核分析	高度	分析結果	添加濃度	回收率%
檢量線確認(ICV)	1.626	5.0258	5	0.5	查核樣品(QC)1	1.613	4.9892	5	99.8
檢量線查核(CCV)1	1.576	4.8853	5	-2.3	查核樣品(QC)2				
檢量線查核(CCV)2					平均值		空白分析1	0.000	ND
檢量線查核(CCV)3					差異%		空白分析2		

[illegible]

重複分析								
樣品編號	高度	取樣體積 V_s	稀釋體積 V_t	稀釋倍數 DF	分析結果A	$A \cdot DF$	平均值	差異百分比

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註2:"#"表連續稀釋

註5: $F^* = \text{濃度} F \times \text{稀釋倍數} DF$

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

數據繳交日期：115.04.08

GV ✓

ET115W90915001

中環科技事業股份有限公司

氟鹽F- 檢量線

GL-8-0942091

GL89

審核人：

甘4
夏9

分析日期：115.04.07

分析人員：GC/AT

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 0.29192

intercept a= 0.00849

r = 0.99985

檢量線 1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	0.1	0.037	0.0977	-2.3
#2	0.3	0.097	0.3032	1.1
#3	0.5	0.152	0.4916	-1.7
#4	0.8	0.242	0.7999	0.0
#5	1.0	0.305	1.0157	1.6
#6	1.5	0.444	1.4919	-0.5
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 0.35596

intercept a= -0.16297

r = 0.99983

檢量線 2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	1.5	0.444	1.7052	13.7
#2	3.0	0.896	2.9750	-0.8
#3	5.0	1.583	4.9050	-1.9
#4	8.0	2.638	7.8688	-1.6
#5	15.0	5.150	14.9258	-0.5
#6	20.0	6.999	20.1202	0.6
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b=

intercept a=

r =

檢量線 3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b=

intercept a=

r =

檢量線 4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

離子層析法分析報告表

GC-8-0942097
GC 8/9

分析方法：NIEA W415

IC-D

鹽氣

Cl-

分析報告

分析日期： 115.04.07

分析人員：

GC/AT

偵測極限：

0.022

定量極限：

0.1

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b =$

0.35989

intercept a=

-7.97940

$$\mathbf{r} =$$

0.99977

檢量線分析日期：

115.04.07

檢量線4					＜公告＞檢量線(確認/查核)% ±15・ 查核% 85~115・添加% 80~120・重複% 0~20					
標準樣品#	X 濃度	Y 高度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%						
#1	80.0	21.601	82.1929	2.7						
#2	100.0	27.338	98.1339	-1.9						
#3	150.0	45.350	148.1825	-1.2						
#4	200.0	64.587	201.6349	0.8						
#5	300.0	99.936	299.8566	0.0						
#6										
#7										
#8										
#9										
查核分析		高度	分析結果	添加濃度	相對誤差值%	查核分析	高度	分析結果	添加濃度	回收率%
檢量線確認(ICV)		43.973	144.3563	150	-3.8	查核樣品(QC)1	45.733	149.2467	150	99.5
檢量線查核(CCV)1		44.972	147.1322	150	-1.9	查核樣品(QC)2				
檢量線查核(CCV)2						平均值		空白分析1	0.000	ND
檢量線查核(CCV)3						差異%		空白分析2		

[illegible]

重複分析								
樣品編號	高度	取樣體積 V_s	稀釋體積 V_t	稀釋倍數 DF	分析結果 A	$A \cdot DF$	平均值	差異百分比

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註2:"#"表連續稀釋

註5: $F^* = \text{濃度} F \times \text{稀釋倍數} DF$

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

數據繳交日期：115.04.08

GC-8-094091

GC 89

中環科技事業股份有限公司

氯鹽C1- 檢量線

審核人：

分析日期：115.04.07

分析人員：GC/AT

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b=

intercept a=

r =

檢量線1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

檢量線2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	1.5	0.308	1.6007	6.7
#2	3.0	0.622	2.9479	-1.7
#3	5.0	1.084	4.9301	-1.4
#4	8.0	1.808	8.0363	0.5
#5	15.0	3.414	14.9266	-0.5
#6	20.0	4.610	20.0579	0.3
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 0.23308

intercept a= -0.06510

r = 0.99995

檢量線3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	20.0	4.610	21.3114	6.6
#2	30.0	6.922	29.3308	-2.2
#3	40.0	9.676	38.8834	-2.8
#4	50.0	12.903	50.0766	0.2
#5	80.0	21.601	80.2465	0.3
#6	100.0	27.338	100.1459	0.1
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 0.28830

intercept a= -1.53407

r = 0.99963

檢量線4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	80.0	21.601	82.1929	2.7
#2	100.0	27.338	98.1339	-1.9
#3	150.0	45.350	148.1825	-1.2
#4	200.0	64.587	201.6349	0.8
#5	300.0	99.936	299.8566	0.0
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope b= 0.35989

intercept a= -7.97940

r = 0.99977

ET115W90548-002
ET115W90419-001
分析日期：115.04.07
分析人員：GC/AT
氣鹽 C1- 品管
BT115W90474-001
GC/AT
審核人：黃名

檢量線 1

重複分析									添加分析									
樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vi	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比	樣品編號	高度	添加前濃度 A	取樣體積 B	添加濃度 C	添加體積 D	最終體積 E	稀釋倍數 DF	濃度 F	回收率 %
										</								

檢量線 3

重複分析									添加分析									
樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vi	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比	樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F	回收率 %
ET115W0734-001	8.252			1	33.9441	33.9441	33.9441	0.0	ET115W0734-001	24.349	33.9441	49.5	5000	0.5	50	1	89.7783	112.3
ET115W0734-001-D	8.252			1	33.9441	33.9441												
ET115W0474-001	13.937	10	50	5	53.6631	268.3155	268.6278	0.2										
ET115W0474-001-D	13.973	10	50	5	53.7880	268.9400												

檢量線 2

重複分析									添加分析									
樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vi	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比	樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F	回收率 %

檢量線 4

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vi	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比
重複分析								
樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	轉接係數 DF	回收率%
ET115W0474-001(DF5)	48.007	53.6631	49	5000	1	50	155.5653	103.0
添加分析								

離子層析法分析報告表

GL-8-09420917

GL 4/9

分析方法：NIEA W415

IC-D 硫酸鹽 SO4= 分析報告

分析日期： 115.04.07 分析人員： GC/AT 偵測極限： 0.062 定量極限： 0.3

審核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$ slope $b=$ 0.11093 intercept $a=$ -3.23053 $r=$ 0.99851、檢量線分析日期: 115.04.07

檢量線4		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	<公告>檢量線(確認/查核)% ±15			
標準樣品#		濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%	查核% 85~115 · 添加% 80~120 · 重複% 0~20			
#1		80.0	6.260	85.5542	6.9	<div> <div>飲用水</div> <div>查核樣品回收率% 89.7~107.9</div> <div>添加分析回收率% 81.5~120.0</div> <div>重複% 8.7</div> </div>			
#2		100.0	7.868	100.0499	0.0				
#3		150.0	12.800	144.5103	-3.7				
#4		200.0	18.506	195.9482	-2.0				
#5		300.0	30.489	303.9712	1.3				
#6						<div> <div>地下水</div> <div>查核樣品回收率% 88.8~109.7</div> <div>添加分析回收率% 82.4~117.7</div> <div>重複% 6.3</div> </div>			
#7									
#8						<div> <div>水質水量</div> <div>查核樣品回收率% 89.9~108.2</div> <div>添加分析回收率% 83.0~116.5</div> <div>重複% 5.1</div> </div>			
#9									
查核分析	高度	分析結果	添加濃度	相對誤差值%	查核分析	高度	分析結果	添加濃度	回收率%
檢量線確認(ICV)	12.359	140.5348	150	-6.3	查核樣品(QC)1	12.949	145.8535	150	97.2
檢量線查核(CCV)1	12.637	143.0409	150	-4.6	查核樣品(QC)2				
檢量線查核(CCV)2					平均值		空白分析1	0.000	ND
檢量線查核(CCV)3					差異%		空白分析2		

[illegible]

重複分析								
樣品編號	高度	取樣體積 V_s	稀釋體積 V_t	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註2:"#"表連續稀釋

註5: $F^* = \text{濃度} F \times \text{稀釋倍數} DF$

註3: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

數據繳交日期：115.04.08

中環科技事業股份有限公司

硫酸鹽S04= 檢量線

審核人：

GL-8-0942097

GL 4/9

黃 4/9

分析日期：115.04.07

分析人員：GC/AT

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b=

intercept a=

r =

檢量線1	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

檢量線2	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b=

intercept a=

r =

檢量線3	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	20.0	1.497	20.7623	3.8
#2	30.0	2.184	29.3092	-2.3
#3	40.0	2.985	39.2743	-1.8
#4	50.0	3.896	50.6080	1.2
#5	80.0	6.260	80.0183	0.0
#6	100.0	7.868	100.0233	0.0
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.08038

intercept a= -0.17187

r = 0.99979

檢量線4	X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100
標準樣品#	濃度	高度	迴歸後濃度	誤差%
#1	80.0	6.260	85.5542	6.9
#2	100.0	7.868	100.0499	0.0
#3	150.0	12.800	144.5103	-3.7
#4	200.0	18.506	195.9482	-2.0
#5	300.0	30.489	303.9712	1.3
#6				
#7				
#8				
#9				

線性公式：X=(Y-a)/b

slope b= 0.11093

intercept a= -3.23053

r = 0.99851

最新確認日期: 114.08.01
QC/9
審核人: 吳安

中環科技事業股份有限公司
硫酸鹽 S04= 品管

分析日期: 115.04.07
分析人員: GC/AT

檢量線3

重複分析									添加分析									
樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vt	稀釋倍數 DF	分析結果A	A*DF	平均值	差異百分比	樣品編號	高度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積 D	最終體積E	稀釋倍數 DF	濃度 F	回收率 %
ET115W0734-001	3.387	10	50	5	44.2756	221.3780	219.7295	1.5	ET115W0734-001-D	3.334	10	50	5	43.6162	218.0810			
ET115W08474-001	2.969	10	50	5	39.0753	195.3765	195.7185	0.3	ET115W08474-001-D	2.980	10	50	5	39.2121	196.0605			
											</							

檢量線1

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稱樣體積 Vi	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比

檢量線4

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vi	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比	
重複分析									
添加分析									
樣品編號	高度	添加前濃度 A	取樣體積 B	添加液濃度 C	添加體積 D	最終體積 E	稀釋倍數 DF	濃度 F	回收率 %
ET115W0734-001 (DF5)	12.107	44.2756	49	5000	1	50	1	138.2631	94.9
ET115W08474-001 (DF5)	12.036	39.0753	49	5000	1	50	1	137.6231	99.3
V									

檢量線2

樣品編號	高度	取樣體積 Vs	稀釋體積 Vi	稀釋倍數 DF	分析結果 A	A*DF	平均值	差異百分比
</								

分析方法：NIEA W418

分析項目： NO2-N

儀器名稱： UV-F

分析人員： FZ

分析日期： 115.04.02

使用波長： 543 nm

定量極限： 0.002

偵測極限： 0.00017

审核人：

線性公式： $X=(Y-a)/b$

slope $b = 2.9847$

```
intercept a= 0.000856
```

截距濃度= 0.000287

✓ $r=1.0000$

		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	水質水量 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
RF	標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 4.6	94.4~104.5	78.2~113.3
	#1	0	0.0000	-0.00029		地下水 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
3.200	#2	0.002	0.0064	0.00186	-7.0	重複% 5.6	93.6~106.1	75.0~113.7
3.100	#3	0.004	0.0124	0.00387	-3.3	飲用水 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
3.070	#4	0.01	0.0307	0.01000	0.0	重複% 5.5	93.8~105.6	75.0~114.7
3.080	#5	0.02	0.0616	0.02035	1.8			
3.040	#6	0.04	0.1216	0.04045	1.1			
2.986	#7	0.1	0.2986	0.09976	-0.2	公告 QC樣品回收率% 添加分析回收率%		
	#8					重複% 0~20	80~120	75~125
檢量線	確認 (ICV)	0.01	0.0309	0.01007	0.7	f 值		
	查核1 (CCV)	0.01	0.0307	0.01000	0.0			
	查核2 (CCV)							
RF平均值	方法空白1	0	0.0006	-0.00009		空白平均值		-0.00009
3.079	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
RF範圍2.155 ~ 4.003	查核分析1	0.01	0.0307	0.01000		100.0		
	查核分析2					—	—	—

[illegible]

重複分析						A×DF×f	
樣品編號	吸光度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	樣品濃度	平均值 差異百分比
ET115WG0474-001MS	0.0331			1.0	0.01080	0.01080	0.01075 0.9
ET115WG0474-001MSD	0.0328			1.0	0.01070	0.01070	☒
				☒			

[illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100% 註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

註3: " #" 表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.02 附錄二-348

NO2-N(W418)【LIMS】0402(FZ)-塔P(3)

分析方法：NIEA W433

吸光分析報告表

分析項目:	<u>Sulfide硫化物</u>	儀器名稱:	<u>UV-D</u>	分析人員:	<u>FS</u>	分析日期:	<u>115.04.03</u>
使用波長:	<u>664 nm</u>	定量極限:	<u>0.020</u>	偵測極限:	<u>0.0056</u>	審核人:	<u>李新</u>
線性公式:	$X=(Y-a)/b$ slope b= 0.7682		intercept a= 0.009249		r= 0.9988		

QC低濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
標準樣品#		濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 13.0	84.2~113.9	75.0~125.0
#1		0	0.0097	0.0006		地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#2		0.02	0.0242	0.0195	-2.5	重複% 10.0	84.2~113.0	75.0~125.0
#3		0.05	0.0457	0.0474	-5.2	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#4		0.1	0.0864	0.1004	0.4	重複% 15.0	80.0~120.0	75.0~125.0
#5		0.2	0.1694	0.2085	4.2	公 告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#6		0.25	0.1964	0.2436	-2.6	重複% 20	80~120	75~125
#7						溫泉水(公告)	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#8						重複% 20	80~120	75~125
檢量線 (±10%)	確認 (ICV)	0.048195	0.0484	0.0510	0.0510	5.8	f 值	
	查核1 (CCV)	0.1	0.0839	0.0972		-2.8	R	1.0007
	查核2 (CCV)						QC	0.9639
方法空白1		0	0.0043	-0.0064	-0.0064	空白平均值	-0.0064	
方法空白2						查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
查核分析1		0.048195	0.0452	0.0468	0.0468	97.1		
查核分析2						—	—	—

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3:"#"表連續稀釋

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒ 樣品編號 ☒ 樣品數量 ☒ 稀釋倍數 ☒ 分析數值

數據繳交日期：115.04.03

附錄二-349

Sulfide硫化物(W433)【LIMS】0403(FS)-珞L-低P(2)

中環科技事業股份有限公司

吸光分析報告表

最新確認日期：115.02.01

分析方法：NIEA W434

分析項目：As(水質) 儀器名稱：AA-900 分析人員：BQ
使用波長：193.7 nm 零點校正液：10% HCl 偵測極限：0.00013

分析日期：115.04.04

審核人：李 4/8

線性公式：X=(Y-a)/b slope b= 0.0164 intercept a= 0.002252 截距濃度= 0.000137 r=0.9997 定量極限：0.0010

RF	標準樣品#	X 濃度(μg/L)	Y 吸光度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%			
	#1	0	0.0000	-0.13732		水質水量	QC樣品回收%	添加分析回收%
						重複% 12.7	82.3~120.0	75.0~124.3
0.0198	#2	1	0.0198	1.07000	7.0	地下水	QC樣品回收%	添加分析回收%
0.0176	#3	2	0.0352	2.00902	0.5	重複% 11.4	89.8~118.3	76.4~121.3
0.0179	#4	4	0.0716	4.22854	5.7	飲用水	QC樣品回收%	添加分析回收%
0.0168	#5	6	0.1007	6.00293	0.0	重複% 5.9	81.5~120.0	84.3~116.5
0.0163	#6	8	0.1302	7.80171	-2.5			
0.0165	#7	10	0.1652	9.93585	-0.6			
0.0166	#8	16	0.2655	16.05171	0.3	公告	QC樣品回收%	添加分析回收%
檢量線	確認 (ICV)	3	0.0533	3.11268	3.8	重複% 0~20	80~120	75~125
	查核1 (CCV)	4	0.0744	4.39927	10.0			
	查核2 (CCV)	4	0.0714	4.21634	5.4			
檢量線	ICB	0	0.0010	-0.07634		ND		
	CCB 1	0	0.0002	-0.12512		ND		
	CCB 2	0	0.0014	-0.05195		ND		
RF平均值 0.0174	方法空白1	0	-0.0004	-0.16171		空白平均值	-0.00016	
RF範圍0.0122 ~ 0.0226	方法空白2					查核樣品回收率%	差異%	平均值
	查核分析1	3	0.0526	3.07000		102.3		3.070000
	查核分析2					—	—	—

樣品分析		F'			DF	A	A=1000×DF×F'		
樣品編號	前處理稀釋倍數	吸光度	取樣體積	稀釋體積	消化後稀釋倍數	濃度(μg/L)	樣品中濃度	分析員確認值	
ET115WG0271-001	1.0	0.0040			1.0	0.106585	0.000107	ND<0.00013	
ET115WG0271-002	1.0	0.0021			1.0	-0.009268	-0.000009	ND<0.00013	
ET115WG0273-001	1.0	0.0021			1.0	-0.009268	-0.000009	ND<0.00013	
ET115WG0274-001	1.0	0.0020			1.0	-0.015366	-0.000015	ND<0.00013	
ET115WG0474-001	1.0	0.1412	10.0	25.0	2.5	8.472439	0.021181	0.0212	
ET115WG0475-001	1.0	0.0173			1.0	0.917561	0.000918	<0.0010	

重複分析		F'			DF	A	A=1000×DF×F'	平均值	
樣品編號	前處理稀釋倍數	吸光度	取樣體積	稀釋體積	消化後稀釋倍數	濃度(μg/L)	樣品濃度	差異百分比	
ET115WG0271-002MS	1.0	0.0733			1.0	4.332195	0.004332	0.004335	
ET115WG0271-002MSD	1.0	0.0734			1.0	4.338293	0.004338	0.1	

添加分析									
樣品編號	吸光度	添加前濃度A	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0271-002	0.0733	0.000000	24.5	0.2	0.5	25	1.0	0.004332	108.3

註1：重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註5：檢量線與樣品消化時，已稀釋2倍

註2：添加回收率=(ExF-AxB)÷(Cx×D)×100%

註3：除另行註明外，濃度及體積單位分別為mg/L及mL

註4：“#”表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.04

附錄二-350

☑樣品編號 ☑樣品數量 ☑稀釋倍數 ☑分析數值

As (AA)(W434,R201,R301) 【LIMS】0404(BQ)-琿水P(1)

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值
NO3-N & TON(FIA) 【D】(NIEA W436) 【LIMS】0402(FZ)-琿<低>P(3)

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W437

分析項目： $\text{NH}_3\text{-N}$

儀器名稱：

FIA-C

分析人員：

DW

分析日期：

A15.04.02

使用波長： 660 nm

定量極限：

0.02

偵測極限：

0.0055

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 0.1844$

intercept a= -0.000690

截距濃度 = -0.003742

r=1.0000

高濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
RF	標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	#1	0	0.0000	0.0037		重複% 10.0	88.9~110.4	85.0~115.0
0.181	#2	0.2	0.0362	0.2001	0.0	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.181	#3	0.5	0.0906	0.4951	-1.0	重複% 7.9	90.1~110.6	85.0~115.0
0.183	#4	1	0.1832	0.9972	-0.3	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.184	#5	1.5	0.2766	1.5037	0.2	重複% 9.0	90.4~111.2	85.0~115.0
0.184	#6	2	0.3679	1.9989	-0.1			
	#7							
	#8					公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
檢量線	確認 (ICV)	1.0	0.1861	1.0130	1.3	重複% 0~15	85~115	85~115
	查核1 (CCV)	1.0	0.1823	0.9924	-0.8			
	查核2 (CCV)	1.0	0.1755	0.9555	-4.5			
	查核3 (CCV)							
RF平均值 0.183	方法空白1	0	0.0004			查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
	方法空白2					98.0		
RF範圍0.128 ~ 0.238	查核分析1	1.0	0.1801	0.9804		—	—	—
	查核分析2							

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3: "#"表連續稀釋

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL.

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☐分析數值

數據繳交日期：115.04.02

附錄-352 NH3-N氨氮(FIA)【B·C】(NIEA W437)【LIMS】0402(DW)-瓊L-高P(3)

最新確認日期：115.02.01

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W437

分析項目： $\text{NH}_3\text{-N}$

儀器名稱： FIA-C

分析人員： DW

分析日期： 115.04.02

使用波長： 660 nm

定量極限： 0.02

偵測極限： 0.0055

审核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 0.1805$

```
intercept a= 0.000209
```

截距濃度 = 0.001158

 $r=0.9999$

低濃度		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100			
RF	標準樣品#	濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
	#1	0	0.0000	-0.0012		重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
0.190	#2	0.02	0.0038	0.0199	-0.5	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.190	#3	0.04	0.0076	0.0409	2.3	重複% 7.9	85.0~115.0	85.0~115.0
0.185	#4	0.06	0.0111	0.0603	0.5	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
0.183	#5	0.08	0.0146	0.0797	-0.4	重複% 9.0	85.0~115.0	85.0~115.0
0.184	#6	0.1	0.0184	0.1008	0.8			
0.181	#7	0.2	0.0362	0.1994	-0.3			
	#8					公告	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
檢量線	確認 (ICV)	0.06	0.0118	0.0642	7.0	重複% 0~15	85~115	85~115
	查核1 (CCV)							
	查核2 (CCV)							
	查核3 (CCV)							
RF平均值 0.186	方法空白1					空白平均值		
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
RF範圍0.130 ~ 0.242	查核分析1							
	查核分析2					—	—	—

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4: 除另行註明外, 濃度及體積單位分別為 mg/L 及 mL。

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

註3: "#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.02

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☒稀釋倍數 ☒分析數值

NH3-N氨氮(FIA)【B·C】(NIEA W437)【LIMS】0402(DW)-琿L-低P(4)

FIA 分析報告表

分析方法：NIEA W439

分析項目：TN(總氮) 儀器名稱：FIA-D

使用波長：540 nm 偵測極限：0.024

分析人員：DW

分析日期：115.04.09

審核人：

線性公式： $X=(Y-a)/b$ slope b= 0.2334 intercept a= 0.080932 截距濃度= 0.346752 r=0.9999

標準樣品#	X 濃度	Y 高度	Xc 迴歸後濃度	(Xc-X)/X*100 誤差%	定量極限：0.5		
#1	0	0.0675	-0.0575				
#2	0.5	0.2011	0.5149	3.0			
#3	2	0.5498	2.0089	0.4			
#4	4	1.0363	4.0933	2.3			
#5	8	1.9250	7.9009	-1.2			
#6	10	2.4240	10.0389	0.4			
#7							
#8							
#9							
檢量線	確認 (ICV)	2	0.5701	2.0958	4.8	公告 QC樣品回收率% 添加分析回收率%	
	查核1 (CCV)	2	0.5300	1.9240	-3.8	重複% 0~10	85~115 85~115
	查核2 (CCV)					NO ₃ -N: 2.1681	
	查核3 (CCV)					NO ₂ -N: 2.2278	
UV消化效率確認(尿素)					20	2.2309	分析日期
UV消化效率確認(NO ₃ -N)					20	2.4043	115.04.09
方法空白1					0	0.0664	-0.0623
方法空白2							
查核分析1					2	0.5577	2.0427
查核分析2							

樣品分析	樣品編號	高度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	AxDF	
							樣品中待測物濃度	分析員確認值
ET115WG0475-001		0.1626			1.0	0.3499	0.3499	<0.50
ET115WG0507-001		0.1850			1.0	0.4459	0.4459	<0.50
ET115WG0508-001		0.2853			1.0	0.8756	0.8756	0.88
ET115WG0522-001		1.5143	10	100	10.0	6.1413	61.4130	61.4
ET115WG0523-001		0.8796			1.0	3.4219	3.4219	3.42
ET115WG0524-001		0.2728			1.0	0.8221	0.8221	0.82
ET115WG0526-001		0.1442			1.0	0.2711	0.2711	<0.50
ET115WG0529-001		0.9609	20	100	5.0	3.7702	18.8510	18.9
ET115WG0530-001		0.3686			1.0	1.2325	1.2325	1.23

重複分析	樣品編號	高度	取樣體積Vs	稀釋體積Vt	稀釋倍數DF	濃度 A	AxDF	
							樣品濃度	平均值
								差異百分比
ET115WG0523-001		0.8796			1.0	3.4219	3.4219	3.3446
ET115WG0523-001D		0.8435			1.0	3.2672	3.2672	

添加分析	樣品編號	高度	添加前濃度A*	取樣體積B	添加液濃度C	添加體積D	最終體積E	DF	濃度 F	回收率%
ET115WG0523-001		1.6980	3.4219	49	200	1	50	1.0	6.9283	89.4

註1：重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註2：添加回收率=(ExF-AxB)÷(Cx×D)×100%

註3："#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.09

註4：除另行註明外，濃度及體積單位分別為 mg/L及mL.

樣品編號 樣品數量 稀釋倍數 分析數值

分析方法：NIEA W468

FIA 分析報告表

分析項目： CN^-

儀器名稱： FIA-E

分析人員： AT

分析日期： 115.04.07

使用波長： 600 nm

定量極限： 0.01

偵測極限： 0.0019

審核人：

線性公式: $X=(Y-a)/b$

slope $b = 160014.7940$

intercept a= -195.277262

截距濃度 = -0.001220

$$r=0.9987$$

		X	Y	Xc	(Xc-X)/X*100	公 告		
標準樣品#		濃度	吸光度	迴歸後濃度	誤差%	重複% 0~10	QC樣品回收率 85~115	添加分析回收率 85~115
#1		0	15.8	0.00132		飲用水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#2		0.01	1492.7	0.01055	5.5	重複% 8.9	85.0~115.0	85.0~110.3
#3		0.02	3139.9	0.02084	4.2	地下水	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#4		0.05	7815.7	0.05006	0.1	重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
#5		0.1	14545.4	0.09212	-7.9	水質水量	QC樣品回收率%	添加分析回收率%
#6		0.15	24634.2	0.15517	3.4	重複% 10.0	85.0~115.0	85.0~115.0
#7		0.2	31797.2	0.19993	0.0			
#8								
分解效率 確認	測試溶液A	0.20	15213.8	0.09630	0.09630	2.0 (DF)	0.1926	96.3%【≥90%】
	測試溶液B	2.00	409.7	0.00378	0.00378	≤0.02mg/L		
檢量線	確認 (ICV)	0.05	7575.7	0.04856	0.04856	-2.9		
	查核1 (CCV)	0.05	7993.8	0.05118		2.4		
	查核2 (CCV)							
	查核3 (CCV)							
	方法空白1	0	8.1	0.00127	0.00127	空白平均值	ND	
	方法空白2					查核樣品回收率%	平均值	差異百分比
	查核分析1	0.05	7945.0	0.05087	0.05087	101.7		
	查核分析2					-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

註1: 重複分析差異%=(二次分析濃度差)÷(二次分析平均值)×100%

註4/ 除另行註明外/ 濃度及體積單位分別為 mg/L及mL

註2: 添加回收率 = $(E \times F - A \times B) \div (C \times D) \times 100\%$

☒樣品編號 ☒樣品數量 ☐稀釋倍數 ☒分析數值

註3: "#"表連續稀釋

數據繳交日期：115.04.07

附錄二-355

CN-氰化物 (FIA) 【E】 (NIEA W468) 【LIMS】 0407(AT)-塔L-P(1)

DD-316-038-040

分析日期： 115.04.07

審核人：

r=1.0000

Phenol (FIA) 【B·C】(NIEA W524) 【LIMS】0407(DD)-琺P(2)

最新確認日期：115.02.01
GC-1-0012005
GC 9/10

TOC 分析報告表

—GC✓
—TOC-1030(總有機碳)(W532)【LIMS】0408(GC)-瑤L-P(3)

水中醛類品管樣品分析報告

HPLC-A
分析儀器

检测方法:NIEA W782

[illegible]

濃度單位: mg/L

$$\text{*样品浓度 (mg/L)} = \frac{\text{分析浓度 (}\mu\text{g/mL)} \times \text{萃取最终定体积 (mL)} \times \frac{1\text{mg}}{1000\text{ }\mu\text{g}}}{\frac{\text{萃取样品体积 (mL)} \times \frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}} \times \text{CF} \times \text{稀释倍数}}$$

CF: 從衍生物濃度換算為醛化合物濃度之校正因子, 甲醛為 0.143, 乙醛為 0.196。

分析人員 DS 49

查驗/審核人 張 4/10/16

公告:	查核回收%	添加回收%	差異百分比%
	70.0~130.0	60.0~140.0	25.0

水中柴油總碳氫化合物分析報告表

最新確認日期：115.02.01

案件編號：ET115WG0474, 0475

分析日期：115.04.12 分析人員：DI

查驗/審核人：林益平

檢測方法：NIEA W802

儀器名稱：GC-H 定量極限：0.050 mg/L 儀器記錄本編號：EQ48-40-39

PT16-256-32 DS-0407ext.

	Y	X	CF	Yc	(Yc-Y)/Y*100	GH1150412IC-B STDEV= 0.06292 AVG of CF= 4.45876 RSD of CF= 1.41118% 試樣分析注入量(μL)：1
標準樣品#	注入之質量(ng)	面積總和	校正因子	迴歸後重量 (ng)	誤差%	
#1	50	221.600 ✓	4.43	49.7	-0.6	
#2	100	453.915	4.54	101.8	1.8	
#3	200	895.535 ✓	4.48	200.8	0.4	
#4	500	2190.439	4.38	491.3	-1.7	
#5	1000	4405.834 ✓	4.41	988.1	-1.2	
#6	1500	6775.501	4.52	1519.6	1.3	
ICV	200	763.736 ✓	3.82	171.3	-14.4	地下水 QC樣品回收率 添加分析回收率
CCV 1	200	973.921	4.87	218.4	9.2	重複%:25.0 60.0~115.4 55.0~99.7
CCV 2	200	959.873 ✓	4.80	215.3	7.6	水質水量 QC樣品回收率 添加分析回收率
						重複%:25.0 60.0~125.0 55.0~119.0

查核分析	查核添加濃度 (mg/L)	面積	萃取液質量 (ng)	空白分析濃度(mg/L)		
方法空白1	0	46.273 ✓	10.38	0.010 <0.050		
				查核分析濃度(mg/L)	查核樣品回收率(%)	重複差異百分比(%)
查核分析1	0.2	654.913 ✓	146.9	0.147	73.4	

樣品分析									
樣品編號	取樣體積 V (mL)	試樣濃縮液之體積 V1	樣品萃取液稀釋倍數D	面積總和 A	試樣分析質量 (ng)	樣品濃度 (mg/L)	確認值(mg/L)	備註	
ET115WG0474-001	1000	1.0	1	509.070	114.17	0.114 ✓	0.114 ✓	4	
ET115WG0475-001	1000	1.0	1	240.634 ✓	53.97	0.054 ✓	0.054	4	

重複分析							
樣品編號	取樣體積 (mL)	萃取液體積 (mL)	稀釋倍數 DF	面積總和	萃取液質量 (ng)	添加分析濃度 C (mg/L)	相對差異百分比(%)
ET115WG0474-001MS	1000	10	1	1360.960	305.23	0.305	2.9
ET115WG0474-001MSD	1000	10	1	1322.288	296.56	0.297	

添加分析								
樣品編號	取樣體積B(mL)	試樣分析質量A(ng)	添加體積D (μL)	添加質量C (ng)	最終體積F(mL)	面積	添加分析質量E (ng)	添加回收率%
ET115WG0474-001MS	1000	114.17	1000	200	10	1360.960 ✓	305.2	95.5

註1:濃度單位: mg/L

註2:樣品濃度(mg/L)=(面積總和A*濃縮液體積V1*稀釋倍數D)/(平均感應因子CF*試樣分析注入量V2*萃取水樣之體積V)

註3:添加回收率%=[((添加分析濃度E-試樣濃縮液質量A))/(添加質量C)]*100

註4:樣品所含之碳氫化合物非屬典型柴油。

註5:檢測值為汽油後段之碳氫化合物。

註6:樣品中除柴油外尚含碳數高於柴油之碳氫化合物。

註7:檢測值為汽油後段及柴油中碳氫化合物之總和。



環境部 環境檢驗測定機構許可證

環境部國環檢證字第020號

中環科技事業股份有限公司經本部依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自112年05月11日至
117年05月10日止

許可證內容詳見副頁



部長 薛富盛

中華民國112年12月21日



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第1頁共5頁

檢驗室名稱：中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

檢驗室地址：高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1

檢驗室主管：施敏華

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法 (NIEA W103)
- 2、總硬度：水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法 (NIEA W208)
- 3、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 4、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 5、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 6、銅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 7、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 8、錳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 9、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 10、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 11、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 12、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 13、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 14、汞：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W313)
- 15、砷：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W313)
- 16、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W313)

(續接地下水檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)

國南港廳研發
附錄二-364



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第2頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 17、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (NIEA W313)
- 18、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
- 19、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (NIEA W407)
- 20、氯化物：水中氯化物檢測方法-分光光度計法 (NIEA W410)
- 21、氟鹽(以F⁻計)：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (NIEA W413)
- 22、氯鹽(以F⁻計)：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
- 23、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
- 24、氯鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
- 25、硝酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
- 26、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法-比色法 (NIEA W418)
- 27、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法 (NIEA W430)
- 28、砷：水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 29、硝酸鹽：水中硝酸鹽及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (NIEA W436)
- 30、氨氮：水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (NIEA W437)
- 31、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (NIEA W448)
- 32、氯化物：水中氯化物檢測方法-線上分解/氣體擴散/流動注入分析法 (NIEA W468)
- 33、總酚：水中酚類檢測方法-比色法 (NIEA W520)
- 34、總酚：水中總酚檢測方法-分光光度計法 (NIEA W521)
- 35、總酚：水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法 (NIEA W524)
- 36、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 (NIEA W532)
- 37、大粒松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 38、巴拉松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)

(續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第3頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 39、達馬松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 40、加保扶：水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (NIEA W635)
- 41、巴拉列：水中巴拉列檢測方法-分光光度計法 (NIEA W641)
- 42、2,4-地：水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W642)
- 43、毒殺芬：水中毒殺芬檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W653)
- 44、可氣丹：水中可氣丹檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W660)
- 45、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 46、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 47、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 48、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 49、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 50、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 51、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 52、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接地下水檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第4頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 53、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 54、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 55、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 56、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 57、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 58、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 59、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 60、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 61、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 62、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 63、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 64、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 65、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接地下水檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第020號

第5頁共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 66、順-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 67、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 68、2,4,5-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 69、2,4,6-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 70、3,3'-二氯聯苯胺：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 71、五氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 72、總石油碳氫化合物：水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測器法 (NIEA W901)
(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部(改制前為行政院環境保護署)112年4月25日環署投檢字第1127103190號及113年4月18日環部授研字第1135105058號函辦理。



地下水樣品檢驗報告

樣品名稱：MW-3

樣品特性：無色/無味/無雜質

委 託 單 位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

採樣地點：MW-3

採樣單位：淇荃環保科技有限公司

採樣方法：NIEA W103.56B

檢 測 目 的：定檢申報

專 案 編 號 : KE115G40011

收樣日期：＊

報告編號：KE115G4001103N(註3)

採樣日期：民國115年04月14日 13時33分~14時40分

報 告 日 期：民國115年05月05日

聯絡人：張意卿

[illegible]

聲明書

(一)茲保證本報告內容，自本實驗室收樣至報告出具之過程，以本公司人員最佳之專業知識，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。

備註: 1. 檢測值低於方法定量極限以<定量極限表示。

2.本報告不得部份複製使用(但全份檢測報告複製除外)及作為宣傳廣告之用。

3.樣品並未進入檢驗室，測項皆為現場測項，故相關辨識之報告編號以專案編號取代。

4.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

公司名稱：淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：

杯采碧

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號



淇荃環保科技有限公司

CHI CHUAN Environmental Technology Co., Ltd

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第142號

地下水樣品檢驗報告

樣品編號(名稱)：KG4001310(MW-3)

行程代碼：KEUW26040011

樣品特性：無色/無味/無雜質

專案編號：KE115G40011

委託單位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

收樣日期：民國115年04月15日 10時00分

採樣地點：MW-3

報告編號：KG1154001310

採樣單位：淇荃環保科技有限公司
(環境部國環檢證字第142號)

採樣日期：民國115年04月14日 13時33分~14時40分

採樣方法：NIEA W103.56B

報告日期：民國115年05月05日

檢測目的：定檢申報

聯絡人：張意卿

檢測項目	單位	檢測值	檢測方法	備註	第2類地下水 監測標準	第2類地下水 管制標準
苯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.025	0.05
甲苯	mg/L	ND<0.00029	NIEA W785.58B	MDL=0.00029	5	10
二甲苯 ^{註1}	mg/L	ND<0.00073	NIEA W785.58B	MDL=0.00073	50	100
乙苯	mg/L	ND<0.00026	NIEA W785.58B	MDL=0.00026	3.5	7
氯苯	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.5	1
1,4-二氯苯	mg/L	ND<0.00026	NIEA W785.58B	MDL=0.00026	0.375	0.75
萘	mg/L	ND<0.00017	NIEA W785.58B	MDL=0.00017	0.2	0.4
氯甲烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.15	0.3
二氯甲烷	mg/L	ND<0.00025	NIEA W785.58B	MDL=0.00025	0.025	0.05
氯仿	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.5	1
1,1-二氯乙烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	4.25	8.5
1,2-二氯乙烷	mg/L	ND<0.00035	NIEA W785.58B	MDL=0.00035	0.025	0.05
1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND<0.00037	NIEA W785.58B	MDL=0.00037	0.025	0.05
氯乙烯	mg/L	ND<0.00032	NIEA W785.58B	MDL=0.00032	0.01	0.02
1,1-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00032	NIEA W785.58B	MDL=0.00032	0.035	0.07
順-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.35	0.7
反-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND<0.00030	NIEA W785.58B	MDL=0.00030	0.5	1
三氯乙烯	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.025	0.05
四氯乙烯	mg/L	ND<0.00034	NIEA W785.58B	MDL=0.00034	0.025	0.05
四氯化碳	mg/L	ND<0.00040	NIEA W785.58B	MDL=0.00040	0.025	0.05
甲基第三丁基醚	mg/L	ND<0.00033	NIEA W785.58B	MDL=0.00033	0.5	1
1,2-二氯苯	mg/L	ND<0.00029	NIEA W785.58B	MDL=0.00029	3	6
1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND<0.00037	NIEA W785.58B	MDL=0.00037	1	2
以下空白						

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。
絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事責任。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

- 備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽屬於相關內部文件。
2.檢測值低於方法偵測極限以ND表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度值時，以<定量極限表示，並註明其實際檢測值。
3.本報告不得部份複製使用(但全份檢測報告複製除外)及作為宣傳廣告之用。
4.二甲苯測值係由間、對、二甲苯、鄰-二甲苯檢測值總和而得，若檢測值為ND時以MDL值加總；若檢測值小於檢量線最低濃度時，則以實際檢測值做加總。
5.檢測項目委由中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室執行分析，項目詳見檢驗報告附件。
委託單位案件編號：ET115WG0477。
6.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

公司名稱：淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：

林采慧

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號



淇荃環保科技有限公司

CHI CHUAN Environmental Technology Co., Ltd

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第142號

地下水樣品檢驗報告-附件

樣品編號(名稱)：KG4001310(MW-3)

行程代碼：KEUW26040011

樣品特性：無色/無味/無雜質

專案編號：KE115G40011

委託單位：南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

收樣日期：民國115年04月15日 10時00分

採樣地點：MW-3

報告編號：KG1154001310

採樣單位：淇荃環保科技有限公司
(環境部國環檢證字第142號)

採樣日期：民國115年04月14日 13時33分~14時40分

採樣方法：NIEA W103.56B

報告日期：民國115年05月05日

檢測目的：定檢申報

聯絡人：張意卿

序號	委外檢測項目	序號	委外檢測項目
1	總溶解固體物	25	2,4,5-三氯酚
2	總硬度	26	2,4,6-三氯酚
3	氯鹽	27	五氯酚
4	硫酸鹽	28	柴油總碳氮化合物
5	硫化物	29	氰化物
6	氨氮	30	甲醛
7	亞硝酸鹽氮	31	3,3'-二氯聯苯胺
8	硝酸鹽氮		以下空白
9	無機含氮量		
10	總含氮量		
11	氯鹽		
12	鎘		
13	鉻		
14	銅		
15	鎳		
16	鉛		
17	鋅		
18	汞		
19	砷		
20	鐵		
21	錳		
22	油脂		
23	總有機碳		
24	總酚		

檢測報告專用章

淇荃環保科技有限公司

負責人：周宏沂

檢驗室主管：林采慧

高雄市大社區萬金路349巷21-1號

備註：1.檢測項目委由中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室執行分析，委託單位案件編號：ET115WG0477。

2.計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測。

樣品編號(名稱): KG4001310(MW-3)

專案編號：KE115G40011

報告編號：KG1154001310

[illegible]



淇荃環保科技有限公司

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 115.04.14

專案編號: KE115G40011

使用人員: 沈中昇

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☐ WTW pH 3210 ☒ WTW pH 3310 ☐ HACH sensION	Sampling-W-0008	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正		校正後確認	(pH=7.00) (pH=4) (pH=10)	斜率(mV/pH)
pH	☒ pH=7 ☐ pH=4 ☒ pH=10	實測值/溫度	6.99 / 27.7	-61~-56 mV/pH
溫度(°C)	27.7	理論值	6.99	-56.4
編號	113112-1-02	1140430-1-01	1140430-1-02	113112-1-03
分裝日期	115.04.12	115.04.12	115.04.12	115.04.12
※pH使用注意事項 1.確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 3210 ☒ WTW Cond 3310	Sampling-W-0023	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W203
0.01M KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
編號: 1141124-1-02		(μS/cm/25°C)	(°C)	(μS/cm/25°C)
分裝日期: 115.04.12		1413	26.7	1410
第二來源0.01M KCl標準溶液確認		標準值	溫度	儀器讀值
編號: 113112-1-05		(μS/cm/25°C)	(°C)	(μS/cm/25°C)
分裝日期: 115.04.12		1413	26.6	1402
儀器讀值允收範圍 (相對誤差±1%)				
0.01M KCl:1399~1427				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 3210 ☒ WTW pH 3310	Sampling-W-0009	☒ 良好 ☐ 異常:	-
標準溶液校正(mV)		實測值(mV)	理論值(mV)	合格參考值 ± 10 mV
220		220.7	220	
校正標準液編號: 1141124-1-03 / 分裝日期: 115.04.12				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 3210 ☒ WTW Oxi 3310	Sampling-W-0058	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	溶氧百分比(%)	斜率(0.7~1.25)	※斜率值0.6~0.7,需更換電極填充液或清洗電極。
	8.06 / 27.8	102.5	0.95	
※DO使用注意事項: 1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比(%)允收範圍100±3。 2.量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。 3.電極檢查: ☐ 是 ☒ 否-電極內是否有氣泡。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。 ☐ 是 ☒ 否-電極是否破損。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否光滑且無皺痕。 4.量測儀器大氣壓力值比對: ☒ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。 攜出件(mbar): 1015 標準件(mbar): 1014				
儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
濁度計	☒ WTW Turb 355IR	Sampling-W-0005	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W219
校正標準液(NTU)		實測值(NTU)	理論值(NTU)	合格參考值 ± 1.0 %
100		100	100	
校正標準液編號: 115.0303-1-01				
採樣器材清洗: ☒ 是 ☐ 否-相關採樣器材清洗。				



淇荃環保科技有限公司

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號：KE115G40011

採樣日期：115 年 04 月 14 日

計畫名稱：中區土壤及地下水環保檢測

採樣地點：雲林縣

採樣人員：張中昇

井號：MW-3

實驗室編號：KG400310

井篩深度：4.000-8.000 m

井位座標：E(X)：168650.418 N(Y)：2634985.212 (☒ FWD ☐ 67 ☐ 97 ☐)

資料來源：☒ 監測井告示牌 ☐ 業主提供 ☐ 無

天候狀況：☒ 晴天 ☐ 陰天 ☐ 雨天

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☒ 是 ☐ 否 (現場情況描述：☐ 井內積水 ☐ 無鎖頭 ☐ 其它)

洗井前水位量測：1. 13:29, 2.863 m 2. 13:30, 2.863 m 3. 13:31, 2.863 m (水位變化±3cm)

洗井紀錄資料

洗井開始時間：13 時 33 分；洗井結束時間：13 時 53 分

井管內徑：2 (inch)	水位面至井口深度：2.863 (m)	井底至井口深度：8.468 (m)
井水深度：5.605 (m)	井水體積：11.210 (L)	泵進水口深度：6.000 (m)
井篩長度：4.000 (m)	水流元容積：0.4 (L)	現場儀器量測頻率：4 (min-次)

(1) 洗井方法：A. ☒ 微洗井-定量抽水 B. ☐ 井柱水體積置換法-定量抽水

C. ☐ 本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2) 洗井設備：☒ 氣囊式抽水器 ☐ 貝勒管 ☐ 其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.1/±0.2℃	導電度 (μS/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或 ±0.3	氧化還原電位(mV) ±10 mV	濁度 (NTU) (註 1)	洗井水觀察 (水色、氣味、雜質)
(洗井前) 13:33	0.1	2.863	0.4	7.62 / 27.0	687	1.52	130.6	3.39	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 13:37	0.1	2.863	0.4	7.58 / 27.0	686	1.37	128.6	3.03	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 13:41	0.1	2.863	0.4	7.56 / 27.0	684	1.19	127.7	3.75	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 13:45	0.1	2.864	0.4	7.55 / 27.0	683	1.14	128.9	3.46	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 13:49	0.1	2.864	0.4	7.54 / 27.0	682	1.09	128.1	3.27	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 13:53	0.1	2.864	0.4	7.54 / 27.0	681	1.08	128.4	3.15	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) :									☐ 無色 ☐ 色 ☐ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☐ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(採樣) 13:55	0.1	2.864	0.24	7.54 / 27.0 7.54 / 27.0 °C	681 681	1.08	128.3	2.98	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁

汲出水總體積：2.64 (L) 洗井結束時水位面至井口深度：2.864 (m)；水位洩降 0.001 (m)

採樣資料【開始時間：13 時 55 分，結束時間：14 時 00 分】

採樣器材：☒ 同洗井設備 ☐ 貝勒管 ☐ 其他 採樣器放置深度：7 (m)

附註：☐ 採樣器放置深度由委託單位指定 (☐ 井篩中段 ☐ 水位下 米 ☐ 井底上 米 ☐ 其它)

☐ 非標準井 (☐ 2 吋簡易井；☐ 其它形式：

☐ 井內含有不互溶有機液體 ☐ 井底有泥沙 ☐ 其它

總體積：0.09 m³

井水體積(L): 2 吋井: 2.0*井水深度 4 吋井: 8.1*井水深度 井水體積 (L) = 0.51 × 直徑(吋) × 直徑(吋) × 井水深度(公尺)

註 1：濁度(NTU) > 20 為 ±10%，20~5 為 ±2，3 次低於 5 為穩定



淇荃環保科技有限公司

監測井地下水採樣紀錄表

專案編號: KE115G40011

採樣日期: 115 年 04 月 14 日

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

採樣地點: 雲林縣

採樣人員: 張景卿

井號: MW-3 實驗室編號: KG4001310

井篩深度: 4.000-8.000 m

井位座標: E(X): 168650.418 N(Y): 2634985.212 (☐ TWD ☐ 67 ☐ 97 ☐)

資料來源: ☒ 監測井告示牌 ☐ 業主提供 ☐ 無

天候狀況: ☒ 晴天 ☐ 陰天 ☐ 雨天

環境描述: 監測井鎖扣是否完整: ☒ 是 ☐ 否 (現場情況描述: ☐ 井內積水 ☐ 無鎖頭 ☐ 其它)

洗井前水位量測: 1. 14:04, 2.865 m 2. 14:05, 2.865 m 3. 14:06, 2.866 m (水位變化±3cm)

洗井紀錄資料

洗井開始時間: 14 時 08 分; 洗井結束時間: 14 時 13 分

井管內徑: 2 (inch)	水位面至井口深度: 2.863 (m)	井底至井口深度: 8.468 (m)
井水深度: 5.605 (m)	井水體積: 11.210 (L)	泵進水口深度: 6.000 (m)
井篩長度: 4.000 (m)	水流元容積: 0.4 (L)	現場儀器量測頻率: 1 (min-次)

(1) 洗井方法: A. ☒ 微洗井-定量抽水 B. ☐ 井柱水體積置換法-定量抽水

C. ☐ 本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8), 將井水抽乾

(2) 洗井設備: ☒ 氣囊式抽水器 ☐ 貝勒管 ☐ 其他:

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.1/±0.2℃	導電度 (μS/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或 ±0.3	氧化還原電位(mV) ±10 mV	濁度 (NTU) (註 1)	洗井水觀察 (水色、氣味、雜質)
(洗井前) 14:08	0.5	2.866	0.5	7.53 / 27.0	680	1.01	127.8	4.92	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:09	0.5	2.867	0.5	7.53 / 27.0	680	1.00	127.5	3.69	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:10	0.5	2.867	0.5	7.53 / 27.0	679	0.98	127.7	3.28	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:11	0.5	2.867	0.5	7.52 / 27.0	679	0.99	127.6	3.04	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:12	0.5	2.868	0.5	7.52 / 26.9	678	1.02	127.3	3.62	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井) 14:13	0.5	2.868	0.5	7.52 / 26.9	678	1.00	127.4	3.97	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(洗井)									☐ 無色 ☐ 色 ☐ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☐ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁
(採樣) 14:15	0.5	2.868	10.75	7.52 / 26.9 7.52 / 26.9℃	678 678	0.98	127.1	3.85	☒ 無色 ☐ 色 ☒ 無味 ☐ 異味 ☐ 油味 ☒ 無雜質 ☐ 微濁 ☐ 混濁

汲出水總體積: 13.75 (L) 洗井結束時水位面至井口深度: 2.868 (m); 水位洩降: 0.005 (m)

採樣資料【開始時間: 14 時 15 分, 結束時間: 14 時 40 分】

採樣器材: ☒ 同洗井設備 ☐ 貝勒管 ☐ 其他 採樣器放置深度: 7 (m)

附註: ☐ 採樣器放置深度由委託單位指定 (☐ 井篩中段 ☐ 水位下 米 ☐ 井底上 米 ☐ 其它:)

☐ 非標準井 (☐ 2 吋簡易井; ☐ 其它形式:)

☐ 井內含有不互溶有機液體 ☐ 井底有泥沙 ☐ 其它

井水體積(L): 2 吋井: 2.0*井水深度 4 吋井: 8.1*井水深度 井水體積 (L) = 0.51*直徑(吋)*直徑(吋)*井水深度(公尺)

註 1: 濁度(NTU) > 20 為 ±10%, 20~5 為 ±2, 3 次低於 5 為穩定

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 NIEA W785

檢驗員: 徐子園
驗算員: 蔡仁自

* 檢量線製作日期: 115.03.25 分析日期: 115.04.15										
STD	STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	RF	RF RSD(%)	初估檢量線確認	初估檢量線確認 D(%)	
檢測項目	STD	STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	RF	RF RSD(%)	初估檢量線確認	初估檢量線確認 D(%)
氟苯(1S)	濃度值(ug/L)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	配製濃度	10
Fluorobenzene	訊號強度	1457817	1532700	1579189	1601614	1641796	-	-	訊號強度	1498659
1,2-二氯苯-d4(SS)	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.32	10.9%	配製濃度	10
1,2-Dichlorobenzene-d4	訊號強度	55049	251895	491110	974667	1876438	-	-	訊號強度	440625
4-溴氟苯(SS)	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.26	12.6%	配製濃度	10
4-Bromofluorobenzene	訊號強度	46413	183096	386556	802772	1626700	-	-	訊號強度	339902
二氯二氟甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.35	7.1%	配製濃度	10
Dichlorodifluoromethane	訊號強度	56123	282286	556103	1088158	2099237	-	-	訊號強度	525671
氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.57	6.2%	配製濃度	10
Chloromethane	訊號強度	88431	448998	894718	1795370	3369181	-	-	訊號強度	912300
氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.42	4.0%	配製濃度	10
Vinyl chloride	訊號強度	64317	328956	667699	1365295	2595353	-	-	訊號強度	688210
溴甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.24	2.6%	配製濃度	10
Bromomethane	訊號強度	35154	181462	376915	758442	1479028	-	-	訊號強度	397773
氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.25	6.0%	配製濃度	10
chloroethane	訊號強度	40319	194009	404956	814224	1535307	-	-	訊號強度	395750
三氯一氟甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.46	5.2%	配製濃度	10
trichlorofluoromethane	訊號強度	72851	351752	726527	1466732	2843789	-	-	訊號強度	675362
1,1-二氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.30	5.7%	配製濃度	10
1,1-dichloroethene	訊號強度	48264	230157	480958	952583	1860466	-	-	訊號強度	471697
二氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.39	5.5%	配製濃度	10
methylene chloride	訊號強度	56511	323952	640704	1247441	2395960	-	-	訊號強度	666190
反-1,2-二氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.33	3.4%	配製濃度	10
trans-1,2-dichloroethene	訊號強度	50056	254387	524248	1066583	2051383	-	-	訊號強度	521991
甲基第三丁基醚	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.78	3.7%	配製濃度	10
Methyl tert-butyl ether	訊號強度	119626	567342	1214823	2483270	5116392	-	-	訊號強度	1213181
1,1-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.66	5.4%	配製濃度	10
1,1-dichloroethane	訊號強度	103795	512832	1047119	2073382	4033714	-	-	訊號強度	1017894
2,2-二氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.37	3.7%	配製濃度	10
2,2-dichloropropane	訊號強度	57641	279435	587205	1189321	2358561	-	-	訊號強度	592080
順-1,2-二氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.35	3.9%	配製濃度	10
cis-1,2-dichloroethene	訊號強度	54080	263089	544120	1107579	2201794	-	-	訊號強度	544873
溴氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.17	5.1%	配製濃度	10
bromochloromethane	訊號強度	26224	126177	263898	533882	1024252	-	-	訊號強度	262749
氯仿	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.62	5.2%	配製濃度	10
chloroform	訊號強度	95951	483440	981679	1960516	3747534	-	-	訊號強度	962656
1,1,1-三氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.45	4.7%	配製濃度	10
1,1,1-trichloroethane	訊號強度	70492	337771	705940	1433819	2798312	-	-	訊號強度	707205
四氯化碳	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.36	4.4%	配製濃度	10
carbon tetrachloride	訊號強度	56442	272860	563249	1148539	2265728	-	-	訊號強度	564356
1,1-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.39	2.7%	配製濃度	10
1,1-dichloropropene	訊號強度	55978	284618	607525	1280486	2566954	-	-	訊號強度	600220
苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	1.18	2.3%	配製濃度	10
benzene	訊號強度	173478	892836	1884852	3835645	7443759	-	-	訊號強度	1871543
1,2-二氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.44	4.8%	配製濃度	10
1,2-dichloroethane	訊號強度	69388	345529	700677	1394681	2748370	-	-	訊號強度	685820
三氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.29	3.9%	配製濃度	10
trichloroethylene	訊號強度	44785	225691	454250	927369	1810671	-	-	訊號強度	446071
1,2-二氯丙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.29	3.1%	配製濃度	10
1,2-dichloropropane	訊號強度	44670	219631	452249	923562	1864613	-	-	訊號強度	441540
二溴甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.19	5.1%	配製濃度	10
dibromomethane	訊號強度	29689	143872	298313	589195	1165742	-	-	訊號強度	292946
一溴二氯甲烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.37	2.7%	配製濃度	10
bromodichloromethane	訊號強度	55765	274965	572642	1161732	2356244	-	-	訊號強度	569722
順-1,3-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.31	7.1%	配製濃度	10
cis-1,3-dichloropropene	訊號強度	41321	226486	483747	1022849	2235712	-	-	訊號強度	506116
甲苯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.51	8.0%	配製濃度	10
toluene	訊號強度	66766	361264	808116	1758999	3550203	-	-	訊號強度	809699
反-1,3-二氯丙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.23	7.6%	配製濃度	10
trans-1,3-dichloropropene	訊號強度	32721	161792	369584	789188	1683805	-	-	訊號強度	360906
1,1,2-三氯乙烷	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.16	1.0%	配製濃度	10
1,1,2-trichloroethane	訊號強度	23128	123328	253373	509047	1030218	-	-	訊號強度	247634
四氯乙烯	濃度值(ug/L)	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	0.21	2.5%	配製濃度	10
tetrachloroethylene	訊號強度	31697	159100	326980	676967	1338969	-	-	訊號強度	321653

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 NIEA W785

檢驗員: 徐于嵐
驗算員: 李仁星

* 檢量線製作日期: 115.03.25 分析日期: 115.04.15		STD		STD1	STD2	STD3	STD4	STD5	$\overline{RF}$	$\overline{RF}$ RSD(%)	初始檢量線確認		初始檢量線確認 D(%)
檢測項目	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度	濃度值(ug/L)	訊號強度			配製濃度	訊號強度	
1,3-二氯丙烷 1,3-dichloropropane	1.00	41968	5.00	211311	10.00	451347	20.00	939327	0.29	2.3%	10	462652	-7.7%
1,2-二溴乙烷 1,2-dibromoethane	1.00	27931	5.00	142089	10.00	295676	20.00	611551	0.19	1.6%	10	291272	-2.6%
1,2-二氯乙烷 1,2-dichloroethane	1.00	21454	5.00	109759	10.00	235288	20.00	499319	0.15	4.0%	10	233716	-3.6%
氯苯 chlorobenzene	1.00	72674	5.00	379989	10.00	813147	20.00	1679665	0.51	2.5%	10	806111	-5.3%
1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,1,2-tetrachloroethane	1.00	33470	5.00	171205	10.00	360081	20.00	751962	0.23	2.2%	10	355476	-3.0%
乙苯 ethylbenzene	1.00	111350	5.00	624757	10.00	1420197	20.00	3097527	0.88	10.4%	10	1415216	-7.0%
間,對-二甲苯 m,p-xylene	2.00	77440	10.00	493431	20.00	1105573	40.00	2391231	0.33	12.9%	20	1092595	-8.9%
鄰-二甲苯 o-xylene	1.00	44242	5.00	266927	10.00	604386	20.00	1308743	0.37	12.0%	10	593274	-7.0%
苯乙烯 styrene	1.00	55772	5.00	363447	10.00	843774	20.00	1828753	0.50	15.4%	10	824224	-9.1%
溴仿 bromofom	1.00	14540	5.00	75075	10.00	163155	20.00	337768	0.10	3.6%	10	142038	7.7%
異丙基苯 isopropylbenzene	1.00	113883	5.00	735147	10.00	1667588	20.00	3691933	1.02	15.1%	10	1683468	-10.3%
1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-tetrachloroethane	1.00	41340	5.00	202745	10.00	412953	20.00	828518	0.26	4.1%	10	404296	-1.8%
溴苯 bromobenzene	1.00	26842	5.00	148795	10.00	316004	20.00	662730	0.20	4.4%	10	314519	-6.2%
1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-trichloropropane	1.00	33249	5.00	167230	10.00	348762	20.00	700650	0.22	2.4%	10	348123	-5.6%
正丙基苯 n-propylbenzene	1.00	134396	5.00	850244	10.00	1907546	20.00	4163349	1.16	13.2%	10	1895202	-8.8%
2-氯甲苯 2-chlorotoluene	1.00	90644	5.00	560019	10.00	1218342	20.00	2547302	0.74	9.4%	10	1198326	-8.3%
1,3,5-三甲苯 1,3,5-trimethylbenzene	1.00	96272	5.00	663690	10.00	1518965	20.00	3300328	0.90	16.6%	10	1539166	-13.5%
4-氯甲苯 4-chlorotoluene	1.00	79972	5.00	510101	10.00	1108117	20.00	2280535	0.66	10.0%	10	1048048	-5.6%
1,1-二甲基乙基苯 tert-butylbenzene	1.00	97761	5.00	507656	10.00	1164182	20.00	2662003	0.75	11.3%	10	1175086	-4.8%
1,2,4-三甲苯 1,2,4-trimethylbenzene	1.00	98173	5.00	677921	10.00	1526353	20.00	3249980	0.90	15.2%	10	1497818	-10.5%
1-甲基丙基苯 sec-butylbenzene	1.00	119054	5.00	847450	10.00	1871192	20.00	4160637	1.13	17.0%	10	1883153	-10.8%
1,3-二氯苯 1,3-dichlorobenzene	1.00	60009	5.00	323191	10.00	664797	20.00	1365361	0.42	1.9%	10	638196	-2.0%
對-異丙基甲苯 p-isopropyltoluene	1.00	96001	5.00	688723	10.00	1540472	20.00	3363917	0.92	17.0%	10	1579951	-14.6%
1,4-二氯苯 1,4-dichlorobenzene	1.00	60703	5.00	323580	10.00	659376	20.00	1341380	0.42	2.0%	10	637624	-2.5%
正丁基苯 n-butylbenzene	1.00	110941	5.00	711676	10.00	1569816	20.00	3397714	0.95	12.4%	10	1547324	-8.2%
1,2-二氯苯 1,2-dichlorobenzene	1.00	68092	5.00	358620	10.00	733606	20.00	1504429	0.46	2.0%	10	733324	-5.6%
1,2-二溴-3-氯丙烷 1,2-dibromo-3-chloropropane	1.00	8164	5.00	35935	10.00	71231	20.00	146374	0.05	9.4%	10	69988	2.7%
1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene	1.00	48978	5.00	245144	10.00	503485	20.00	1072166	0.33	2.6%	10	507159	-3.8%
六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene	1.00	22843	5.00	126589	10.00	260302	20.00	563690	0.17	4.2%	10	256781	-3.1%
萘 Naphthalene	1.00	105052	5.00	498984	10.00	1097245	20.00	2420673	0.71	6.0%	10	1099008	-2.6%
1,2,3-三氯苯 1,2,3-trichlorobenzene	1.00	52823	5.00	263482	10.00	524284	20.00	1095460	0.34	4.3%	10	534618	-4.7%

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕提/氣相層析質譜儀 NIEA W785

檢核員: 徐子蘭
驗算員: 李仁皇

		IS範圍上下限:		781311.6~2343934.8		分析日期: 115.04.15							
樣品編號		檢量線重複分析		檢量線重複分析		重複樣品分析		添加樣品分析		重複重複分析		樣品重複分析	
		1150415-2 .CCa		1150415-2 .CCb		1150415-2 .QC		KG4001204 .SK		1150415-2 .QCR		KG4001204 .SR	
檢測項目		分析濃度 (ug/L)	差異百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差異百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差異百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差異百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差異百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差異百分比 (%)
氟苯 (IS)	1-fluorobenzene	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—
	訊號強度	1760040		1478984		1389828		1417231		1408941		1224858	
	回收率 %	100.3		105.9		123.3		124.1		114.6		106.0	
1,2-二氯苯-d4 (SS)	1,2-Dichlorobenzene-d4	10.03	10.0	10.59	10.0	12.33	10.0	12.41	10.0	11.46	10.0	10.60	—
	訊號強度	567649		503386		551083		565443		519002		417307	
	回收率 %	100.3		105.9		123.3		124.1		114.6		105.9845	
4-溴氟苯 (SS)	4-Bromofluorobenzene	9.30	10.0	8.87	10.0	10.57	10.0	10.27	10.0	9.95	10.0	7.97	—
	訊號強度	425600		341164		381962		378578		364557		253877	
	回收率 %	93.0		88.7		105.7		102.7		99.5		79.6957	
氯甲烷	Chloromethane	7.55	24.53	9.44	5.59	7.92	10.0	7.51	11.4	8.63	8.57	N.D.	—
	訊號強度	752566		791008		623472		602938		688652		0	
	RF / 回收率 %	0.43		0.53		79.2		65.9		86.3		0	
氯乙烯	Vinyl chloride	8.00	19.95	11.26	12.58	9.48	10.0	9.09	11.4	9.96	5.00	N.D.	—
	訊號強度	595874		704213		557165		544724		593786		0	
	RF / 回收率 %	0.34		0.48		94.8		79.7		99.6		0	
1,1-二氯乙烯	1,1-dichloroethene	8.77	12.29	10.14	1.37	10.01	10.0	9.59	11.4	10.67	6.38	N.D.	—
	訊號強度	468255		454755		422050		412082		456049		0	
	RF / 回收率 %	0.27		0.31		100.1		84.1		106.7		0	
二氯甲烷	methylene chloride	8.49	15.13	10.45	4.50	10.78	10.0	10.53	11.4	11.08	2.76	N.D.	—
	訊號強度	588619		609046		590267		587820		615126		0	
	RF / 回收率 %	0.33		0.41		107.8		92.3		110.8		0	
反-1,2-二氯乙烯	trans-1,2-dichloroethene	8.55	14.49	9.61	3.88	9.62	10.0	9.18	11.4	10.32	6.98	N.D.	—
	訊號強度	497454		469891		441962		429840		480430		0	
	RF / 回收率 %	0.28		0.32		96.2		80.5		103.2		0	
甲基第三丁基醚	(MTBE)	8.21	17.88	9.26	7.37	8.90	10.0	8.50	11.4	9.41	5.59	N.D.	—
	訊號強度	1122916		1064387		960808		936155		1030058		0	
	RF / 回收率 %	0.64		0.72		89.0		74.6		94.1		0	
1,1-二氯乙烷	1,1-dichloroethane	7.84	21.63	8.66	13.42	8.53	10.0	8.26	11.4	9.02	5.59	N.D.	—
	訊號強度	911899		846599		783917		774044		840381		0	
	RF / 回收率 %	0.52		0.59		85.3		72.5		90.2		0	
順-1,2-二氯乙烯	cis-1,2-dichloroethene	8.27	17.26	9.16	8.39	9.06	10.0	8.73	11.4	9.49	4.66	N.D.	—
	訊號強度	506728		471448		437949		430690		465169		0	
	RF / 回收率 %	0.29		0.32		90.6		76.6		94.9		0	
氯仿	chloroform	8.23	17.73	8.75	12.48	9.06	10.0	8.82	11.4	9.56	5.36	N.D.	—
	訊號強度	895849		800766		779131		773137		833324		0	
	RF / 回收率 %	0.51		0.54		90.6		77.3		95.6		0	
1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-trichloroethane	8.65	13.54	10.55	5.47	9.85	10.0	9.39	11.4	10.46	5.96	N.D.	—
	訊號強度	683294		700424		614795		597275		661533		0	
	RF / 回收率 %	0.39		0.47		98.5		82.3		104.6		0	
四氯化碳	carbon tetrachloride	9.26	7.38	10.87	8.66	10.25	10.0	9.95	11.4	10.94	6.52	N.D.	—
	訊號強度	587951		579651		513949		508613		556143		0	
	RF / 回收率 %	0.33		0.39		102.5		87.3		109.4		0	
苯	benzene	8.29	17.05	8.64	13.57	8.92	10.0	8.62	11.4	9.49	6.13	N.D.	—
	訊號強度	1716666		1503066		1458113		1437057		1571676		0	
	RF / 回收率 %	0.98		1.02		89.2		75.6		94.9		0	
1,2-二氯乙烷	1,2-dichloroethane	7.64	23.62	7.60	23.95	8.38	10.0	7.93	11.4	8.41	0.36	N.D.	—
	訊號強度	598110		500369		517847		499907		526855		0	
	RF / 回收率 %	0.34		0.34		83.8		69.5		84.1		0	
三氯乙烯	trichloroethylene	8.34	16.61	8.09	19.11	8.76	10.0	8.75	11.4	9.14	4.32	N.D.	—
	訊號強度	426997		348033		353993		360621		374723		0	
	RF / 回收率 %	0.24		0.24		87.6		76.7		91.4		0	
甲苯	toluene	9.10	9.05	8.79	12.08	9.43	10.0	9.03	11.4	10.16	7.47	N.D.	—
	訊號強度	810273		658183		663369		647928		724644		0	
	RF / 回收率 %	0.46		0.45		94.3		79.2		101.6		0	
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-trichloroethane	9.83	1.74	8.64	13.63	10.18	10.0	9.63	11.4	10.56	3.68	N.D.	—
	訊號強度	275245		203323		225247		217269		236917		0	
	RF / 回收率 %	0.16		0.14		101.8		84.5		105.6		0	
四氯乙烯	tetrachloroethylene	10.46	4.64	9.68	3.25	10.71	10.0	10.19	11.4	11.21	4.65	N.D.	—
	訊號強度	385767		299732		311643		302562		330954		0	
	RF / 回收率 %	0.22		0.20		107.1		89.4		112.1		0	
氯苯	chlorobenzene	10.17	1.66	9.68	3.22	10.27	10.0	9.60	11.4	10.88	5.76	N.D.	—
	訊號強度	913597		730831		728577		694700		782394		0	
	RF / 回收率 %	0.52		0.49		102.7		84.2		108.8		0	
乙苯	ethylbenzene	8.91	10.90	8.81	11.86	9.11	10.0	8.69	11.4	9.72	6.48	N.D.	—
	訊號強度	1384666		1150963		1117616		1087361		1208856		0	
	RF / 回收率 %	0.79		0.78		91.1		76.2		97.2		0	
間,對-二甲苯	m,p-xylene	19.99	0.07	19.26	3.71	20.07	20.0	19.40	22.8	21.70	7.80	N.D.	—
	訊號強度	1177910		953685		934050		920494		1023767		0	
	RF / 回收率 %	0.33		0.32		100.4		85.1		108.5		0	
鄰-二甲苯	o-xylene	9.23	7.72	9.97	0.32	9.67	10.0	9.19	11.4	10.27	6.05	N.D.	—
	訊號強度	600870		545421		496994		481890		535257		0	
	RF / 回收率 %	0.34		0.37		96.7		80.6		102.7		0	
1,4-二氯苯	1,4-dichlorobenzene	10.87	8.70	10.54	5.36	11.09	10.0	10.62	11.4	11.71	5.47	N.D.	—
	訊號強度	794445		647047		639838		625126		685129		0	
	RF / 回收率 %	0.45		0.44		110.9		93.2		117.1		0	
1,2-二氯苯	1,2-dichlorobenzene	10.57	5.67	10.94	9.38	11.21	10.0	10.81	11.4	11.72	4.47	N.D.	—
	訊號強度	861699		749500		721679		709690		765019		0	
	RF / 回收率 %	0.49		0.51		112.1		94.8		117.2		0	
萘	Naphthalene	8.96	10.36	9.35	6.53	9.03	10.0	8.37	11.4	9.75	7.75	N.D.	—
	訊號強度	1127096		987645		896165		847334		981729		0	
	RF / 回收率 %	0.64		0.67		90.3		73.4		97.5		0	

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕提/氣相層析質譜儀 NIEA W785

檢驗員: 徐子嵐

檢算員: 李仁皇

IS範圍上下限:

分析日期: 115.04.15

樣品編號	檢驗項目	檢量線查核分析		檢量線查核分析		查核樣品分析		添加樣品分析		查核重複分析		樣品重複分析	
		1150415-2 .CCc	1150415-2 .CCc	1150415-2 .CCd	1150415-2 .CCd	1150415-2 .QC	1150415-2 .QC	添加樣品分析 .SK	添加樣品分析 .SK	1150415-2 .QCR	1150415-2 .QCR	樣品重複分析 .SR	樣品重複分析 .SR
		分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	差值百分比 (%)	分析濃度 (ug/L)	配製濃度 (ug/L)	分析濃度 (ug/L)	配製濃度 (ug/L)	分析濃度 (ug/L)	重複差異%	分析濃度 (ug/L)	重複差異%
氫苯 (IS)	分析濃度值 (ug/L)	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—	10.00	—
I-fluorobenzene	訊號強度	1430798		1486011									
1,2-二氯苯-d4 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	10.69		10.95									
S-1,2-Dichlorobenzene-d4	訊號強度	491466	10.0	522925	10.0								
	回收率%	106.9		109.5									
4-溴氯苯 (SS)	分析濃度值 (ug/L)	8.88		9.43									
S-4-Bromofluorobenzene	訊號強度	330492	10.0	364570	10.0								
	回收率%	88.8		94.3									
氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	9.19		8.20									
Chloromethane	訊號強度	744879	8.11	689996	18.04								
	RF / 回收率%	0.52		0.46									
氯乙烯	分析濃度值 (ug/L)	10.46		9.85									
Vinyl chloride	訊號強度	633203	4.64	619067	1.50								
	RF / 回收率%	0.44		0.42									
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.95		10.01									
1,1-dichloroethene	訊號強度	431898	0.48	450987	0.05								
	RF / 回收率%	0.30		0.30									
二氯甲烷	分析濃度值 (ug/L)	10.36		10.00									
methylene chloride	訊號強度	584390	3.65	585670	0.01								
	RF / 回收率%	0.41		0.39									
反-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.50		9.60									
trans-1,2-dichloroethene	訊號強度	449057	5.04	471494	4.00								
	RF / 回收率%	0.31		0.32									
甲基第三丁基醚	分析濃度值 (ug/L)	9.34		9.45									
(MTBE)	訊號強度	1038725	6.55	1091052	5.49								
	RF / 回收率%	0.73		0.73									
1,1-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	8.57		8.63									
1,1-dichloroethane	訊號強度	810610	14.31	847391	13.75								
	RF / 回收率%	0.57		0.57									
順-1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.23		9.35									
cis-1,2-dichloroethene	訊號強度	459693	7.67	483465	6.50								
	RF / 回收率%	0.32		0.33									
氯仿	分析濃度值 (ug/L)	8.83		8.93									
chloroform	訊號強度	781347	11.73	820791	10.72								
	RF / 回收率%	0.55		0.55									
1,1,1-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	10.19		9.99									
1,1,1-trichloroethane	訊號強度	654561	1.89	666716	0.08								
	RF / 回收率%	0.46		0.45									
四氯化碳	分析濃度值 (ug/L)	10.65		10.68									
carbon tetrachloride	訊號強度	549811	6.54	572641	6.84								
	RF / 回收率%	0.38		0.39									
苯	分析濃度值 (ug/L)	8.68		8.83									
benzene	訊號強度	1460501	13.19	1542976	11.70								
	RF / 回收率%	1.02		1.04									
1,2-二氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	7.57		7.77									
1,2-dichloroethane	訊號強度	482171	24.25	514000	22.25								
	RF / 回收率%	0.34		0.35									
三氯乙烯	分析濃度值 (ug/L)	8.25		8.67									
trichloroethylene	訊號強度	343317	17.52	374682	13.33								
	RF / 回收率%	0.24		0.25									
甲苯	分析濃度值 (ug/L)	8.89		9.33									
toluene	訊號強度	643485	11.15	701900	6.68								
	RF / 回收率%	0.45		0.47									
1,1,2-三氯乙烷	分析濃度值 (ug/L)	9.06		9.71									
1,1,2-trichloroethane	訊號強度	206232	9.44	229769	2.85								
	RF / 回收率%	0.14		0.15									
四氯乙烯	分析濃度值 (ug/L)	9.56		10.40									
tetrachloroethylene	訊號強度	286559	4.38	323736	4.01								
	RF / 回收率%	0.20		0.22									
氯苯	分析濃度值 (ug/L)	9.75		10.20									
chlorobenzene	訊號強度	711982	2.54	773700	1.97								
	RF / 回收率%	0.50		0.52									
乙苯	分析濃度值 (ug/L)	8.74		9.13									
ethylbenzene	訊號強度	1103655	12.64	1197473	8.73								
	RF / 回收率%	0.77		0.81									
間,對-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	19.35		20.41									
m,p-xylene	訊號強度	926848	3.27	1015747	2.07								
	RF / 回收率%	0.32		0.34									
鄰-二甲苯	分析濃度值 (ug/L)	9.68		9.86									
o-xylene	訊號強度	512306	3.22	541866	1.44								
	RF / 回收率%	0.36		0.36									
1,4-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	10.60		11.04									
1,4-dichlorobenzene	訊號強度	629876	6.02	681499	10.44								
	RF / 回收率%	0.44		0.46									
1,2-二氯苯	分析濃度值 (ug/L)	11.03		11.26									
1,2-dichlorobenzene	訊號強度	730863	10.25	775524	12.64								
	RF / 回收率%	0.51		0.52									
萘	分析濃度值 (ug/L)	9.42		9.58									
Naphthalene	訊號強度	963181	5.77	1016848	4.22								
	RF / 回收率%	0.67		0.68									

IS範圍上下限：781311.6~2343934.8

分析日期: 115.04.15

[illegible]

檢驗員:

驗算員:

徐子龍

李仁皇

分析日期: 115.04.15

IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8

檢測項目		樣品編號	IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8										2,2,1,1-四氯	
取樣體積 (ml)		1150415-BK2	KG4001204	KG4001207	KG4001210	KG4001304	KG4001307	KG4001310	KG4001201	KG4001301				
二氯甲烷 methylene chloride *	稀釋倍數	5.0 1.0	5.0 1.0	5.0 1.0	5.0 1.0	5.0 1.0	5.0 1.0	5.0 1.0	5.0 1.0	5.0 1.0				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
反-1,2-二氯乙烯 trans-1,2-dichloroethene *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
甲基第三丁基醚 Methyl tert-butyl ether *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1,1-二氯乙烷 1,1-dichloroethane *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2,2-二氯丙烷 2,2-dichloropropane *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
順-1,2-二氯乙烯 cis-1,2-dichloroethene *	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
溴氯甲烷 bromochloromethane *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
氯仿 chloroform *	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-trichloroethane *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
四氯化碳 carbon tetrachloride *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1,1-二氯丙烯 1,1-dichloropropene *	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

4/33

分析日期: 115.04.15

IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8

檢測項目	樣品編號	IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8										分析日期: 115.04.15				
		1150415-BK2	KG4001204	KG4001207	KG4001210	KG4001304	KG4001307	KG4001310	KG4001201	KG4001301						
取樣體積 (ml)	樣品倍數	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0						
		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
苯 benzene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1,2-二氯乙烷 1,2-dichloroethane *	分析濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
	訊號強度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
三氯乙烯 trichloroethylene *	分析濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1,2-二氯丙烷 1,2-dichloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
二溴甲烷 dibromomethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
一溴二氯甲烷 bromodichloromethane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
順-1,3-二氯丙烯 cis-1,3-dichloropropene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
甲苯 toluene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
反-1,3-二氯丙烯 trans-1,3-dichloropropene	分析濃度值(ug/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
	訊號強度	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
1,1,2-三氯乙烷 1,1,2-trichloroethane *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
四氯乙烯 tetrachloroethylene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.						
	訊號強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉氣相層析質譜儀 NIEA W783

檢驗員:

驗算員:

徐子龍

李仁皇

分析日期: 11S.04.15

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

檢測項目		樣品編號	11S0415-BK2										KG4001204	KG4001207	KG4001210	KG4001304	KG4001307	KG4001310	KG4001201	KG4001301		
取樣體積 (ml)		稀釋倍數	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0			
1,3-二氯丙烷 1,3-dichloropropane	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
一氯二溴甲烷 dibromochloromethane	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1,2-二溴乙烷 1,2-dibromoethane	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
氯苯 chlorobenzene	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1,1,1,2-四氯乙烷 1,1,1,2-tetrachloroethane	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
乙苯 ethylbenzene	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
間,對-二甲苯 m,p-xylene	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
鄰-二甲苯 o-xylene	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
苯乙烯 styrene	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
溴仿 bromoform	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
異丙基苯 isopropylbenzene	分析濃度值(ug/L)		N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.			
	記錄強度		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

4/21

水中揮發性有機化合物檢驗記錄表
檢測方法:吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 NIEA W783

檢驗員: 徐子蘭

驗算員: 李仁皇

分析日期: 115.04.15

IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8

檢測項目		樣品編號		IS範圍上下限: 781311.6-2343934.8										分析日期:	
取樣體積 (ml)		稀釋倍數		1150415-BK2	KG4001204	KG4001207	KG4001210	KG4001304	KG4001307	KG4001310	KG4001201	KG4001301			
1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-tetrachloroethane	分析濃度值(ug/L)	5.0	1.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5.0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
溴苯 bromobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
1,2,3-三氯丙烷 1,2,3-trichloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
正丙基苯 n-propylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
2-氯甲苯 2-chlorotoluene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
1,3,5-三甲基苯 1,3,5-trimethylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
4-氯甲苯 4-chlorotoluene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
1,1-二甲基乙基苯 tert-butylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
1,2,4-三甲基苯 1,2,4-trimethylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
1-甲基丙基苯 sec-butylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		
1,3-二氯苯 1,3-dichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0		
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100		

檢驗員: 徐子蘭

驗算員: 李仁皇

分析日期: 115.04.15

IS範圍上下限: 781311.6~2343934.8

檢測項目		樣品編號	1159415-BK2										2021-12-20	
取樣體積 (ml)			KG4001204	KG4001207	KG4001210	KG4001304	KG4001307	KG4001310	KG4001201	KG4001301				
稀釋倍數			5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0				
對-異丙基甲苯 p-isopropyltoluene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				
1,4-二氯苯 1,4-dichlorobenzene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
正丁基苯 n-butylbenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				
1,2-二氯苯 1,2-dichlorobenzene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
1,2-二溴-3-氯丙烷 1,2-dibromo-3-chloropropane	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				
1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				
六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				
萘 Naphthalene *	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
1,2,3-三氯苯 1,2,3-trichlorobenzene	分析濃度值(ug/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.				
	記錄強度	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	實際濃度值(mg/L)	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100	<0.00100				

*註: 實際濃度值(ug/L) = 分析濃度值(ug/L) × 稀釋倍數 / 1000

分析方法：NIEA W785

檢測項目	樣品編號	115.03.25	1150415-2	1150415-3	1150415-BK2	KG4001204	KG4001207	KG4001210	KG4001304	KG4001307	KG4001310	KG4001201	KG4001301	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
		±0.03min	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT	標準品RT				
氟苯(S)	Fluorobenzene	15.476 ~ 15.536	15.498	15.498	15.507	15.506	15.507	15.506	15.509	15.509	15.508	15.509	15.508				
4-溴氟苯(S)	4-Bromofluorobenzene	24.839 ~ 24.899	24.868	24.868	24.871	24.869	24.869	24.871	24.871	24.869	24.871	24.872	24.872				
1,2-二氯乙烷-d4(SS)	1,2-Dichloroethane-d4	27.946 ~ 28.006	27.975	27.973	27.975	27.977	27.976	27.977	27.977	27.975	27.976	27.977	27.978				
二氯二氟甲烷	Dichlorodifluoromethane	3.732 ~ 3.792	3.762	3.758	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
氯甲烷	Chloromethane	4.237 ~ 4.297	4.264	4.262	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
氯乙烯	Vinyl chloride	4.560 ~ 4.620	4.589	4.588	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
溴甲烷	Bromomethane	5.536 ~ 5.596	5.562	5.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
氯乙烷	Chloroethane	5.829 ~ 5.889	5.862	5.852	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
三氯一氟甲烷	Trichlorofluoromethane	6.569 ~ 6.629	6.597	6.594	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethane	8.004 ~ 8.064	8.032	8.021	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
二氯甲烷	Methylene chloride	9.335 ~ 9.395	9.363	9.355	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
反-1,2-二氯乙烷	trans-1,2-Dichloroethane	10.043 ~ 10.103	10.068	10.064	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
甲基叔丁基醚	Methyl- <i>t</i> -butyl ether	10.061 ~ 10.121	10.092	10.081	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethane	11.135 ~ 11.195	11.161	11.157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2,2-二氯丙烷	2,2-Dichloropropane	12.593 ~ 12.653	12.624	12.612	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
順-1,2-二氯乙烷	cis-1,2-Dichloroethane	12.608 ~ 12.668	12.632	12.627	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
溴氯甲烷	Bromochloromethane	13.206 ~ 13.266	13.232	13.228	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
氯仿	Chloroform	13.408 ~ 13.468	13.435	13.429	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-Trichloroethane	13.851 ~ 13.911	13.879	13.869	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
四氯化碳	Carbon tetrachloride	14.252 ~ 14.312	14.283	14.277	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1,1-二氯丙烷	1,1-Dichloropropane	14.260 ~ 14.320	14.285	14.282	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
苯	Benzene	14.782 ~ 14.842	14.811	14.805	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane	14.843 ~ 14.903	14.873	14.862	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
三氯乙烷	Trichloroethane	16.385 ~ 16.445	16.408	16.408	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	16.949 ~ 17.009	16.974	16.972	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
二溴甲烷	Dibromomethane	17.236 ~ 17.296	17.263	17.258	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
順-1,3-二氯丙烷	cis-1,3-Dichloropropene	17.601 ~ 17.661	17.628	17.621	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
甲苯	Toluene	18.640 ~ 18.700	18.667	18.665	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
反-1,3-二氯丙烷	trans-1,3-Dichloropropene	19.393 ~ 19.453	19.423	19.419	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
		19.892 ~ 19.952	19.919	19.916	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				

揮發性有機化合物檢驗記錄表-定性判定
檢測方法：吹氣捕提氣相層析譜法 NIEA W785

檢驗員：
日期：

檢測項目	樣品編號	1103.25	檢量值	1150H5.2 CCA	1150H5.2 CCB	1150415-BK2	KG4001204	KG4001207	KG4001210	KG4001304	KG4001307	KG4001310	KG4001201	KG4001301	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-Trichloroethane	20.300	~ 20.360	20.329	20.325	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
四氯乙烷	Tetrachloroethane	20.601	~ 20.661	20.628	20.627	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	20.674	~ 20.734	20.701	20.698	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	21.164	~ 21.224	21.194	21.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	21.431	~ 21.491	21.459	21.459	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
氯苯	Chlorobenzene	22.462	~ 22.522	22.489	22.489	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,1,2-Tetrachloroethane	22.623	~ 22.683	22.653	22.651	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
乙苯	Ethylbenzene	22.674	~ 22.734	22.702	22.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
間對二甲苯	m-Xylene & p-Xylene	22.916	~ 22.976	22.945	22.943	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
鄰二甲苯	o-Xylene	22.752	~ 22.812	22.783	22.780	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
苯乙烷	Styrene	23.782	~ 23.842	23.811	23.808	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
溴仿	Bromoform	24.193	~ 24.253	24.221	24.218	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
異丙基苯	Isopropylbenzene	24.502	~ 24.562	24.533	24.531	0.000	0.000	24.530	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethane	25.120	~ 25.180	25.150	25.147	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
溴苯	Bromobenzene	25.167	~ 25.227	25.195	25.194	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	25.225	~ 25.285	25.254	25.253	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
正丙基苯	n-Propylbenzene	25.343	~ 25.403	25.374	25.371	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2-氯甲苯	2-Chlorotoluene	25.544	~ 25.604	25.574	25.572	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,3,5-三甲苯	1,3,5-Trimethylbenzene	25.689	~ 25.749	25.719	25.718	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4-氯甲苯	4-Chlorotoluene	25.763	~ 25.823	25.791	25.792	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,1-二甲苯	1,1-Dimethylbenzene	26.359	~ 26.419	26.389	26.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,4-三甲苯	1,2,4-Trimethylbenzene	26.455	~ 26.515	26.483	26.483	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1-甲基丙基苯	sec-Butylbenzene	26.798	~ 26.858	26.828	26.827	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,3-二甲苯	1,3-Dichlorobenzene	27.054	~ 27.114	27.085	27.085	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
對異丙基苯	p-Isopropylbenzene	27.075	~ 27.135	27.105	27.105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,4-二甲苯	1,4-Dichlorobenzene	27.229	~ 27.289	27.259	27.259	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
正丁基苯	n-Butylbenzene	27.895	~ 27.955	27.925	27.924	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二甲苯	1,2-Dichlorobenzene	27.984	~ 28.044	28.014	28.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	29.523	~ 29.583	29.551	29.553	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,4-三氯丙烷	1,2,4-Trichlorobenzene	31.129	~ 31.189	31.157	31.158	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
六氯丁二烯	Hexachlorobutadiene	31.431	~ 31.491	31.459	31.459	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
萘	Naphthalene	31.649	~ 31.709	31.680	31.679	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1,2,3-三氯苯	1,2,3-Trichlorobenzene	32.147	~ 32.207	32.178	32.177	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

分析方法：NIEA W785

檢測項目	樣品編號	115.03.25	樣重瓶	11504152_CCC	樣品RT	11504152_CCD	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
羧基(S)	Fluorobenzene	15.476	~ 15.536	15.501	15.499	15.499												
4-溴苯基 (SS)	4-Bromofluorobenzene	24.839	~ 24.999	24.868	24.868	24.868												
1,2-二氯乙烷-44(SS)	1,2-Dichlorobenzene-44	27.946	~ 28.006	27.972	27.972	27.974												
二氯二氯甲烷	Dichlorodifluoromethane	3.732	~ 3.792	3.760	3.757	3.757												
氯甲烷	Chloromethane	4.237	~ 4.297	4.264	4.261	4.261												
氯乙烷	Vinyl chloride	4.560	~ 4.620	4.589	4.586	4.586												
溴甲烷	Bromomethane	5.536	~ 5.596	5.563	5.560	5.560												
氯乙烷	Chloroethane	5.829	~ 5.889	5.854	5.852	5.852												
三氯一氯甲烷	Trichlorofluoromethane	6.569	~ 6.629	6.596	6.595	6.595												
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethene	8.004	~ 8.064	8.024	8.022	8.022												
二氯甲烷	Methylene chloride	9.335	~ 9.395	9.357	9.354	9.354												
反-1,2-二氯乙烷	trans-1,2-Dichloroethene	10.043	~ 10.103	10.067	10.064	10.064												
甲基第三丁基醚	Methyl- <i>t</i> -butyl ether	10.061	~ 10.121	10.082	10.081	10.081												
1,1-二氯乙烷	1,1-Dichloroethane	11.135	~ 11.195	11.158	11.156	11.156												
2,2-二氯丙烷	2,2-Dichloropropane	12.593	~ 12.653	12.616	12.620	12.620												
順-1,2-二氯乙烷	cis-1,2-Dichloroethene	12.608	~ 12.668	12.630	12.629	12.629												
溴氯甲烷	Bromochloromethane	13.206	~ 13.266	13.233	13.227	13.227												
氯仿	Chloroform	13.408	~ 13.468	13.431	13.432	13.432												
1,1,1-三氯乙烷	1,1,1-Trichloroethane	13.851	~ 13.911	13.874	13.872	13.872												
四氯化碳	Carbon tetrachloride	14.252	~ 14.312	14.275	14.277	14.277												
1,1-二氯丙烷	1,1-Dichloropropane	14.260	~ 14.320	14.285	14.285	14.285												
苯	Benzene	14.782	~ 14.842	14.807	14.806	14.806												
1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane	14.843	~ 14.903	14.869	14.865	14.865												
三氯乙烷	Trichloroethene	16.385	~ 16.445	16.411	16.406	16.406												
1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	16.949	~ 17.009	16.974	16.974	16.974												
二氯甲烷	Dibromomethane	17.236	~ 17.296	17.257	17.259	17.259												
一溴二氯甲烷	Bromodichloromethane	17.601	~ 17.661	17.625	17.622	17.622												
順-1,3-二氯丙烷	cis-1,3-Dichloropropene	18.640	~ 18.700	18.665	18.665	18.665												
甲苯	Toluene	19.393	~ 19.453	19.420	19.418	19.418												
反-1,3-二氯丙烷	trans-1,3-Dichloropropene	19.892	~ 19.952	19.921	19.916	19.916												

檢測項目	樣品編號	115.00.25	±0.03min	1150415.2_CCC	標準品RT	1150415.2_CCD	標準品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT	樣品RT
1,1,2-三氯乙烷	1,1,2-Trichloroethane	20.300	~ 20.360	20.325	20.326	20.326												
四氯乙烷	Tetrachloroethane	20.601	~ 20.661	20.626	20.627	20.627												
1,3-二氯丙烷	1,3-Dichloropropane	20.674	~ 20.734	20.698	20.697	20.697												
一氯二溴甲烷	Dibromochloromethane	21.164	~ 21.224	21.194	21.190	21.190												
1,2-二氯乙烷	1,2-Dibromoethane	21.431	~ 21.491	21.456	21.457	21.457												
氯苯	Chlorobenzene	22.462	~ 22.522	22.488	22.489	22.489												
1,1,1,2-四氯乙烷	1,1,1,2-Tetrachloroethane	22.623	~ 22.683	22.652	22.653	22.653												
乙苯	Ethylbenzene	22.674	~ 22.734	22.702	22.700	22.700												
間,對-二甲苯	m-Xylene & p-Xylene	22.916	~ 22.976	22.943	22.943	22.943												
鄰-二甲苯	o-Xylene	23.752	~ 23.812	23.782	23.780	23.780												
苯乙烯	Styrene	23.782	~ 23.842	23.809	23.808	23.808												
溴仿	Bromofom	24.193	~ 24.253	24.221	24.221	24.221												
異丙基苯	Isopropylbenzene	24.502	~ 24.562	24.532	24.531	24.531												
1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethane	25.120	~ 25.180	25.147	25.149	25.149												
溴苯	Bromobenzene	25.167	~ 25.227	25.195	25.195	25.195												
1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	25.225	~ 25.285	25.254	25.255	25.255												
正丙基苯	n-Propylbenzene	25.343	~ 25.403	25.372	25.372	25.372												
2-氯甲苯	2-Chlorotoluene	25.544	~ 25.604	25.573	25.572	25.572												
1,3,5-三甲苯	1,3,5-Trimethylbenzene	25.689	~ 25.749	25.718	25.717	25.717												
4-氯甲苯	4-Chlorotoluene	25.763	~ 25.823	25.791	25.790	25.790												
1,1-二甲基乙基苯	tert-Butylbenzene	26.359	~ 26.419	26.389	26.388	26.388												
1,2,4-三甲苯	1,2,4-Trimethylbenzene	26.455	~ 26.515	26.484	26.483	26.483												
1-甲基丙基苯	sec-Butylbenzene	26.798	~ 26.858	26.827	26.826	26.826												
1,3-二氯苯	1,3-Dichlorobenzene	27.054	~ 27.114	27.085	27.084	27.084												
對-異丙基苯	p-Isopropyltoluene	27.075	~ 27.135	27.104	27.103	27.103												
1,4-二氯苯	1,4-Dichlorobenzene	27.229	~ 27.289	27.256	27.256	27.256												
正丁基苯	n-Butylbenzene	27.895	~ 27.955	27.923	27.923	27.923												
1,2-二氯苯	1,2-Dichlorobenzene	27.984	~ 28.044	28.014	28.012	28.012												
1,2-二氯-3-氯丙烷	1,2-Dichloro-3-chloropropane	29.523	~ 29.583	29.552	29.551	29.551												
1,2,4-三氯苯	1,2,4-Trichlorobenzene	31.129	~ 31.189	31.156	31.157	31.157												
六氯丁二烯	Hexachlorobutadiene	31.431	~ 31.491	31.459	31.460	31.460												
萘	Naphthalene	31.649	~ 31.709	31.680	31.678	31.678												
1,2,3-三氯苯	1,2,3-Trichlorobenzene	32.147	~ 32.207	32.177	32.178	32.178												

4/23

附錄二-388

樣品編號: KG4001204																			
認證	序號	品 保 樣 品 名 稱		查核樣品分析結果				添加樣品分析結果				重複品管查核分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (μg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg/L)	回收量 (μg/L)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (μg/L)	分析濃度2 (μg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準	分析濃度1 (μg/L)	分析濃度2 (μg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準	
				1150415-2_QC				KG4001204_SK				1150415-2_QCR				KG4001204_SR			
	*	1	氯甲烷	NIEA W785.58B	10.0	79.2	75~125%	11.4	7.5	65.9	65~135%	7.9	8.6	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	2	氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	94.8	75~125%	11.4	9.1	79.7	65~135%	9.5	10.0	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	3	1,1-二氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	100.1	75~125%	11.4	9.6	84.1	65~135%	10.0	10.7	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	4	二氯甲烷	NIEA W785.58B	10.0	107.8	75~125%	11.4	10.5	92.3	65~135%	10.8	11.1	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	5	反-1,2-二氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	96.2	75~125%	11.4	9.2	80.5	65~135%	9.6	10.3	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	6	甲基第三丁基醚	NIEA W785.58B	10.0	89.0	75~125%	11.4	8.5	74.6	65~135%	8.9	9.4	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	7	1,1-二氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	85.3	75~125%	11.4	8.3	72.5	65~135%	8.5	9.0	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	8	順-1,2-二氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	90.6	75~125%	11.4	8.7	76.6	65~135%	9.1	9.5	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	9	氯仿	NIEA W785.58B	10.0	90.6	75~125%	11.4	8.8	77.3	65~135%	9.1	9.6	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	10	1,1,1-三氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	98.5	75~125%	11.4	9.4	82.3	65~135%	9.9	10.5	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	11	四氯化碳	NIEA W785.58B	10.0	102.5	75~125%	11.4	9.9	87.3	65~135%	10.3	10.9	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	12	苯	NIEA W785.58B	10.0	89.2	75~125%	11.4	8.6	75.6	65~135%	8.9	9.5	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	13	1,2-二氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	83.8	75~125%	11.4	7.9	69.5	65~135%	8.4	8.4	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	14	三氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	87.6	75~125%	11.4	8.7	76.7	65~135%	8.8	9.1	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	15	甲苯	NIEA W785.58B	10.0	94.3	75~125%	11.4	9.0	79.2	65~135%	9.4	10.2	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	16	1,1,2-三氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	101.8	75~125%	11.4	9.6	84.5	65~135%	10.2	10.6	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	17	四氯乙烷	NIEA W785.58B	10.0	107.1	75~125%	11.4	10.2	89.4	65~135%	10.7	11.2	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	18	氯苯	NIEA W785.58B	10.0	102.7	75~125%	11.4	9.6	84.2	65~135%	10.3	10.9	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	19	乙苯	NIEA W785.58B	10.0	91.1	75~125%	11.4	8.7	76.2	65~135%	9.1	9.7	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	20	間,對-二甲苯	NIEA W785.58B	20.0	100.4	75~125%	22.8	19.4	85.1	65~135%	20.1	21.7	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	21	鄰-二甲苯	NIEA W785.58B	10.0	96.7	75~125%	11.4	9.2	80.6	65~135%	9.7	10.3	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	22	1,4-二氯苯	NIEA W785.58B	10.0	110.9	75~125%	11.4	10.6	93.2	65~135%	11.1	11.7	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	23	1,2-二氯苯	NIEA W785.58B	10.0	112.1	75~125%	11.4	10.8	94.8	65~135%	11.2	11.7	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
	*	24	萘	NIEA W785.58B	10.0	90.3	75~125%	11.4	8.4	73.4	65~135%	9.0	9.8	0~25%	N.D.	N.D.	-	0~25%	
			以下空白																

淇 荃 環 保 科 技 有 限 公 司

採樣現場記錄—照片說明表

			
說明:	MW-3(採樣前)(東)	說明:	MW-3(採樣前)(西)
日期:	115.04.14	日期:	115.04.14
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-3(採樣前)(南)	說明:	MW-3(採樣前)(北)
日期:	115.04.14	日期:	115.04.14
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-3(採樣中)	說明:	MW-3(採樣後)(水位計)
日期:	115.04.14	日期:	115.04.14
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
			
說明:	MW-3(水流元)	說明:	MW-3(井牌)
日期:	115.04.14	日期:	115.04.14
地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠	地點:	南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠
		頁次	1/1




環境部 環境檢驗測定機構許可證

環境部國環檢證字第142號

淇荃環保科技有限公司經本部依「環境
檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發
此證。

本證有效期限自114年02月26日至
119年02月25日止

許可證內容詳見副頁

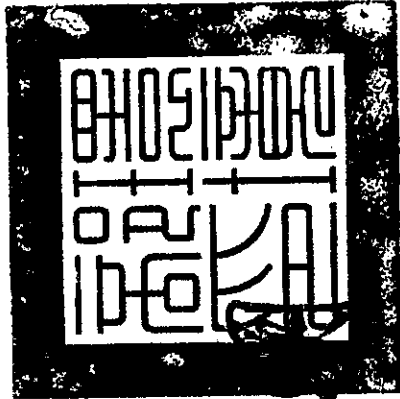

部長彭啓

中華民國114年3月4日



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號
第1頁共3頁

檢驗室名稱：淇荃環保科技有限公司

檢驗室地址：高雄市大社區萬金路349巷21-1號

檢驗室主管：林采慧

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法 (NIEA W103)
- 2、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 3、1,1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 4、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 5、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 6、1,1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 7、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 8、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 9、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 10、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 11、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 12、三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 13、反-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 14、四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(填註地下水檢測類別副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號

第2頁共3頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 15、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 16、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 17、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 18、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 19、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 20、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 21、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 22、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 23、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)



(續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境部國環檢證字第142號

第3頁共3頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 24、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提／氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部114年2月5日環部授研字第1145101132號函辦理。





中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第020號

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1 TEL : 07-8152248 FAX : 07-8152250

地下水樣品檢測報告

報告序號: ET115WG0477

行程代碼: KEUW26040011

檢驗室名稱: 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4001310 (MW-3)

樣品特性: 地下水

樣品編號: ET115WG0477-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

檢測目的: 定檢申報

採樣地點: MW-3

採樣時間: 115/04/14 14:37

採樣結束: 115/04/14 14:37

收樣時間: 115/04/15 11:38

報告日期: 115/04/29

案件編號: ET115WG0477

採樣方法: NIEA W103.56B

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢 驗 值	單 位	檢 驗 方 法	備 註	監 測 標 準	管 制 標 準
總溶解固體物	414	mg/L	NIEA W210.58A		1250	-
總硬度	250	CaCO ₃ mg/L	NIEA W208.51A		750	-
氯鹽	60.3	mg/L	NIEA W415.54B		625	-
硫酸鹽	44.9	mg/L	NIEA W415.54B		625	-
氨氮	ND(<0.005)	mg/L	NIEA W437.52C	MDL=0.005	-	0.25
亞硝酸鹽氮	<0.01(0.0007)	mg/L	NIEA W418.54C		5	10
硝酸鹽氮	0.20	mg/L	NIEA W436.53C		50	100
氟鹽(以F-計)	1.44	mg/L	NIEA W415.54B		4.0	8.0
鎘	ND(<0.00035)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00035	0.025	0.050
鉻	ND(<0.00044)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00044	0.25	0.50
銅	ND(<0.00080)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.00080	5.0	10
鎳	ND(<0.0012)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.0012	0.5	1.0
鉛	ND(<0.0030)	mg/L	NIEA W311.54C	MDL=0.0030	0.05	0.10
鋅	0.005	mg/L	NIEA W311.54C		25	50
汞	ND(<0.000094)	mg/L	NIEA W330.52A	MDL=0.000094	-	0.020
砷	<0.0010(0.0006)	mg/L	NIEA W434.54B		-	0.50
鐵	0.040	mg/L	NIEA W311.54C		1.5	-
錳	0.155	mg/L	NIEA W311.54C		0.25	-
總有機碳	1.2	mg/L	NIEA W532.53C		10	-
總酚	ND(<0.0033)	mg/L	NIEA W524.50C	MDL=0.0033	0.14	-



中環科技事業股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第020號

高雄市前鎮區新街路286之8號8樓-1 TEL: 07-8152248 FAX: 07-8152250

地下水樣品檢測報告

報告序號: ET115WG0477

行程代碼: KEUW26040011

檢驗室名稱: 中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室

計畫名稱: 中區土壤及地下水環保檢測

委託單位: 南亞塑膠工業股份有限公司南亞資源回收廠

行業別: 自述業別

樣品名稱: KG4001310 (MW-3)

樣品特性: 地下水

樣品編號: ET115WG0477-001

採樣單位: 淇荃環保科技有限公司(國環檢證字第142號)

檢測目的: 定檢申報

採樣地點: MW-3

採樣時間: 115/04/14 14:37

採樣結束: 115/04/14 14:37

收樣時間: 115/04/15 11:38

報告日期: 115/04/29

案件編號: ET115WG0477

採樣方法: NIEA W103.56B

聯絡人: 蘇月娥

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	監測標準	管制標準
氰化物	ND(<0.0019)	mg/L	NIEA W468.51C	MDL=0.0019	0.25	0.50
2, 4, 5-三氯酚	ND(<0.00043)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00043	1.85	3.7
2, 4, 6-三氯酚	ND(<0.00046)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00046	0.05	0.1
五氯酚	ND(<0.00041)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00041	0.04	0.08
3, 3'-二氯聯苯胺	ND(<0.00044)	mg/L	NIEA W801.55B	MDL=0.00044	0.05	0.1

以下空白

備註:

1. 本報告已由環境部核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類: 蘇明民(ETA-05)、王仲龍(ETA-07)、鄭昇賀(ETA-09)、蔡智淵(ETA-10)
無機檢測類: 簡淑芬(ETI-04)、施敏華(ETI-05)、沈桂嬌(ETI-07)、游心怡(ETI-08)、李苑如(ETI-09)、黃鳳君(ETI-10)
有機檢測類: 施敏華(ETO-03)、林曉嫻(ETO-05)、卓杏花(ETO-06)
2. 當檢驗值低於方法偵測極限時以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值(方法偵測極限×稀釋倍數)。
3. 當檢驗值介於方法偵測極限與定量極限之間，分析結果以"<定量極限×稀釋倍數"表示。
4. 本樣品係由客戶自行送樣，樣品基本資料均為客戶提供，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所開出罰鍰連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任公務，亦屬於刑法上之公務員。如瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，所為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:

檢驗室主管: